

ROTEC

VersaTech Bariatrique

Lit ultra-bas avec option de système d'assistance motorisé VersaDrive.



Modèle V1100 ULB / ULB+

Manuel d'entretien

Ne pas utiliser le lit et ses accessoires sans avoir d'abord lu ce manuel en entier.
Les illustrations sont uniquement à titre indicatif.

Assistance technique et pièces

☎ 1 450 783-6444 📠 1 450 783-6446

✉ service@rotecbeds.com

📍 420, route Marie-Victorin,
Baie-Du-Febvre (Québec) J0G 1A0, Canada

DOC01M-V11ULB+
Publication : 2026-08-25

Brevets :

Ce produit est protégé par des brevets américains et internationaux ainsi que par des brevets en attente.

Fabriqué par :**Usine Rotec Inc., DBA Rotec International, DBA Rotec**

123 Rue de l'Église

Baie-du-Febvre, QC J0G1A0 CANADA

REPRÉSENTANT AUTORISÉ EU

International Associates Auditing & Certification Limited

The Black Church, St Mary's Place

Dublin 7, Ireland

SPONSOR AUSTRALIEN

AH Essential Limited

PO Box 4, West Ryde

NSW, 1685, Australia

RESPONSABLE AU ROYAUME-UNI

International Associates Limited

38 Queen Street

Glasgow, G1 3DX, Scotland, United Kingdom

REPRÉSENTANT SFDA

Bayet Nahawand Trading Est.

Office No. 5 Building No:3835 Moussa Bin

Naseer Road, Al Olava Dist.

Rivadh, 12331, KSA

AGENT AUX ÉTATS-UNIS

Registrar Corp.

144 Research Drive

Hamptom, Virginia, 23666, United States

TABLE DES MATIÈRES


1. GÉNÉRAL	6
1.1. Symboles	6
1.2. Utilisation prévue	8
1.3. Illustration de l'appareil	10
1.4. Characteristics	11
1.5. Optional features	11
1.6. Intended accessories	11
1.7. Mechanical specifications	11
1.8. Certifications	11
1.9. Electrical certifications	11
1.10. Storage and handling	11
1.11. Compatibilité électromagnétique (EMC)	13
1.12. Étiquetage du lit	14
2. INSTALLATION	16
2.1. Mise sous tension de l'appareil	16
2.2. Vérification avant la mise en service	17
2.3. Positionnement dans l'environnement d'utilisation	18
2.4. Installation / Remplacement du matelas	19
2.5. Compensation de potentiel	20
3. INSTRUCTIONS D'UTILISATION	21
3.1. Fonctions électriques du lit	21
3.2. Déplacement de l'appareil	24
3.3. Barrières latérales	26
3.4. Indicateurs d'angle	27
3.5. Extension du sommier en longueur	27
3.6. Extension du sommier en largeur	29
3.7. Tête et pied de lit	30
3.8. Réglage de l'angle de la section des pieds	31
3.9. Réceptacle pour support intraveineux (IV)	31
3.10. Réceptacle pour sac de drainage	32
3.11. Ouvertures pour courroies de contention	33
3.12. Installation de la barre de trapèze (option)	34
3.13. Réceptacle pour cadre de traction	35
3.14. Fonction CPR mécanique	36
3.15. Appel infirmier et prise DB37	37
3.16. Balance intégrée	38
3.17. Système de détection de sortie du lit	45
3.18. Roue motorisée VersaDrive (option)	47

4.	ENTRETIEN	51
4.1.	Nettoyage	51
4.2.	Entretien préventif	52
4.3.	Disposition de l'appareil en fin de vie	53
4.4.	Guide de dépannage	54
5.	GARANTIE ET POLITIQUE DE RETOUR	57
5.1.	Garantie limitée	57
5.2.	Politique de retour	58
6.	PROCÉDURES DE RÉPARATION	59
6.1.	Remplacement du QLCI (circuit de pesée)	59
6.2.	Remplacement du circuit principal ou de sa batterie	60
6.3.	Remplacement de la batterie VersaDrive	61
6.4.	Remplacement du cordon d'alimentation	63
6.5.	Remplacement du port d'appel infirmier	65
6.6.	Remplacement d'une barrière latérale	66
6.7.	Remplacement de l'extension de structure de pied du lit	67
6.8.	Remplacement d'un pare-choc	68
6.9.	Remplacement d'une roulette du lit	69
6.10.	Remplacement de la cellule de charge	72
6.11.	Remplacement du moteur de la section des pieds	74
6.12.	Remplacement du moteur du dossier	76
6.13.	Remplacement des moteurs d'élévation	82
6.14.	Remplacement de la poignée CPR	84
6.15.	Remplacement du câble de commande CPR	85
6.16.	Remplacement du cadre d'élévation des pieds	86
6.17.	Remplacement du cadre d'élévation de la tête	89
7.	DESSINS TECHNIQUES	92

1. GÉNÉRAL

1.1. Symboles

Sur les étiquettes de l'appareil

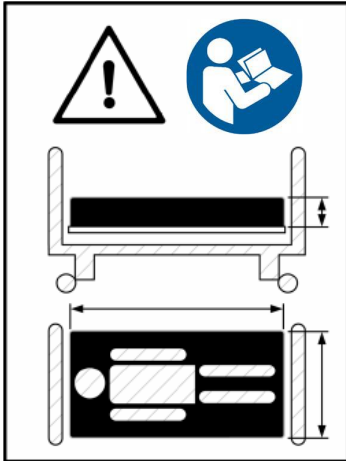

Symbole indiquant qu'il est très important de respecter les dimensions du matelas et de consulter le manuel de l'utilisateur pour connaître les caractéristiques.



Symbole illustrant les conditions que le patient doit respecter pour utiliser le lit en toute sécurité.



Symbole illustrant le poids maximal du patient autorisé sur l'appareil.



Symbole illustrant le poids maximal permis sur l'appareil, incluant le patient, le matelas et tous les accessoires (support intraveineux, trapèze, cadre de traction, sac de drainage, etc.).



Symbole indiquant de consulter le manuel de l'utilisateur.



Symbole illustrant la protection contre les éclaboussures de liquide.



Symbole indiquant une protection électrique de type B.



Symbole illustrant le sceau d'approbation de la CSA (Association canadienne de normalisation).



Symbole indiquant qu'il s'agit d'un appareil électrique de Classe I avec mise à la terre.



Symbole indiquant que l'alimentation électrique doit être en courant alternatif.



Symbole signifiant que le fabricant ou l'importateur atteste de la conformité du produit aux normes européennes de santé, de sécurité et de protection de l'environnement.



Symbole indiquant un dispositif médical européen.



Symbole indiquant un dispositif médical de Classe I (faible risque).



Symbole indiquant que l'article ne doit pas être jeté à la poubelle et doit être recyclé correctement.



Symbole de fixation pour connecteur d'égalisation de potentiel.

*Pour les symboles des claviers et des boutons, se référer à la section 3.

Dans ce manuel



Avertissement :

Utilisé lorsqu'une attention particulière doit être portée à l'information afin de prévenir des blessures et/ou une défaillance potentielle.

Abréviations

CPR : Réanimation cardio-respiratoire

SWL : Charge de travail sécuritaire (Safe Working Load)


1.2 Utilisation prévue

Ce manuel a été conçu pour vous aider à utiliser le lit VersaTech 1100 ULB+ de Rotec. Assurez-vous de lire ce document avant d'utiliser l'appareil afin de garantir une utilisation sécuritaire et sans risque.

Ce manuel fait partie intégrante de l'appareil et doit toujours accompagner l'unité lors de sa vente ou de son transfert. Il doit être en tout temps accessible au personnel médical et au personnel d'entretien.

Domaine : Cet appareil est conçu pour être utilisé dans des environnements de soins médicaux tels que les hôpitaux ou d'autres établissements médicaux nécessitant une surveillance médicale et, si nécessaire, des mesures de contrôle. Il est destiné aux procédures médicales, incluant le traitement, le diagnostic, la supervision ainsi que le maintien ou l'amélioration de l'état d'un patient. Cela comprend les soins intensifs, les soins ambulatoires ainsi que les soins médicaux à court et à long terme. Il n'est pas conçu pour une utilisation à domicile. Cet appareil ne doit jamais être utilisé en présence de gaz anesthésique inflammable mélangé à de l'air, de l'oxygène ou du protoxyde d'azote.

Parties appliquées: Les parties de l'appareil prévues pour être en contact avec le patient et l'opérateur comprennent la tête de lit, le pied de lit, les barrières latérales, l'interface, la plateforme ainsi que tous les accessoires conçus pour être utilisés avec l'appareil.

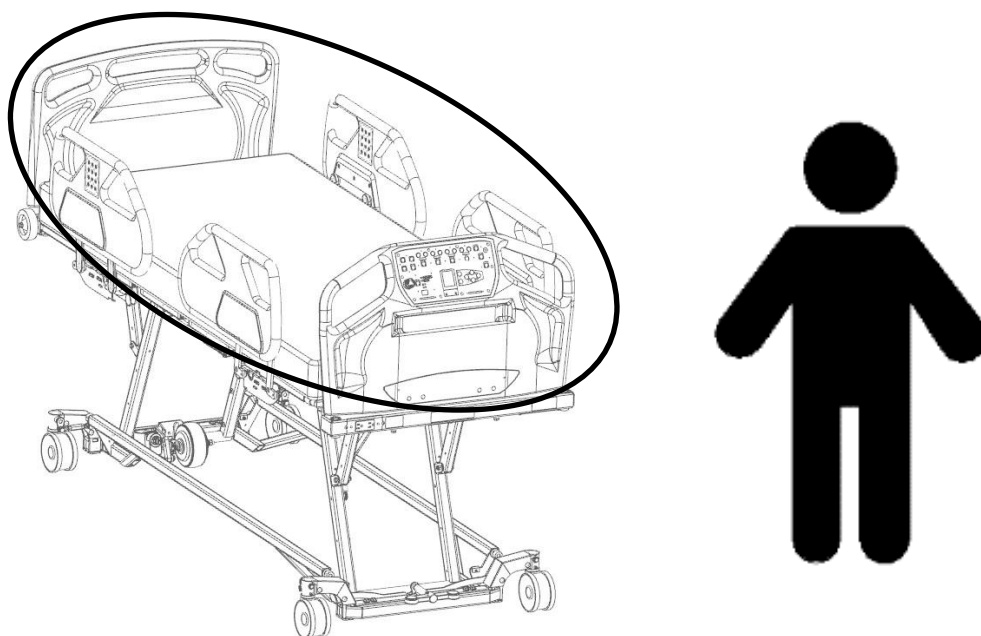

Patient : Les patients sont destinés à utiliser un sous-ensemble des fonctions de l'appareil au moyen des commandes internes. L'appareil est conçu pour des patients adultes ayant un IMC de 30 ou plus et un poids compris entre 250 lb (114 kg) et 1000 lb (454 kg). Ce lit n'est pas conçu pour des patients présentant des troubles du comportement ou de santé mentale.

Opérateur : L'opérateur de cet appareil est censé être un professionnel de la santé, tel qu'une infirmière, un médecin ou un préposé aux soins. L'opérateur doit être capable de comprendre et d'appliquer les instructions fournies dans ce manuel. De plus, il est prévu que le patient puisse accéder à certaines fonctions lorsqu'il est dans le lit.

Cycle de vie : Cet appareil est conçu pour avoir une durée de vie de 10 ans dans des conditions normales d'utilisation et de fonctionnement (se référer aux spécifications et aux conditions d'utilisation dans les sections suivantes).


Rotec ne peut être tenue responsable des dommages ou blessures résultant d'une négligence ou d'une mauvaise utilisation de ses produits. De plus, toutes les illustrations fournies dans ce document sont uniquement à titre de référence.



AVERTISSEMENTS CONCERNANT L'UTILISATION PRÉVUE

- Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation pédiatrique ni pour des personnes ayant un indice de masse corporelle (IMC) inférieur à 30. L'utiliser dans de tels cas présente un **RISQUE SÉRIEUR DE PIÉGEAGE POUVANT MENER À LA MORT**.
- Il est essentiel de lire attentivement ce manuel et de s'assurer d'une formation adéquate du personnel avant d'utiliser le lit et ses accessoires afin de prévenir **TOUTE BLESSURE** tant pour l'utilisateur que pour le personnel.

1.3 Illustration de l'appareil

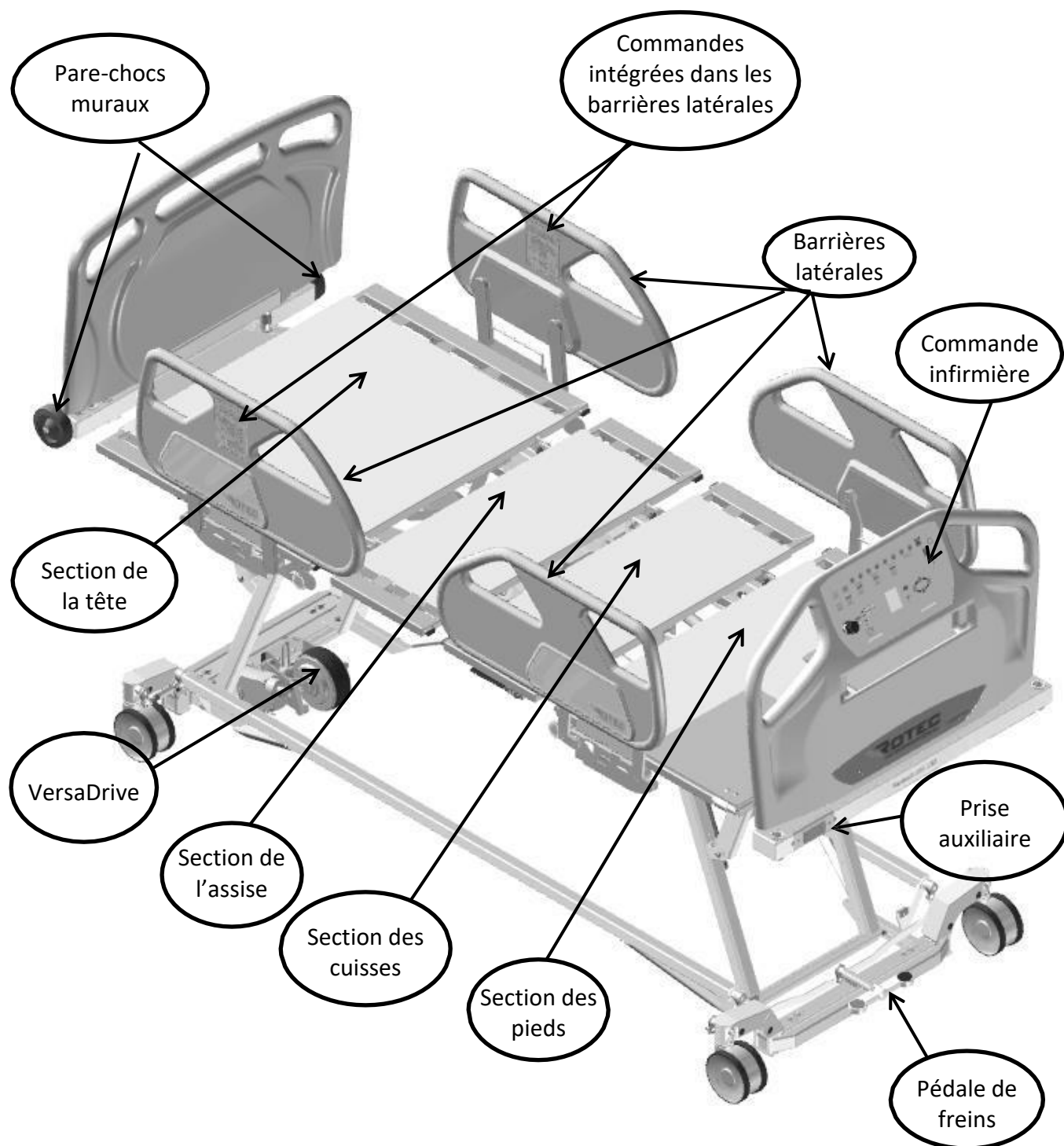

1.4 Caractéristiques	1.6 Accessoires prévus
• Hauteur réglable du lit • Sommier de lit inclinable (Trendelenburg) • Sommier ajustable en largeur • Sommier ajustable en longueur • Section dossier inclinable • Section cuisse inclinable • Section pieds inclinable • Appareil mobile sur roues antistatiques de 12,7 cm (5") de diamètre • Réceptacle pour cadre de traction • Réceptacle pour support intraveineux • Réceptacle pour sac de drainage • Réceptacle pour courroie de contention • Réceptacle pour barre de trapèze • Support pour câble d'alimentation • Système de frein synchronisé avec fonction directionnelle sur la roue • Demi-barrière latérale en composite • Retenue de matelas au pied intégrée • Indicateurs d'angle intégrés • Télécommande amovible • Batterie de secours pour autonomie temporaire • Appel infirmier • Fonction RCR électrique • Fonction RCR mécanique • Commandes au pied de lit et dans les barrières latérales • Fonction auto-contour • Position chaise cardiaque • Têtes et pieds de lit en composite, amovibles sans outils • Système de balance intégrée et détection de sortie du lit (détection en trois zones) • Lumière sous le lit	• Matelas, 9 kg (20 lb) • Barre de trapèze, 11 kg (23 lb) • Support intraveineux (IV), 0.5 kg (1.1 lb) • Sac de drainage* • Cadre de traction* • Courroie de contention * <i>* Produit non offert par le fabricant de l'appareil.</i>
1.5 Fonctionnalités optionnelles • Télécommande supplémentaire • Chariot de transport • Roue motorisée VersaDrive • Prise d'alimentation auxiliaire <i>Les options peuvent modifier les dimensions. Les dimensions indiquées ici ne tiennent pas compte des tolérances de fabrication.</i>	1.7 Spécifications mécaniques Capacité de charge maximale Patient : 454 kg (1000 lb) Trapèze : 77 kg (170 lb) Support intraveineux (IV) : 10 kg (22 lb) 5 kg par crochet Total (SWL) : 500 kg (1100 lb) Poids de l'appareil sans accessoires : 263 kg (580 lb) Dimensions hors tout Largeur : 102 cm / 109 cm 117 cm / 132 cm (40" / 43" / 46" / 52") Longueur : 237 cm / 247 cm / 257 cm (93 1/8" / 97 1/8" / 101 1/8") Dimension du sommier Hauteur minimum : 21.6 cm (8 1/2") Hauteur maximum : 81.3 cm (32") Largeur : 88.9 cm / 96.5 cm 104 cm / 119 cm (35" / 38" / 41" / 47") Longueur : 203 cm / 213 cm / 223 cm (80" / 84" / 88") Angle d'inclinaison maximum Section dossier : 70° Section cuisse : 32° Section pieds : 16° Trendelenburg: ±14° Matelas recommandé Longueur : 203 cm / 213 cm / 223 cm (80" / 84" / 88") Épaisseur : 12.7 to 15.2 cm (5" to 6") (jusqu'à 9" / 22,9 cm – voir p. 18) Largeur : 91 cm / 99 cm / 107 cm / 122 cm (36" / 39" / 42" / 48") <i>Pour plus d'informations sur la compatibilité des matelas, veuillez vous référer à la section 2.4.</i>

1.8 Certifications	Suite des spécifications électriques																
- CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:14 (R2018), AMD 2:2022 - CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1-6:11 (R2016), AMD 1:2015, AMD 2:2021 - CAN/CSA-C22.2 No.60601-1-9:15 - Première édition – jusqu'à l'errata inclus : janvier, 2017, AMD 2:2021 - CAN/CSA-C22.2 No. 60601-2-52:11, AMD1:2017, Clauses d'exclusion 17 & 11.7 - ANSI/AAMI ES60601-1:2005/(R2012) + A1:2012, C1:2009/(R2012) + A2:2010/(R2012) - ANSI/AAMI ES60601-1:2005 / A2:2021 - IEC 60601-1:2005 + A1:2012 + A2:2020 - IEC 60601-1-6:2006 + A1: 2013 + A2:2020 - IEC 60601-2-52:2009 + A1:2015, Clauses d'exclusion 17 & 11.7 - IEC 60601-1-2:2014 + A1:2020 - IEC 60601-1-9:2007 + A1:2013 + A2:2020	Modèle : VersaTech 1100 ULB+ Isolation : Classe I Alimentation : 120/220/230/240 VAC Cycles : 50/60 Hz Courant maximal : <u>120V Model</u> Avec prise auxiliaire : 8.75A Avec VersaDrive : 4.65 A Avec VersaDrive & prise auxiliaire : 9.65A <u>Modèle 220/230/240V</u> Avec prise auxiliaire : 6.25A Avec VersaDrive: 4.65A Avec VersaDrive & prise auxiliaire : 7.15A Protection: IPX4 Cycle d'utilisation : Maximum 10% (2 min. / 18 min.) Pression acoustique < 55 dBa maximale : Précision de la balance ± 1 kg (2 lb). (lorsqu'installé) : Min: 100 Kg e: 0.5 Kg Balance CE Classe III																
1.9 Spécifications électriques	1.10 Entreposage et manutention																
<table border="1"> <tr><td>Modèle :</td><td>VersaTech 1100 ULB</td></tr> <tr><td>Isolation :</td><td>Classe II</td></tr> <tr><td>Tension nominable :</td><td>120/220/230/240 vac</td></tr> <tr><td>Cycles :</td><td>50/60 Hz</td></tr> <tr><td>Courant maximal :</td><td><u>Modèle 120V</u></td></tr> <tr><td></td><td>Sans VersaDrive ni prise auxiliaire : 4.5A</td></tr> <tr><td></td><td><u>Modèle 220/230/240V</u></td></tr> <tr><td></td><td>Sans VersaDrive ni prise auxiliaire : 4.5A</td></tr> </table>  Notez que le modèle ULB+ est un appareil de Classe I et doit être branché dans une prise mise à la terre. Raccorder l'appareil à un réseau d'alimentation sans borne de mis à la terre augmente le RISQUE DE CHOC	Modèle :	VersaTech 1100 ULB	Isolation :	Classe II	Tension nominable :	120/220/230/240 vac	Cycles :	50/60 Hz	Courant maximal :	<u>Modèle 120V</u>		Sans VersaDrive ni prise auxiliaire : 4.5A		<u>Modèle 220/230/240V</u>		Sans VersaDrive ni prise auxiliaire : 4.5A	Environnement d'utilisation Température 5 à 40 °C Humidité relative 15% à 95% (Sans condensation) Pression atmosphérique 70kpa à 106kpa Environnement d'entreposage Température - 40 à 70 °C Humidité relative 10% à 100% (Sans condensation) Pression atmosphérique 70kpa à 106kpa
Modèle :	VersaTech 1100 ULB																
Isolation :	Classe II																
Tension nominable :	120/220/230/240 vac																
Cycles :	50/60 Hz																
Courant maximal :	<u>Modèle 120V</u>																
	Sans VersaDrive ni prise auxiliaire : 4.5A																
	<u>Modèle 220/230/240V</u>																
	Sans VersaDrive ni prise auxiliaire : 4.5A																

 AVERTISSEMENTS CONCERNANT LES FONCTIONNALITÉS ET LES SPÉCIFICATIONS

- Assurez-vous que la hauteur du lit permet une entrée et une sortie sécuritaires et faciles de l'appareil. Dans le cas contraire, il existe un **RISQUE DE CHUTE** pouvant entraîner des **BLESSURES GRAVES**.
- Avant d'abaisser complètement le lit, assurez-vous qu'aucune partie du corps du patient ne dépasse du lit ou ne se trouve en dessous afin de prévenir des **BLESSURES GRAVES ET/OU DES DOMMAGES**
- POTENTIELS** à l'appareil.

1.11 Compatibilité électromagnétique (EMC)

Ce lit d'hôpital est conforme aux normes suivantes de compatibilité électromagnétique.

Normes et noms des tests	Conformité	Résultats
CISPR 11 (2024) Émissions conduites	Groupe 1 - classe A 150kHz-30MHz	Conforme
CISPR11 (2024) Émissions rayonnées (Prescan 3m)	Groupe 1 - classe A 30MHz-1GHz	Conforme
CISPR11 (2015) A1 (2016) Émissions rayonnées (10m)	Groupe 1 - classe A 30MHz-1GHz	Conforme
IEC 61000-3-2 (2018) A1 (2020) Limites d'émission de courant harmonique	Classe A	Conforme
IEC 61000-3-3 (2013) A1 (2017) A2 (2021) Fluctuations de tension et limitations du papillotement	Observation Pst : 10 min. Observation Plt : 120 min	Conforme
IEC 61000-4-2 (2025) Immunité aux décharges électrostatiques	Contact: $\pm 8\text{kV}$ Air: $\pm 2\text{kV}$, $\pm 4\text{kV}$, $\pm 8\text{kV}$, $\pm 15\text{kV}$	Conforme
IEC 61000-4-3 (2020) Immunité aux champs électromagnétiques rayonnés	80MHz-1000MHz: 3V/m 1GHz-2.7GHz: 3V/m	Conforme
	Essais supplémentaires visant à satisfaire aux exigences de la norme CEI 60601-1-2 relatives aux champs de proximité émis par les appareils de communication sans fil à radiofréquence : 385MHz: 27V/m 710MHz, 745MHz, 780MHz: 9V/m 450MHz, 810MHz, 870MHz, 930MHz: 28V/m 1.72GHz, 1.845GHz, 1.97GHz, 2.45GHz: 28V/m 5.24GHz, 5.5GHz, 5.785GHz: 9V/m	Conforme
IEC 61000-4-4 (2012) Immunité aux transitoires électriques rapides	Puissance : $\pm 2\text{kV}$ / 100kHz I/O Ports : $\pm 1\text{kV}$ / 100kHz Ports de communication : N/A	Conforme
IEC 61000-4-5 (2014) A1 (2017) Immunité aux surtensions	Puissance : $\pm 2\text{kV}$ L-PE / $\pm 1\text{kV}$ LL I/O Ports : N/A Ports de communication : N/A	Conforme
IEC 61000-4-6 (2023) Immunité aux perturbations conduites, induites par les champs RF	Puissance : 3V I/O Ports : 3V Ports de communication : 3V	Conforme
IEC 61000-4-8 (2009) Immunité aux champs magnétiques d'alimentation	Champ continu : 30A/m / 50Hz & 60Hz	Conforme
IEC 61000-4-11 (2020) Immunité aux creux de tension, aux interruptions de courte durée et aux variations de tension sur l'entrée CA	Chutes de tension : 0%Un durant un demi-cycle 0%Un durant un cycle 70%Un durant 25 cycles (à 50Hz) 70%Un durant 30 cycles (à 60Hz) Brèves interruptions : 0%Un durant 250 cycles (à 50Hz) 0%Un durant 300 cycles (à 60Hz)	
IEC 60601-1-2(2014) Champs de proximité des équipements RF	30kHz: 8A/m (CW) 134.2kHz: 65A/m (PM 2.1kHz) 13.56MHz: 7.5A/m (PM 50kHz)	Conforme



AVERTISSEMENTS CONCERNANT LA COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE

- Les équipements de communication RF portables, incluant les périphériques tels que les câbles d'antenne et les antennes externes, **doivent être maintenus à une distance d'au moins 12 pouces (30 cm) de toute partie du lit**, y compris ses câbles.
- Évitez d'empiler ou de placer l'équipement à proximité d'autres appareils afin de prévenir tout dysfonctionnement. Si l'empilement ou la proximité est nécessaire, surveillez attentivement l'équipement pour assurer son bon fonctionnement.
- L'utilisation d'accessoires, de capteurs ou de câbles autres que ceux spécifiés ou fournis par le fabricant **peut augmenter les émissions électromagnétiques, réduire l'immunité électromagnétique** et entraîner un dysfonctionnement.

1.12 Étiquetage du lit

Étiquette d'identification du lit avec UDI

Sur l'étiquette d'identification du lit, on peut trouver des informations telles que l'adresse du fabricant, la date de fabrication, le code UDI, les symboles, le modèle du produit, le numéro de série du produit, les spécifications électriques, le représentant à l'étranger, ainsi que d'autres informations pertinentes.

Exemple d'étiquette avec code UDI HIBCC :



FABRIQUÉ PAR / MADE BY
Usine ROTEC inc.
123, de l'Église
Baie-du-Febvre, QC.
J0G 1A0





+B303E0420/\$\$+7096559/16D20241029E

MOD. VERSATECH xxxULB+	xxx X xxx	2024-10-29	Charge/Load 318 kg (700 lbs)
SER. XXXXXX	AMPS: 9.65	VOLT: 120~	
Cycle d'utilisation / Duty cycle: 10% Fabriqué au Canada / Made in Canada			= = =

Exemple d'étiquette avec code GS1 UDI :



Usine ROTEC inc.
123, de l'Église
Baie-du-Febvre, QC.
J0G 1A0



Scale System
 Class III
 2014/31/EU
 Non-Automatic Weighing Instrument
 MAX: 500Kg, Min: 100Kg, e: 0,5Kg
 Operating temperature : +5 to +40 C

EU REP

C

E

MD

CLASS Im

!

X

M23

2862

i


IPX4

!

PART# V11ULB+-EU-1110	Charge/Load 499 kg (1100 lbs)
MOD. VERSATECH 1100 ULB+	35-47 X 80-88
SER. 097533	AMPS: 7.15 VOLT: 220/230/240~ HZ: 50
 (01)7540161720216 (21)097533 (11)250415	
Cycle d'utilisation / Duty cycle: 10% Fabriqué au Canada / Made in Canada	


Étiquette de capacité de charge du lit :

V1100 ULB / ULB+

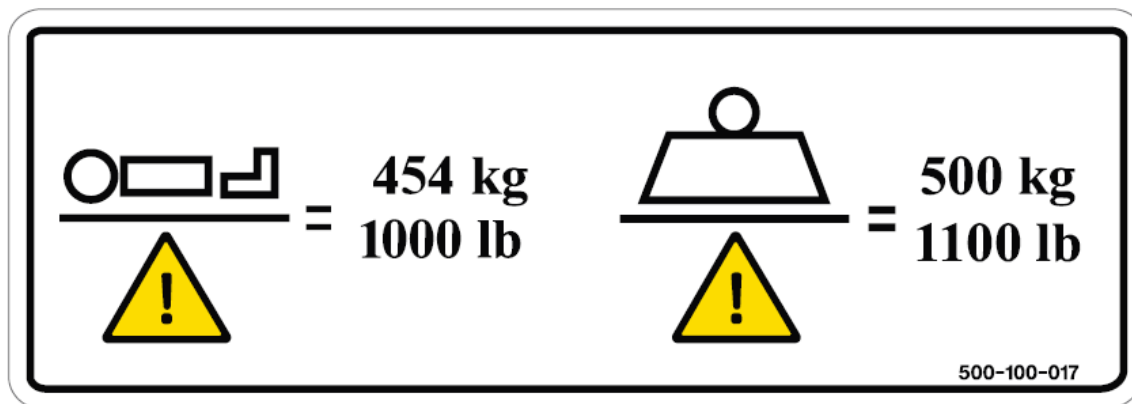


Étiquette de restriction pour le patient du lit :

V1100 ULB / ULB+

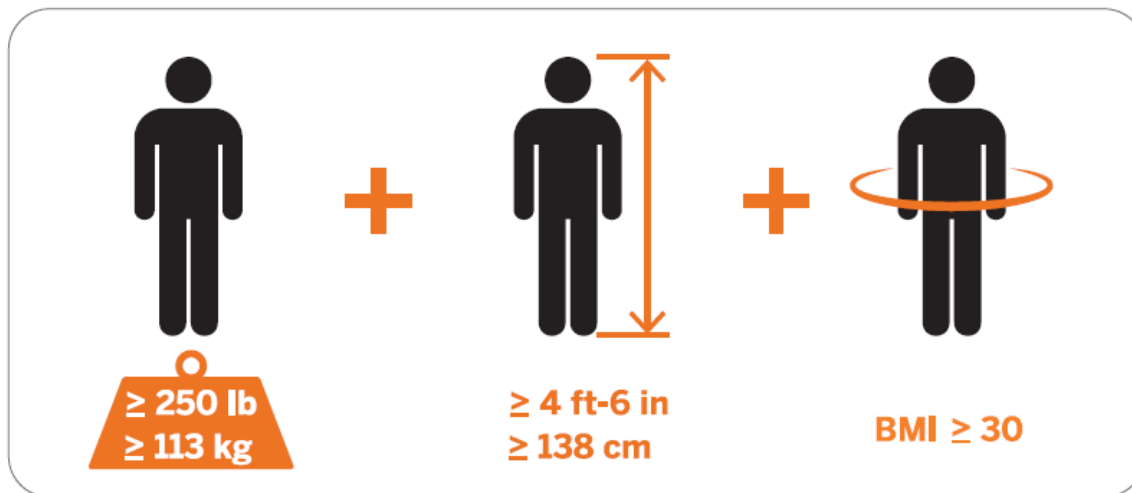

Étiquette de taille de matelas recommandée :

V1100 ULB / ULB+

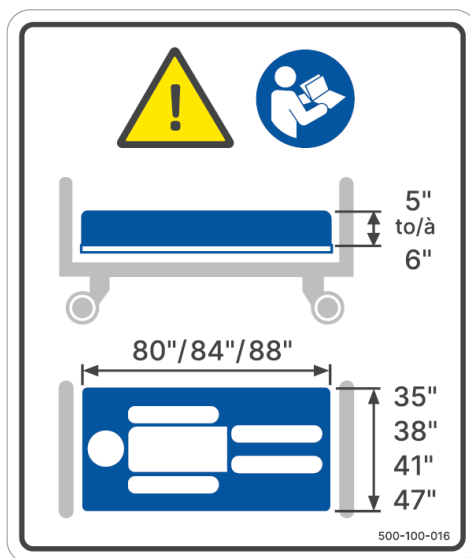

2. INSTALLATION

2.1. Mise sous tension de l'appareil

La tension principale de l'appareil peut toujours être déconnectée en toute sécurité en débranchant le câble d'alimentation de l'unité de la prise murale désignée. Assurez-vous que le câble d'alimentation reste facilement accessible en tout temps.

Notez que cet appareil est de Classe I et doit être branché dans une prise mise à la terre.



AVERTISSEMENTS CONCERNANT L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DE L'UNITÉ

- Raccorder l'appareil à un réseau d'alimentation électrique sans borne de mise à la terre augmente le **RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE**.
- Si une quantité importante de liquide est accidentellement renversée sur des composants électroniques, des câbles ou des moteurs, leur fonctionnalité peut être compromise. Dans ce cas, débranchez immédiatement le lit, retirez l'utilisateur du lit, puis faites nettoyer et inspecter le lit par des techniciens qualifiés. Le lit ne doit pas être remis en service avant d'avoir été correctement nettoyé et inspecté. Ne pas suivre ces instructions peut compromettre l'intégrité de l'appareil et entraîner des **BLESSURES GRAVES**.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation reste dans un endroit sécuritaire pendant l'utilisation de l'appareil afin d'éviter des dommages pouvant entraîner des **BLESSURES GRAVES PAR ÉLECTROCUTION**.

2.2. Vérification avant la mise en service

Pour s'assurer qu'aucun dommage n'est survenu durant le transport du lit, les vérifications suivantes doivent être effectuées :

- (Le cas échéant) Vérifiez que l'emballage de l'appareil est intact et ne présente aucun dommage visible.
- (Le cas échéant) Déballez l'appareil de son emballage.
- Effectuez une inspection visuelle pour confirmer que l'appareil semble en bon état.
- Branchez le câble d'alimentation de l'appareil.
- Laissez l'appareil branché pendant au moins 48 heures consécutives.
- Vérifiez que toutes les fonctions fonctionnent conformément aux instructions fournies dans ce manuel (voir Section 3).
- Débranchez le câble d'alimentation et actionnez les moteurs pour tester la batterie.

Note importante : La vérification de la fonction CPR doit être effectuée avec un matelas et une personne correctement positionnée, car elle est calibrée pour le poids prévu du patient.

Si un dommage ou un dysfonctionnement est détecté, contactez immédiatement sans hésitation le service technique de Rotec.




AVERTISSEMENTS CONCERNANT LA VÉRIFICATION

- Assurez-vous que les câbles d'alimentation des appareils électriques à proximité ne s'emmêlent pas dans les parties mobiles de l'appareil. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner des **BLESSURES GRAVES PAR ÉLECTROCUTION**.

2.3. Positionnement dans l'environnement d'utilisation


Pour installer ce modèle de lit, placez-le à l'horizontale à une distance minimale de 127 mm (5 pouces) du mur. De même, assurez-vous qu'aucun objet n'obstrue la section du pied avant d'engager les freins (voir Section 3.2).

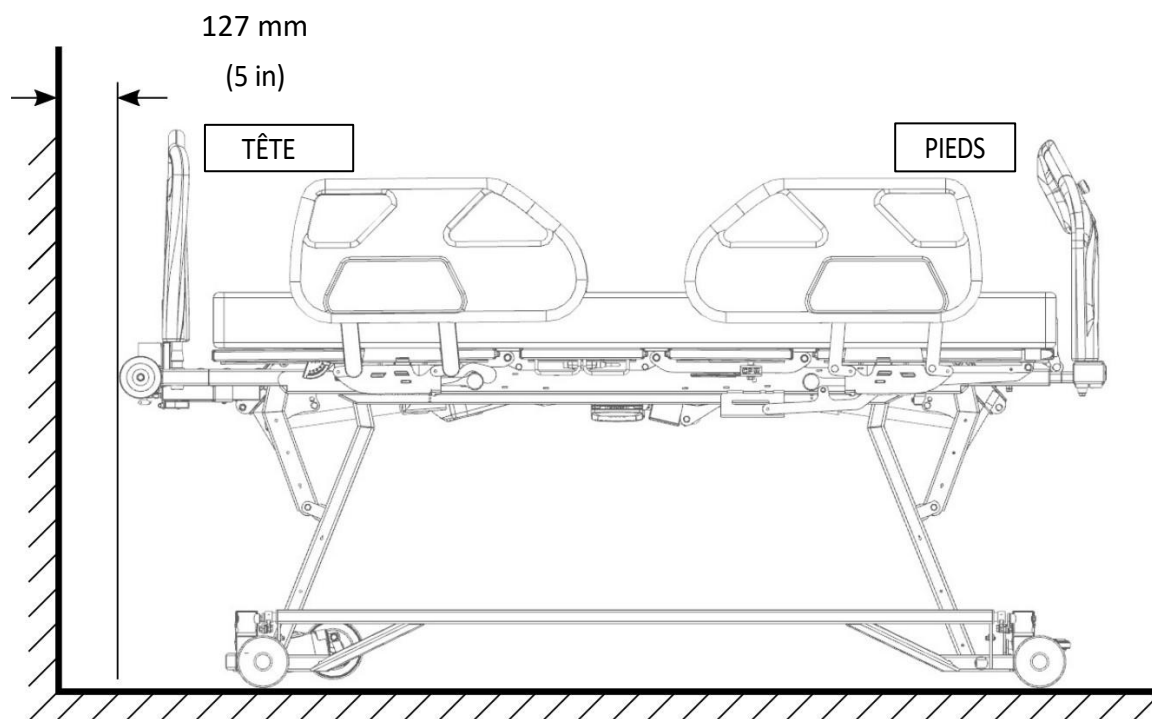

Cela permet d'utiliser le lit sans se soucier d'un contact avec le mur.

2.4. Installation / Remplacement du matelas

Utilisez un matelas qui respecte les spécifications recommandées. Assurez-vous que la configuration de la plateforme correspond au matelas (voir Spécifications mécaniques).

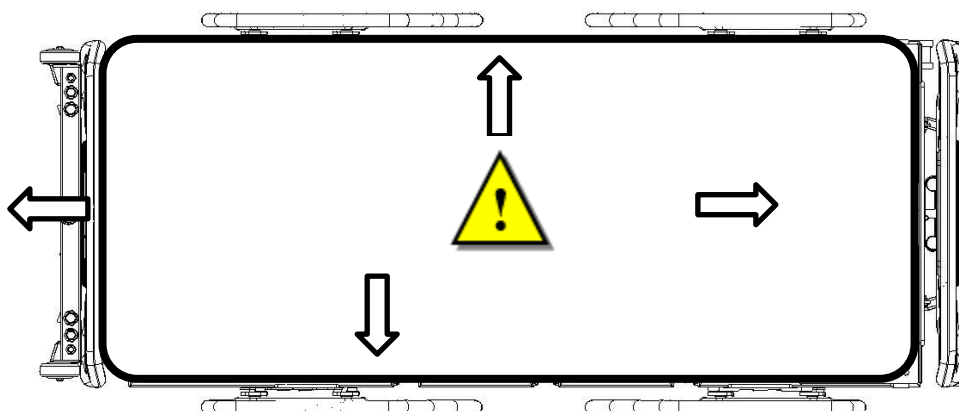

Placez le matelas sur l'appareil et insérez-le entre les protections latérales de la plateforme. Notez que le matelas doit être comprimé pour bien s'adapter. Sinon, le réglage de la plateforme est incorrect pour les dimensions du matelas.



AVERTISSEMENTS CONCERNANT LES FONCTIONNALITÉS ET LES SPÉCIFICATIONS

- Utilisez un matelas de la bonne taille, correctement adapté aux dimensions de la plateforme, afin de prévenir les **RISQUES DE PIÉGEAGE** entre les barrières latérales et le matelas, ce qui pourrait entraîner la **MORT**.



AVERTISSEMENTS CONCERNANT L'ÉPAISSEUR DU MATELAS


- Le lit VersaTech 1100 est conçu pour des matelas d'une épaisseur maximale 152 mm (6 po).
- Dans certaines situations cliniques (par exemple pour la prévention des escarres ou pour améliorer le confort), des matelas plus épais de 200 à 230 mm (8–9 po) peuvent être utilisés. **Les matelas plus épais peuvent être utilisés en conjonction avec une évaluation clinique spécifique à chaque patient.**
- Les matelas plus épais diminuent la hauteur protectrice des barrières latérales. **Même si l'immersion du patient peut partiellement rétablir l'efficacité de cette protection**, une hauteur minimale de 220 mm doit être assurée aux endroits clés du corps.
- L'utilisation de matelas d'une épaisseur de 200 à 230 mm n'est permise que si elle est **cliniquement justifiée par le personnel médical** et assortie de mesures de surveillance appropriées visant à réduire le risque de chute du patient.
- En raison de son profil ultra-bas (21,6 cm / 8,5 po), le lit permet de **diminuer la gravité des blessures** en cas de chute, par rapport aux lits standards dont la hauteur varie de 30 à 38 cm (12 po à 15 po).
- Pour une sécurité accrue, **maintenez toujours** le lit à sa hauteur minimale lorsque le patient n'est pas surveillé, particulièrement si un matelas d'une épaisseur différente de celle initialement recommandée est utilisé.

2.5. Compensation de potentiel

Ce lit est équipé d'un connecteur pour l'égalisation de potentiel entre le lit et d'autres équipements médicaux qui serait connecté au patient afin de protéger ce dernier de potentiel décharge statique.

Connecter l'équipement médical et le lit via leurs terminaux d'équipotentialité avant de connecter l'appareil médical au patient.

Avant de déplacer le lit, veuillez à déconnecter l'équipement médical du patient et de déconnecter le raccord d'équipotentialité du lit.

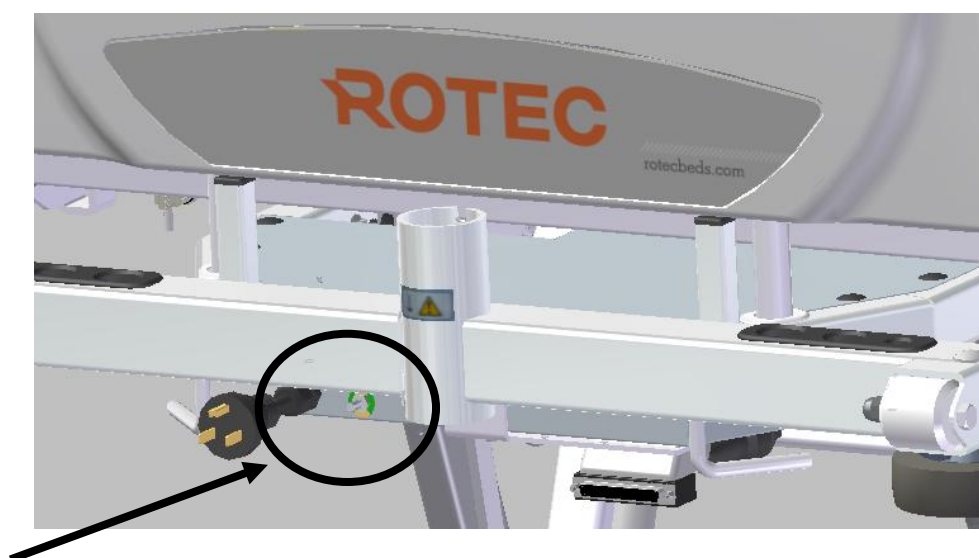

3. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

3.1. Fonctions électriques du lit

Symboles	Descriptions
	Flèche vers le haut : Permet le réglage vers le haut des différentes fonctions de l'équipement.
	Flèche vers le bas : Permet le réglage vers le bas des différentes fonctions de l'équipement.
	Fonction dossier : Permet le réglage de l'inclinaison de la section du dossier vers le haut ou vers le bas. Appuyez sur la flèche pointant vers le haut ou vers le bas, située à côté des symboles, pour activer le moteur. Relâchez la commande pour arrêter tout mouvement.
	Fonction cuisse : Permet le réglage de l'inclinaison de la section des cuisses ainsi que la montée ou la descente de la section des pieds. Appuyez sur la flèche pointant vers le haut ou vers le bas, située à côté des symboles, pour activer le moteur. Relâchez la commande pour arrêter tout mouvement.
	Fonction auto-contour : Permet d'incliner simultanément la section des cuisses et la section du dossier, ainsi que d'ajuster la hauteur de la section des pieds vers le haut ou vers le bas. Appuyez sur la flèche pointant vers le haut ou vers le bas, située à côté des symboles, pour activer le moteur. Relâchez la commande pour arrêter tout mouvement.
	Fonction sommier : Permet d'ajuster la hauteur du lit vers le haut ou vers le bas. Appuyez sur la flèche pointant vers le haut ou vers le bas, située à côté des symboles, pour activer le moteur. Relâchez la commande pour arrêter tout mouvement. Remarque : Les boutons situés à l'intérieur des barrières latérales et sur la télécommande ont une portée limitée pour abaisser le lit, pour des raisons de sécurité. Pour abaisser le lit à sa hauteur minimale, utilisez les commandes situées sur le panneau au pied du lit.
	Fonction Trendelenburg : Permet d'incliner le lit afin que la section des pieds soit plus basse que la section de la tête, et inversement. Appuyez sur la flèche pointant vers le haut ou vers le bas, située à côté des symboles, pour activer le moteur. Relâchez la commande pour arrêter tout mouvement. Remarque : la fonction s'arrête lorsque le lit revient en position horizontale.

	Fonction verrouillage : Permet de verrouiller une fonction de la télécommande et de la commande patient à partir de la commande infirmière située au pied du lit. Appuyez sur ce bouton pour verrouiller la fonction affichée à proximité. Un témoin rouge s'allumera au-dessus du symbole de verrouillage, indiquant que la fonction est verrouillée. Le bouton situé à côté verrouille toutes les fonctions de mouvement de l'équipement, y compris celles de la télécommande, les contrôles fixes sur les côtés du lit et de la commande au pied du lit, à l'exception de la fonction CPR. Pour activer la fonction de verrouillage, maintenez le bouton enfoncé pendant 8 secondes.
	Position chaise cardiaque : Permet de déplacer le lit en position de chaise. Cette fonction relève les sections du dossier et des cuisses, ajuste la hauteur de la section des pieds vers le haut et incline le lit afin que la section des pieds soit plus basse que la section de la tête. Appuyez sur ce bouton jusqu'à ce que toutes les fonctions atteignent leur position maximale. Relâchez la commande pour arrêter tout mouvement. Remarque : L'opération complète peut prendre jusqu'à 60 secondes.
	Fonction CPR électrique : Permet de positionner le lit de manière optimale pour effectuer la réanimation cardio-respiratoire. Relâchez la commande pour arrêter tout mouvement. La fonction CPR doit être utilisée uniquement en cas d'urgence. Utiliser cette fonction à d'autres fins pourrait entraîner des blessures graves pour le patient ou l'opérateur.
	Fonction lumière : Cette fonction allume la lumière située sous le lit. Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre la lumière.
	Fonction cloche d'appel : Cette fonction envoie un signal au poste des infirmiers(ères). Appuyez sur ce bouton pour envoyer le signal.
	Indice de branchement : Cette lumière indique que le lit est branché à une prise murale. Elle permet à la batterie de se recharger.
	Option – Fonction de la limitation de la hauteur (arrêt intermédiaire à 35,5 cm / 14 po) : Lors de l'abaissement du lit à l'aide de n'importe quelle commande, le lit s'arrêtera automatiquement à une hauteur intermédiaire de 14 po (mesurer du plancher jusqu'à la plateforme du matelas). Il s'agit d'une fonction de sécurité destinée à prévenir un abaissement involontaire au-delà de ce niveau. Pour continuer à abaisser le lit sous la limite de 35,5 cm / 14 po jusqu'à la hauteur minimale: • Utiliser la commande externe située sur le panneau de pied ou la commande extérieure de la barrière latérale. • À l'atteinte de l'arrêt à 35,5 cm / 14 po, le système émettra une série rapide de trois signaux sonores. • Relâcher puis appuyer de nouveau sur le bouton d'abaissement pour confirmer l'action. • Le lit émettra ensuite des signaux sonores intermittents pendant sa descente vers la hauteur minimale. ⚠ Important : Si le bouton d'abaissement est relâché pendant plus de 10 secondes, le processus de dérogation se réinitialise. Le système émettra alors à nouveau l'avertissement sonore (trois bips) avant d'autoriser une nouvelle descente sous les 35,5 cm / 14 pouces.



AVERTISSEMENTS CONCERNANT L'UTILISATION DES FONCTIONS ÉLECTRIQUES


- Si l'état physique de l'utilisateur l'exige pour sa sécurité, désactivez les fonctions du lit destinées à l'usage du patient. Positionnez le lit à sa hauteur minimale, assurez-vous que la plateforme est horizontale et relevez les barrières latérales pour augmenter la sécurité.
- Assurez-vous qu'aucune partie du corps du patient ne dépasse du matelas et qu'aucun obstacle ne se trouve sous la plateforme avant d'activer la fonction CPR. Des **BLESSURES GRAVES** peuvent survenir si cette fonction est utilisée incorrectement.
- La fonction CPR doit être utilisée **UNIQUEMENT EN CAS D'URGENCE**. Toute autre utilisation pourrait entraîner des **BLESSURES GRAVES** pour le patient ou l'opérateur.
- Positionnez toujours le lit à une hauteur basse lorsque le patient dort ou est laissé sans surveillance afin de réduire le **RISQUE DE CHUTE**, pouvant entraîner des **BLESSURES**.
- Ne laissez pas de table ou tout autre objet nécessitant un accès sous le lit lors de son abaissement, car cela pourrait causer de **SÉRIEUX DOMMAGES MÉCANIQUES**.
- Avant d'activer toute commande de mouvement, assurez-vous qu'aucun objet, équipement ou partie du corps (membre du patient ou du personnel, équipement médical, etc.) n'obstrue les parties mobiles du lit, car cela pourrait entraîner des **BLESSURES GRAVES ET/OU DES DOMMAGES À L'ÉQUIPEMENT**.

3.2. Déplacement de l'appareil

Pour déplacer l'appareil, il est recommandé de relever le lit d'au moins 150 mm (6 pouces) à partir de sa position la plus basse afin de faciliter l'accès à la pédale. Pour actionner le système, placez la pédale dans l'une des trois positions suivantes :

DIRECTIONNEL

Pour activer le mode directionnel et s'assurer que la roulette tête gauche roule en ligne droite, appuyez sur le côté vert de la pédale.

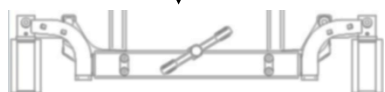

Appuyez sur le côté **vert** de la pédale.

NEUTRE

Pour activer le mode neutre, éliminez toutes les restrictions et permettez au lit de rouler librement dans toutes les directions en positionnant les pédales à l'horizontale.



Mettez les pédales à l'horizontale.


FREIN

Pour activer les freins et immobiliser le lit, appuyez sur le côté rouge de la pédale.




Appuyez sur le côté **rouge** de la pédale.

Lorsque le lit est lourdement chargé, il est recommandé que deux personnes le déplacent.

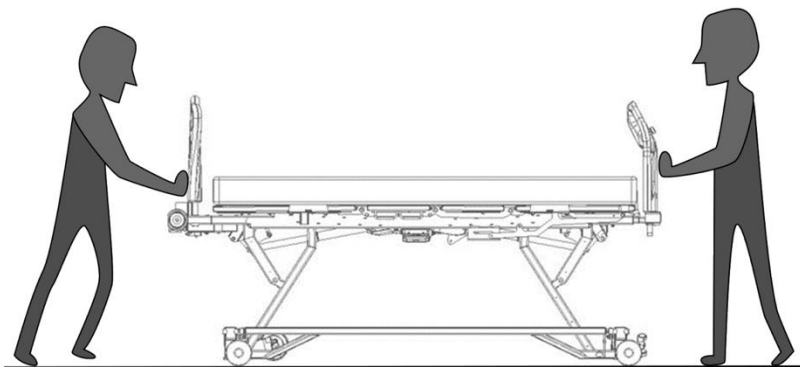

Cependant, si l'assistance motorisée VersaDrive est utilisée, il est préférable de déplacer le lit seul.

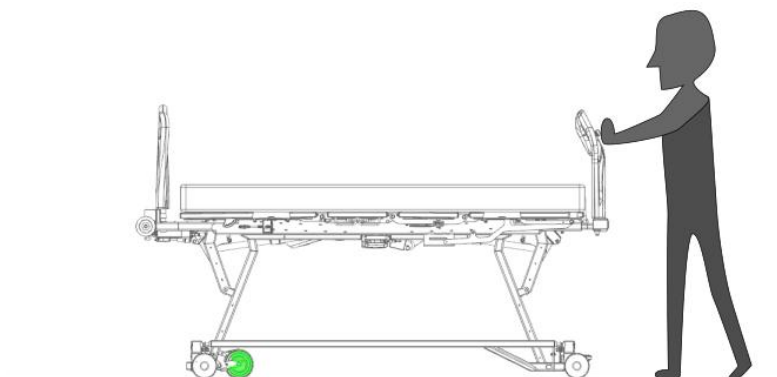




AVERTISSEMENTS CONCERNANT LE SYSTÈME DE FREIN SYNCHRONISÉ

- Appliquez toujours les freins après avoir déplacé le lit ou lorsqu'un patient est sur le lit. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner des **BLESSURES** lorsque le patient monte ou descend du lit.
- Vérifiez toujours que les freins sont bien verrouillés après leur activation en essayant de déplacer le lit.
- Dans tout déplacement, si vous devez laisser le lit sans surveillances, toujours remettre les freins. Laisser le lit avec les freins désengagé et sans surveillances pourrait causer des risques de blessures sérieuse pour le patient ou autres personnes à proximité du lit.

3.3. Barrières latérales

Abaissez la barrière en appuyant sur le levier et en la faisant pivoter vers le bas. Pour la relever, tirez-la vers le haut en effectuant un mouvement de rotation. Assurez-vous toujours que la barrière est bien verrouillée en position relevée pour garantir la stabilité.

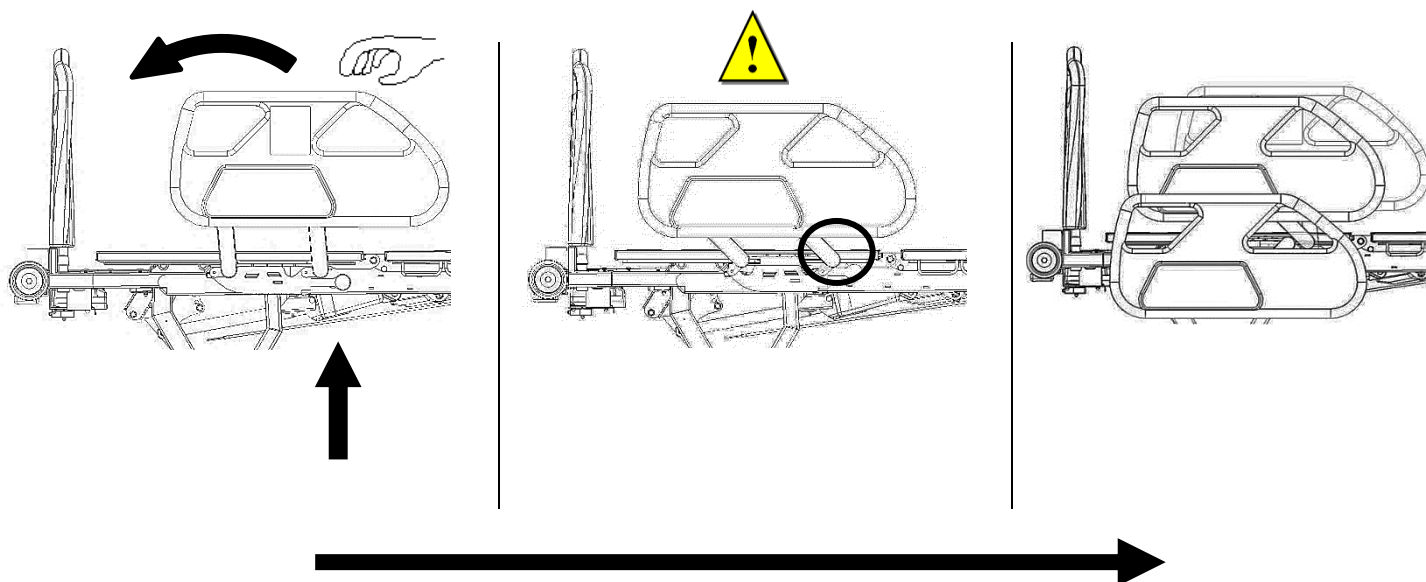


AVERTISSEMENTS CONCERNANT L'UTILISATION DES BARRIÈRES LATÉRALES

- Lorsque vous relevez les barrières latérales en position fermée, assurez-vous toujours qu'elles sont complètement verrouillées à leur position la plus haute en tentant de les bouger latéralement. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un **RISQUE DE CHUTE**.
- Les barrières latérales sont conçues uniquement pour prévenir les chutes accidentelles. Elles ne doivent pas être utilisées pour empêcher un patient de quitter le lit, l'aider à se tourner ou comme moyen de contention. Il est de la responsabilité de l'opérateur d'utiliser les dispositifs de contention appropriés pour assurer la sécurité du patient.
- Avant d'activer les barrières latérales, assurez-vous qu'aucun objet (comme une couverture ou partie du corps du patient) n'en entrave le mouvement.
- À moins d'un avis médical contraire, gardez toujours les barrières latérales relevées et verrouillées pendant que l'utilisateur dort ou est sans surveillance afin de prévenir tout **RISQUE DE CHUTE**. Il est également recommandé de maintenir le lit à sa hauteur minimale pour réduire le **RISQUE DE BLESSURE** en cas de chute.
- Assurez-vous que les pieds ne sont pas positionnés sous le lit lorsque la surface du patient est abaissée à sa position minimale. Lorsque les barrières latérales sont en position ouverte (déverrouillée), elles peuvent toucher le sol et se soulever légèrement.

3.4. Indicateurs d'angle


L'angle du dossier par rapport au sol est affiché sur l'indicateur situé sous le dossier. Une petite bille se déplace le long de l'échelle gravée pour indiquer la mesure en degrés.

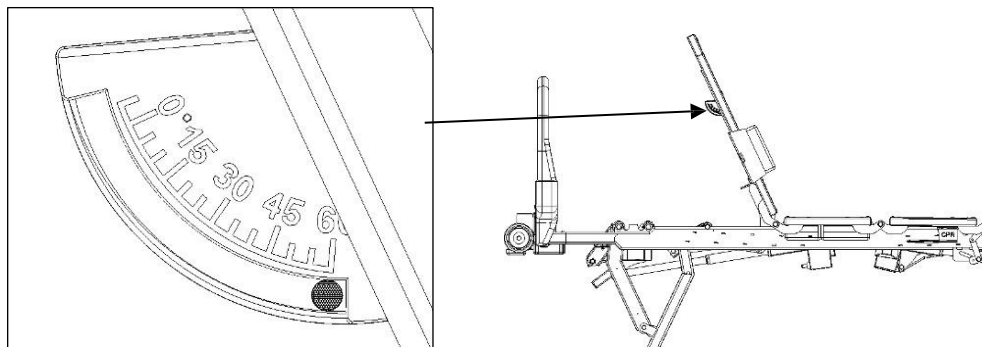


3.5. Extension du sommier en longueur

* Pour faciliter l'extension de la plateforme du lit bariatrique, il est recommandé de relever la section des pieds au maximum, puis de retirer le pied de lit.

- 1) Avec une main, tirez sur le câble situé sous la section des pieds.
- 2) Avec l'autre main, tirez sur l'extension de la structure au pied du lit, puis relâchez le câble.
L'extension se verrouillera automatiquement pour les dimensions de matelas suivantes : 84 pouces et 88 pouces.
- 3) Ensuite, à l'aide des deux mains, appuyez sur le bouton situé au centre de la section des pieds de la plateforme et tirez sur l'extension de la plateforme.

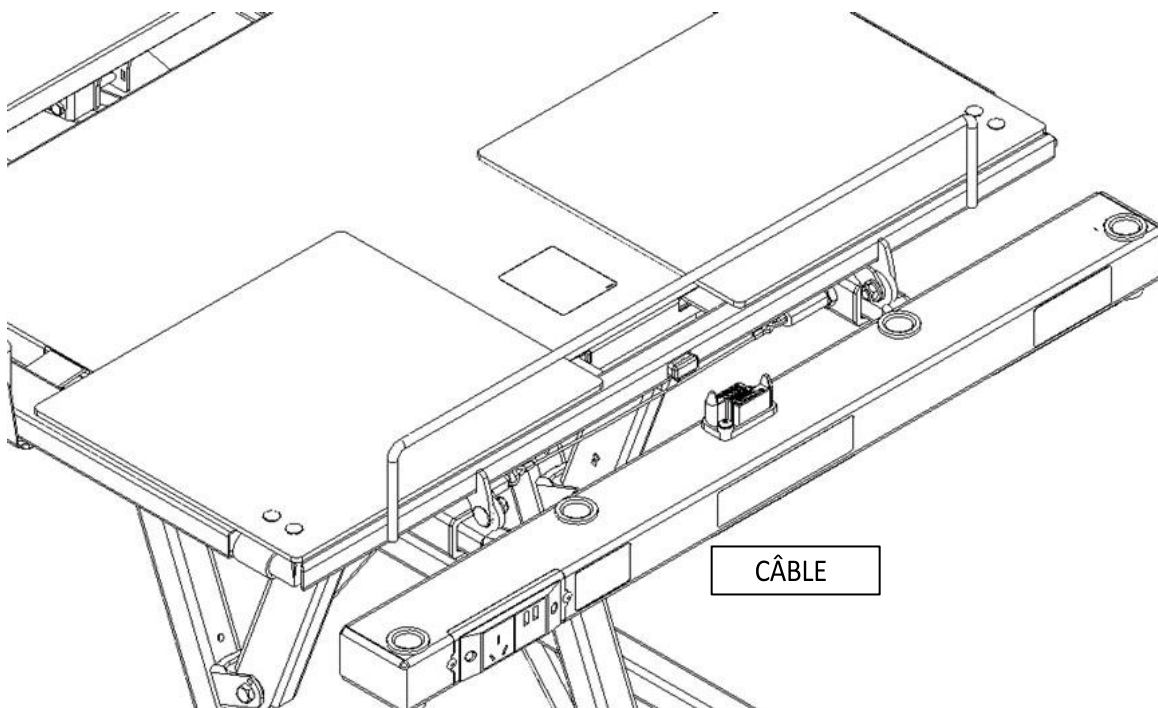


- 4) Vous pouvez relâcher le bouton ; l'extension se verrouillera automatiquement pour les dimensions de matelas suivantes : 84 pouces et 88 pouces.
- 5) Replacez le pied de lit et abaissez la section des pieds à sa position la plus basse.

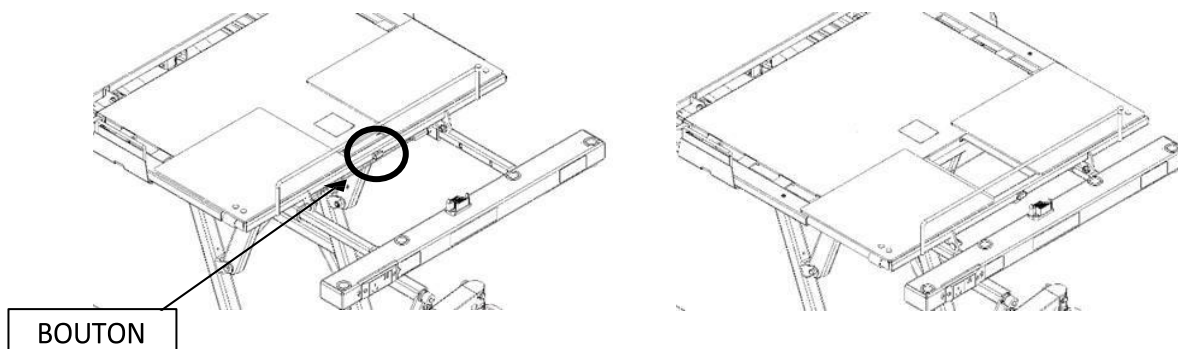

Notre nouveau modèle de lit bariatrique comprend des fonctionnalités légèrement différentes. Voici comment prolonger la longueur de la plateforme de manière sécuritaire et efficace :

- 1) Pour faciliter l'extension de la plateforme bariatrique, il est recommandé de relever la section des pieds au maximum, puis de retirer le pied de lit.
- 2) Appuyez ensuite sur le loquet situé sous l'extension du cadre au pied du lit.
- 3) Tirez sur l'extension du cadre au pied du lit, puis relâchez le loquet.
- 4) L'extension se verrouillera automatiquement aux dimensions de matelas suivantes : 84 pouces et 88 pouces.
- 5) Ensuite, à l'aide des deux mains, appuyez sur le bouton situé au centre de la section des pieds de la plateforme et tirez sur l'extension de la plateforme.
- 6) Vous pouvez relâcher le bouton ; l'extension se verrouillera automatiquement aux mêmes dimensions : 84 pouces et 88 pouces.
- 7) Replacez le pied de lit et abaissez la section des pieds à sa position la plus basse.

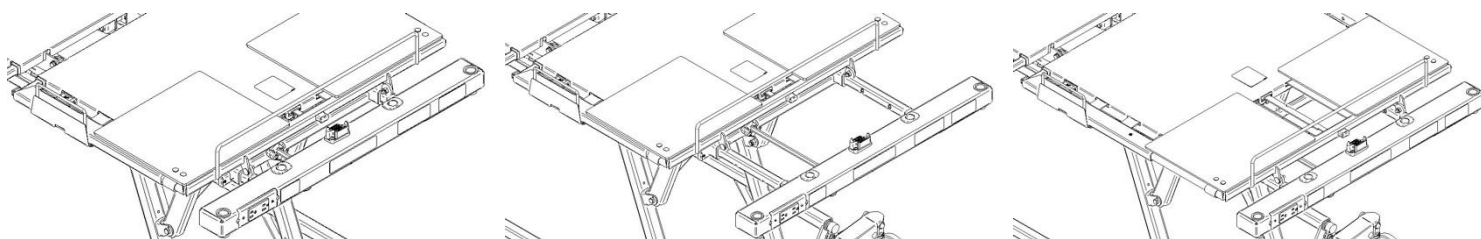


AVERTISSEMENT CONCERNANT L'EXTENSION DE LA LONGUEUR DE LA PLATEFORME


- Ne jamais allonger la section des pieds de la plateforme sans allonger également la section des pieds de la structure, car cela peut entraîner des **DOMMAGES MÉCANIQUES ET/OU DES BLESSURES**.
- Après avoir allongé la plateforme, assurez-vous toujours que sa longueur correspond à la taille du matelas utilisé afin de prévenir les **RISQUES DE PIÉGEAGE, CE QUI POURRAIT ENTRAÎNER LA MORT**.

3.6. Extension du sommier en largeur

- 1) Appuyez sur le bouton situé à l'angle d'une section.
- 2) Tirez ensuite sur la section d'extension.

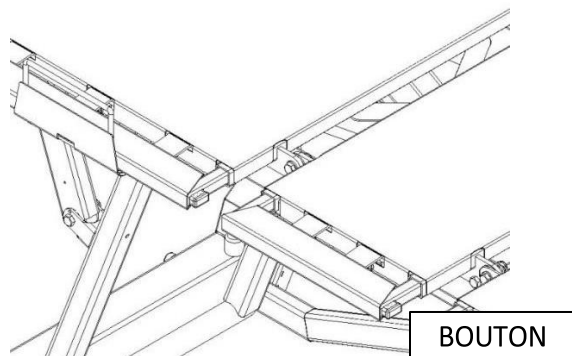

- 3) Relâchez le bouton ; l'extension se verrouillera automatiquement aux dimensions de matelas suivantes : 36 pouces, 39 pouces, 42 pouces et 48 pouces.

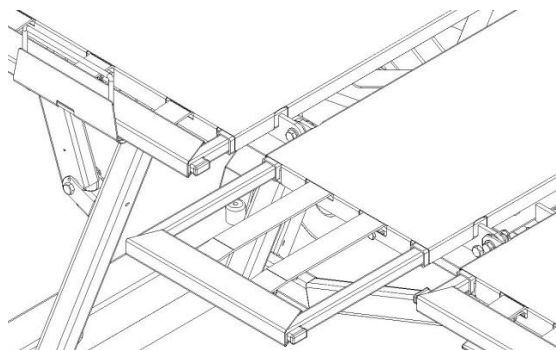

- 4) Assurez-vous que la section d'extension est bien verrouillée en essayant de la tirer ou de la pousser.
- 5) Répétez ces étapes pour toutes les sections d'extension autour du lit. Un total de 8 sections doit être déployé pour ajuster correctement la largeur.





AVERTISSEMENT CONCERNANT L'EXTENSION DE LA LARGEUR DE LA PLATEFORME

- Après avoir élargi la plateforme, assurez-vous toujours que sa largeur correspond à la taille du matelas utilisé afin de prévenir les **RISQUES DE PIÉGEAGE, CE QUI POURRAIT ENTRAÎNER LA MORT.**


3.7. Tête et pied de lit

Pour installer correctement la tête ou le pied de lit, insérez les deux tiges de la tête ou du pied de lit dans les deux ouvertures prévues à cet effet jusqu'à ce qu'ils atteignent le fond. Pour retirer les panneaux, suivez la procédure inverse.

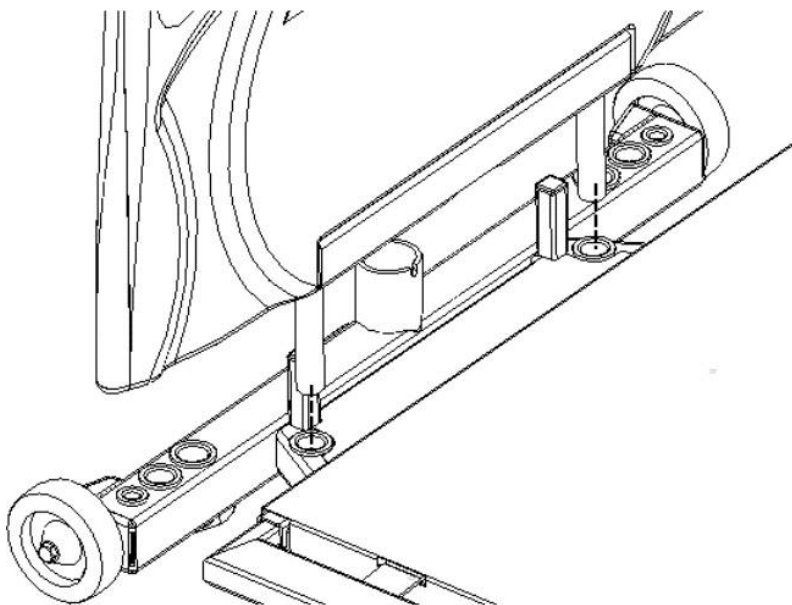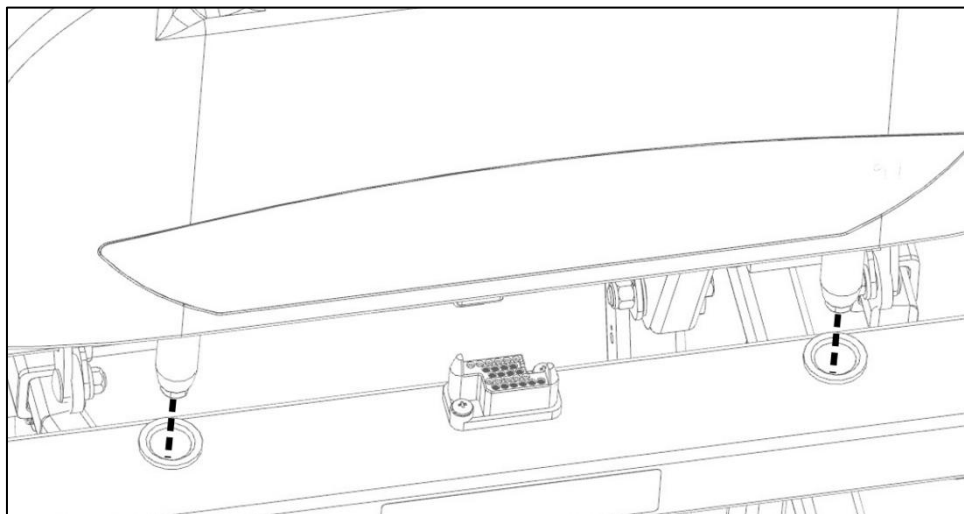

3.8. Réglage de l'angle de la section des pieds


Avant d'ajuster l'angle de la section des pieds sur le lit bariatrique, la section des pieds doit d'abord être relevée (étape 1). Sinon, l'ajustement de l'angle ne pourra pas être effectué. Pour ajuster l'angle de la section des pieds, soulevez l'extrémité de la section jusqu'à sentir le mécanisme se déverrouiller. Une fois déverrouillée, abaissez la section des pieds jusqu'à sa position la plus basse (étape 2).

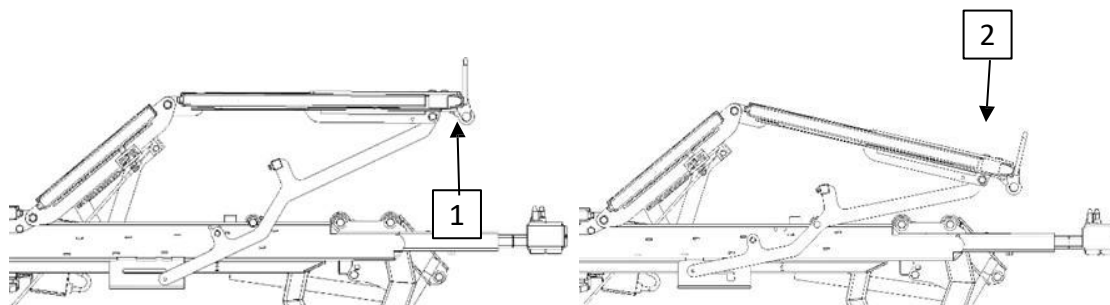

Pour ramener la section des pieds en position plate et horizontale, abaissez complètement la section des cuisses à l'aide des commandes motorisées. Cela ramènera automatiquement la section des pieds en position horizontale et verrouillée.

3.9. Réceptacle pour support intraveineux (IV)

Le lit est équipé de six (6) réceptacles pour support intraveineux (IV) situés à la tête de la structure. Ces réceptacles sont offerts en trois tailles différentes : 1/2 pouce, 7/8 pouce et 1 pouce de diamètre.

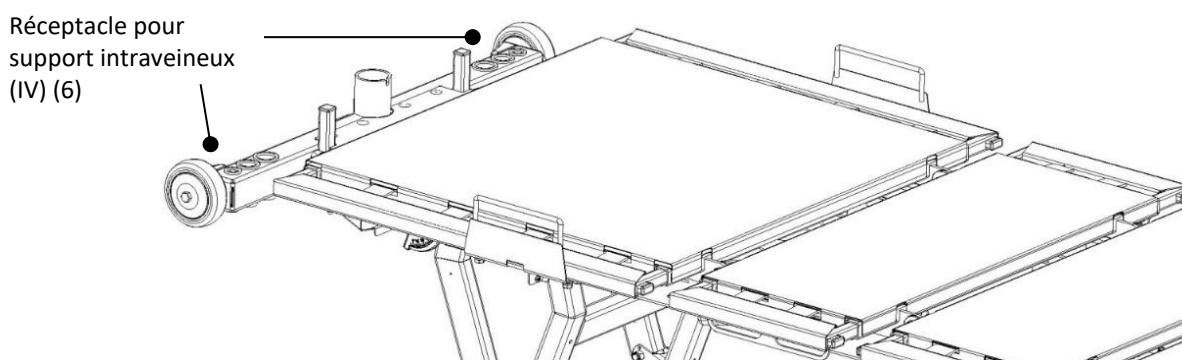


AVERTISSEMENT CONCERNANT LE RÉCEPTACLE POUR SUPPORT INTRAVEINEUX (IV)

- Ne jamais utiliser la fonction Trendelenburg lorsqu'un support intraveineux (IV) est installé sur le lit. Cela pourrait endommager l'équipement et augmenter le **RISQUE DE BLESSURE** pour le patient.

3.10. Réceptacle pour sac de drainage

Le lit bariatrique comporte quatre (4) emplacements désignés pour l'installation d'un sac de drainage, soit deux (2) de chaque côté. Choisissez l'un de ces emplacements pour soutenir solidement le sac de drainage.

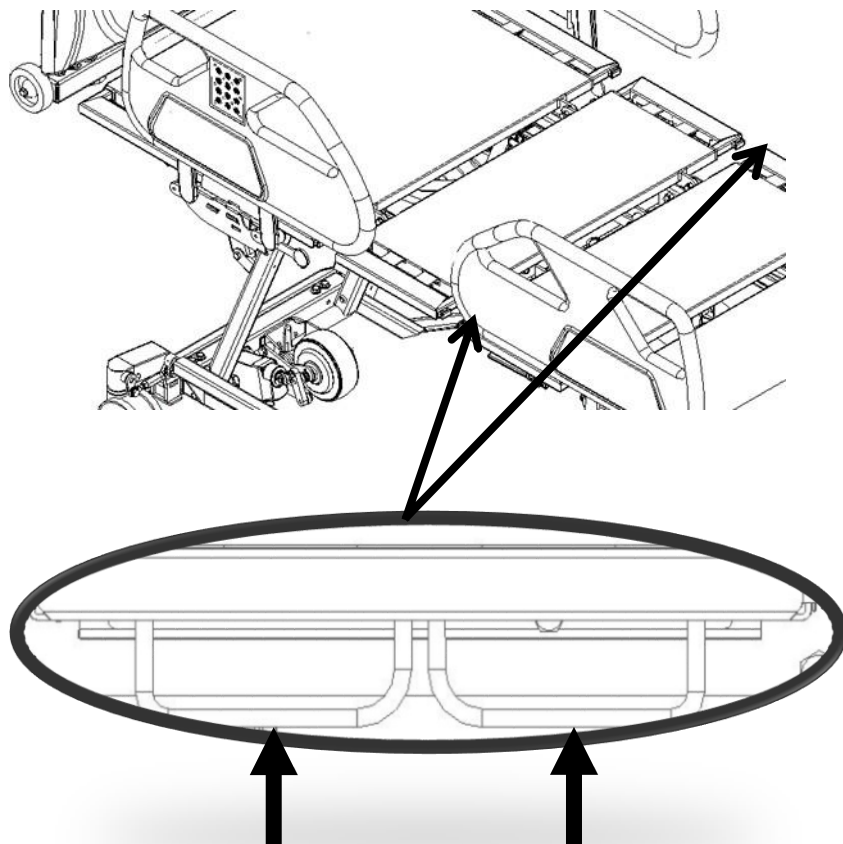


AVERTISSEMENT CONCERNANT LE RÉCEPTACLE POUR SAC DE DRAINAGE

- Ne pas abaisser l'appareil à sa hauteur minimale lorsqu'un sac de drainage y est attaché, car celui-ci pourrait se détacher et causer des **BLESSURES** au patient.
- **Attention** : Fixer un sac de drainage à un autre endroit de l'appareil pourrait entraîner des **BLESSURES** ou des **DOMMAGES MATÉRIELS**.

3.11. Ouvertures pour courroies de contention

Des ouvertures sont situées de chaque côté de la plateforme. Il est de la responsabilité du personnel médical d'utiliser correctement les dispositifs de contention et de sélectionner les ouvertures appropriées pour l'installation. Nous recommandons de fixer les courroies de contention uniquement à l'extrémité des rallonges, selon la morphologie et la taille du patient.

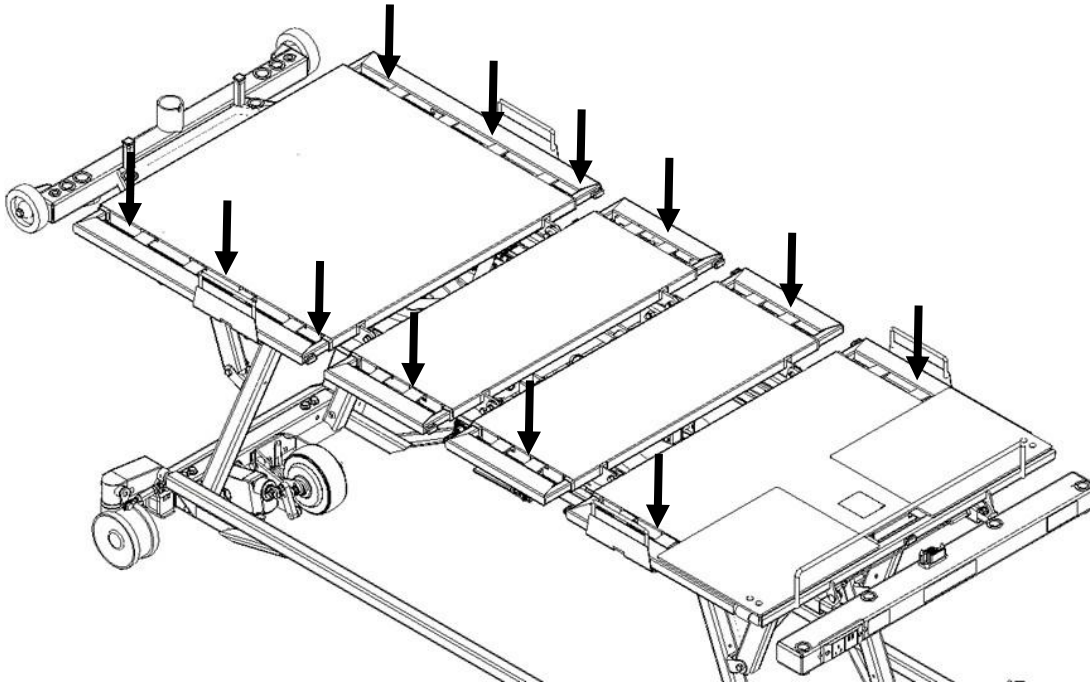


AVERTISSEMENTS CONCERNANT LES COURROIES DE CONTENTION

- Vérifiez toujours que les courroies de contention ne se resserrent pas autour du patient lors des mouvements de la plateforme. Un serrage excessif pourrait entraîner un **RISQUE DE BLESSURE**.

3.12. Installation de la barre de trapèze (option)

Pour installer la barre de trapèze, insérez simplement la barre dans son réceptacle prévu à cet effet. Assurez-vous d'aligner la butée de positionnement avec l'encoche. La barre de trapèze est conçue spécifiquement pour les trapèzes Rotec.

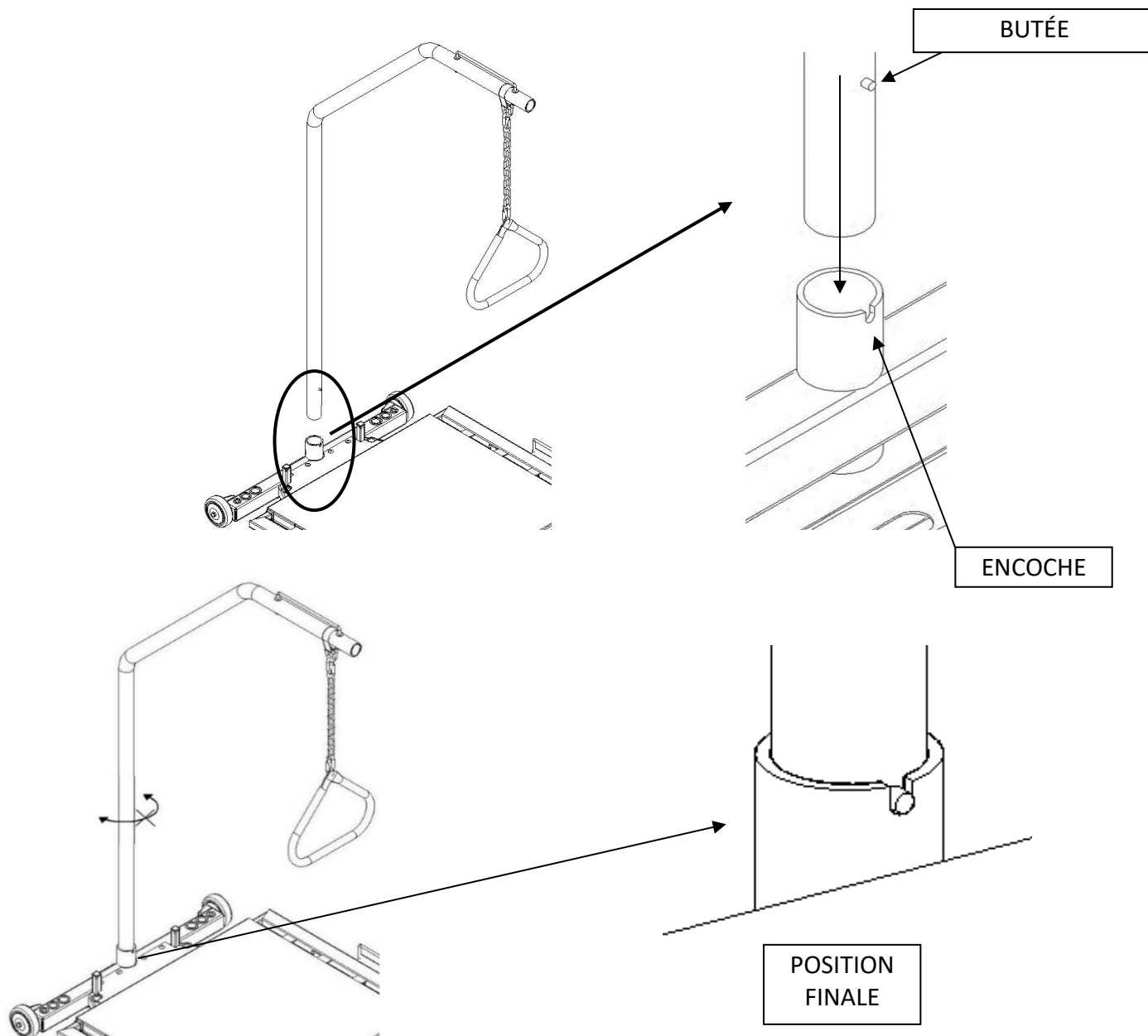

Une fois la barre en place, testez-la en tentant de la tourner ou de la déplacer afin de vous assurer qu'elle est solidement positionnée.




AVERTISSEMENT CONCERNANT LA BARRE DE TRAPÈZE

- Ne pas utiliser la fonction Trendelenburg lorsque la barre de trapèze est installée sur le lit. Cela pourrait endommager l'équipement et augmenter le **RISQUE DE BLESSURE** pour le patient.

3.13. Réceptacle pour cadre de traction

Pour installer un cadre de traction, utilisez les points de fixation de 7/8" de diamètre situés à la tête et au pied du cadre du lit. Notez qu'il s'agit des mêmes ouvertures que celles utilisées pour les supports intraveineux (IV).

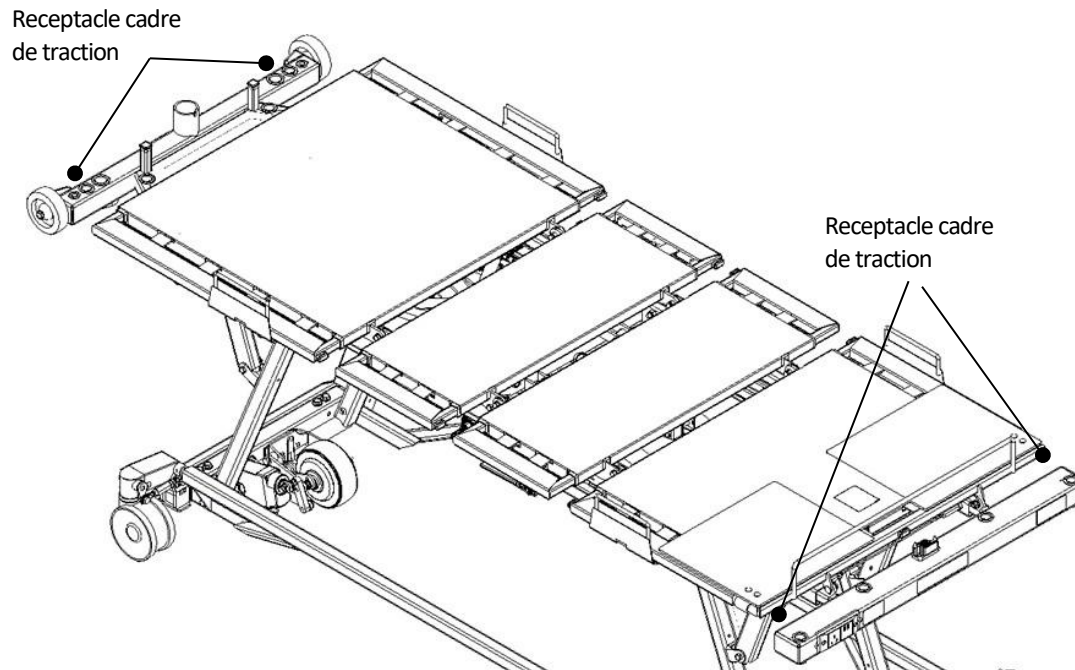


AVERTISSEMENT CONCERNANT LE RÉCEPTACLE POUR CADRE DE TRACTION

- Ne pas utiliser la fonction Trendelenburg lorsqu'un cadre de traction est attaché à l'appareil, afin d'éviter des **DOMMAGES MATÉRIELS** et un **RISQUE DE BLESSURES** pour le patient.

3.14. Fonction CPR mécanique

Pour activer la fonction CPR mécanique sur le lit bariatrique VersaTech, tirez sur la poignée située sous la plateforme de la section des cuisses afin d'abaisser uniquement la section du dossier. Notez que le poids du patient est nécessaire pour que le dossier s'abaisse correctement. La fonction CPR est spécialement calibrée pour les patients bariatriques, assurant une descente fluide de la plateforme du lit.

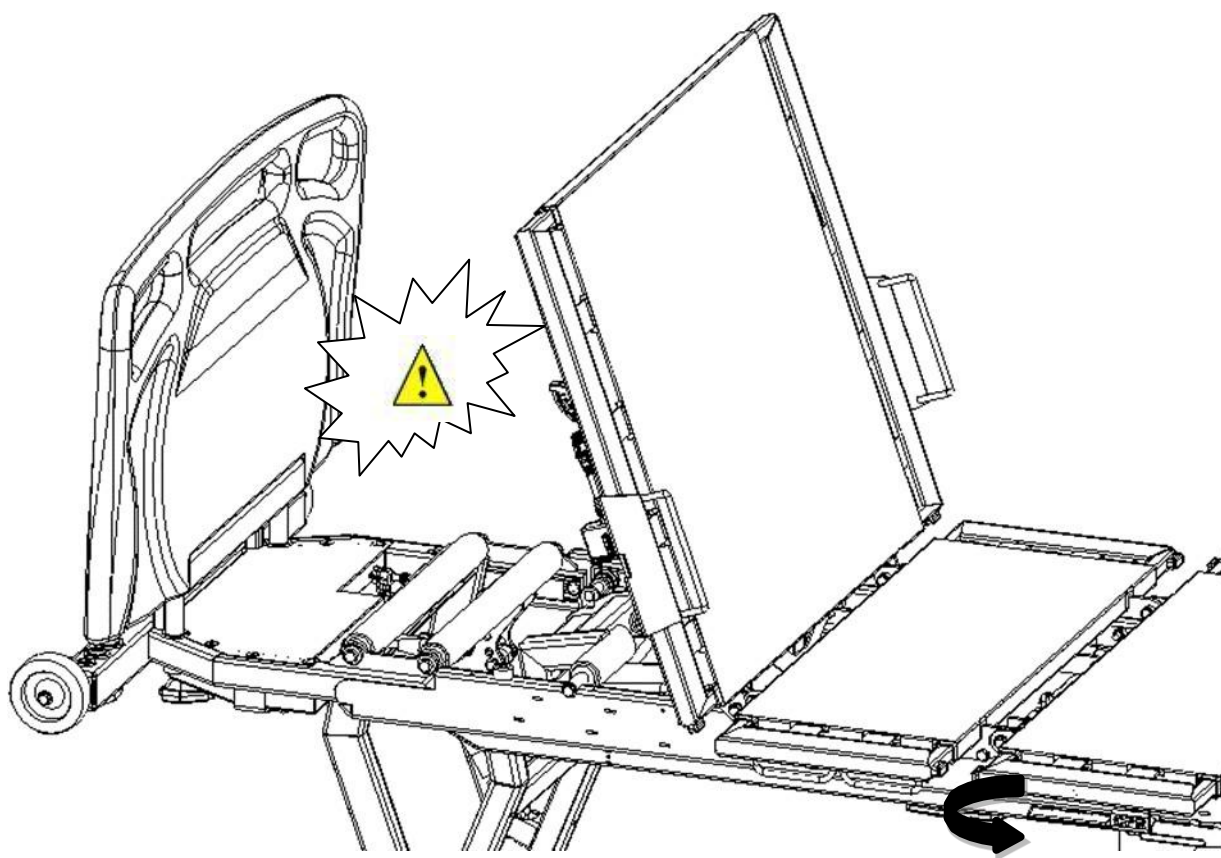

AVERTISSEMENT CONCERNANT LA FONCTION CPR MÉCANIQUE

- Assurez-vous qu'aucune partie du corps du patient ne dépasse du matelas et qu'aucun obstacle ne se trouve sous la plateforme du lit avant d'activer la fonction CPR. Des **BLESSURES GRAVES** peuvent survenir si cette fonction est utilisée incorrectement.
- La fonction CPR doit être utilisée **UNIQUEMENT EN CAS D'URGENCE**. Toute autre utilisation pourrait entraîner des **BLESSURES GRAVES** pour le patient ou l'opérateur.
- Les barrières latérales doivent être en position relevée avant d'activer la fonction CPR mécanique. Sinon, le mécanisme des barrières pourrait s'ouvrir brusquement et causer des **BLESSURES GRAVES**.

3.15. Appel infirmier et prise DB37

Appuyer sur le bouton d'appel infirmier envoie un signal au poste de garde.

Le lit doit être connecté au mur à l'aide d'un câble de communication DB37, dont la prise est située sous le cadre, à la tête du lit.

Selon la configuration du système de l'établissement, le réceptacle permet la transmission d'un signal normalement fermé (NC) ou normalement ouvert (NO).



Remarque : Si activé, ce réceptacle envoie également un signal en cas de sortie du lit.




AVERTISSEMENT CONCERNANT LA PRISE DB37

- Assurez-vous que le signal est fonctionnel. Une connexion non fonctionnelle pourrait entraîner des **RETARDS DE TRAITEMENT, CE QUI POURRAIT AGGRAVER L'ÉTAT DU PATIENT OU CAUSER DES BLESSURES.**

3.16. Balance intégrée

La balance intégrée permet de mesurer le poids du patient. Utilisez l'écran et les touches directionnelles situées sur le pied de lit pour accéder à ses fonctions.

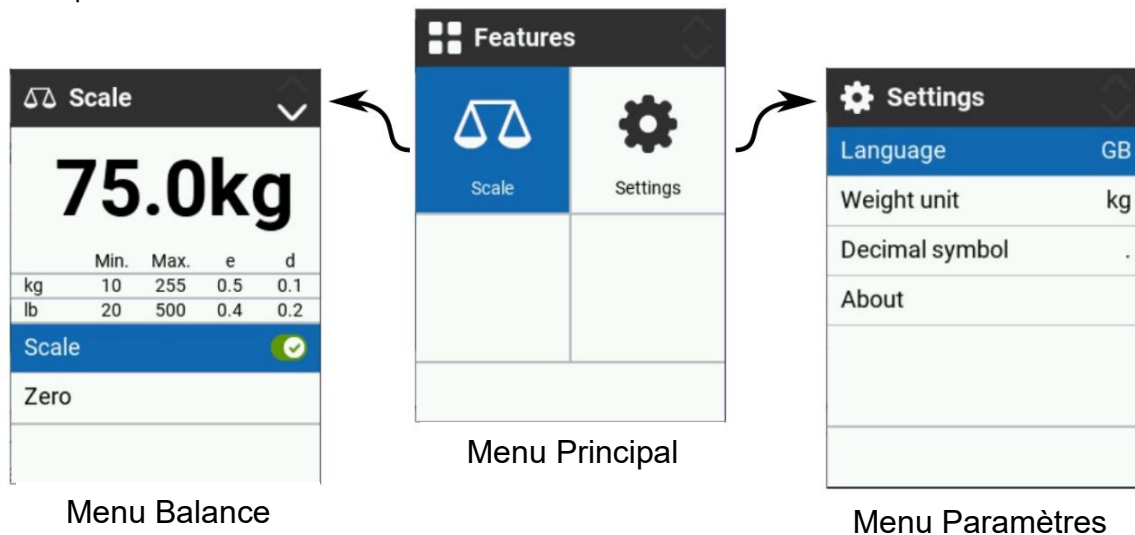

Naviguez dans les menus à l'aide des flèches directionnelles. La sélection en cours est indiquée par la couleur bleue.

Balance

La fonction balance est utilisée pour surveiller le poids du patient. Le menu de la balance est un menu spécifique présenté sous forme de liste, conçu pour afficher le poids du patient. La liste contient jusqu'à sept éléments, selon l'étalonnage.

Balance :	Active ou désactive la fonction. Lorsqu'elle est activée, le poids actuel s'affiche immédiatement dans l'application, d'abord en lettres bleues, ce qui indique que le poids sur le lit n'est pas encore stable. Quand le poids devient stable, les lettres passent au noir, indiquant que le poids est stabilisé. Remarques : Lorsque la balance est activée, cette icône est déplacée en bas du menu de la balance. Lorsque la fonction est désactivée, les éléments de la liste apparaissent en gris et ne peuvent pas être consultés.
Zéro :	Met la balance à zéro. Le lit ne peut être remis à zéro que si le poids est inférieur à 50 kg (cette valeur peut être modifiée lors de l'étalonnage du lit).
Auto-compensation :	Sert à ajouter ou retirer des éléments du lit, comme un nouvel oreiller ou un équipement, sans affecter le poids du patient.
Sauvegarde du poids :	Sauvegarde le poids du patient. Il y a 10 espaces mémoire pour enregistrer le poids.
Registre de poids :	Permet de consulter les derniers poids sauvegardés du patient. Il est seulement possible de consulter les 10 dernières entrées de poids enregistrées.
Réinitialisation du registre de poids :	Sert à réinitialiser le registre des poids enregistrés.

Abréviations

- Min : Poids minimum mesurable
- Max : Poids maximum mesurable
- e : Résolution du poids
- d : Résolution détaillée du poids (visible uniquement quand $e \neq d$)

Affichage de la balance sur secteur ou en mode batterie

L'affichage de la balance peut fonctionner lorsque le boîtier de commande est branché au secteur ou en mode batterie. ⚠ Attention : la fonction de balance est désactivée en mode batterie.

Dans la zone principale, les icônes de la balance suivantes peuvent être vues :

Description	Icône neutre	Icône sélectionnée
Par défaut		
Activée		
Erreur		
Désactivée		

Paramètres :

Langue :	Choisir la langue du système (anglais, allemand, français, espagnol, danois, portugais, polonais, chinois).
Luminosité :	Choisir le niveau de luminosité de l'affichage (Min., Moyen, Max.).
Unité de poids :	Choisir entre kilogrammes ou livres. L'élément de liste n'est visible que si l'étalonnage prend en charge les livres.
Symbole décimal :	Choisir entre une virgule ou un point.
Avancé :	Configurer le signal passerelle (Gateway signal), l'étalonnage de la balance, la section « À propos » et la vérification de la balance.

Dans la zone principale, les icônes de paramètres suivantes peuvent être vues :

	 Icône neutre	 Icône sélectionnée
Par défaut		

Menu de la liste dans « Avancé » :

Signal passerelle : (nécessaire uniquement si une passerelle est connectée)	Choisir comment le signal passerelle est envoyé : par impulsion (Pulse) ou en continu (Follow). En cas d'un événement utilisant la passerelle, comme lorsqu'une personne quitte le lit avec la fonction "hors du lit" activée.	
	Impulsion :	Envoie un signal via la passerelle et s'éteint. Un nouveau signal sera envoyé lorsque la personne retournera au lit.
	En continu :	Continue d'envoyer un signal tant que la personne est hors du lit.
Paramètres de la balance :	Cette section contient les paramètres incluant l'étalonnage depuis le panneau de commande.	
À propos :	Logiciel :	Cette section décrit le logiciel actuel et la version programmée dans le boîtier de commande.
	Logiciel QLCI2 :	Cette section décrit le logiciel actuel et la version programmée dans le QLCI2.
	Vérification de la balance :	Cet onglet contient des informations sur la précision spécifiée de la balance, la force gravitationnelle déterminée à l'endroit, ainsi que le nombre de procédures d'étalonnage effectuées.

Calibration via l'unité d'affichage de la balance :

Pour calibrer le QLCI2 via une unité d'affichage de la balance, il n'est pas nécessaire d'utiliser un logiciel de calibration supplémentaire ni un câble de calibration. La calibration s'effectue via la fonction « Calibration de la balance », située dans Paramètres – Avancé (Cette fonctionnalité peut être désactivée via l'outil de calibration).

Appuyez sur le bouton OK pour accéder à la fonction « Paramètres de la balance ». Veuillez noter que la fonction de calibration est protégée par mot de passe et que le mot de passe par défaut est « 0001 ». Utilisez les flèches haut et bas pour modifier chaque chiffre et les flèches gauche et droite pour passer d'un chiffre à l'autre. Appuyez sur le bouton OK pour entrer le mot de passe.

Si une calibration via l'unité d'affichage de la balance est requise, sachez que la calibration système est activée par défaut.

Liste du menu à l'intérieur de « Calibration de la balance » :

Gravité D, m/s ² :	La gravité de la destination en m/s ² . Pour saisir la nouvelle valeur et naviguer entre les chiffres, utilisez simplement les touches fléchées. Appuyez sur le bouton OK lorsque la nouvelle valeur est saisie.
Livres prises en charge :	Si cette option est sélectionnée, la plaque de marquage sur l'affichage inclura également les réglages équivalents et l'utilisateur pourra choisir entre livres et kilogrammes.
Définir un nouveau code :	Pour changer le code par défaut permettant d'accéder au menu de calibration. Pour saisir le nouveau code et naviguer entre les chiffres, utilisez simplement les touches fléchées. Appuyez sur le bouton OK lorsque le nouveau code est saisi.
Calibration de la balance :	Ouvre le menu de calibration (calibration à 1 point), comprenant deux éléments de liste ainsi que la vue de la plaque de marquage : Poids de calibration : Poids de la charge de calibration en kilogrammes. Pour saisir le nouveau poids et naviguer entre les chiffres, utilisez simplement les touches fléchées. Appuyez sur le bouton OK lorsque le nouveau poids est saisi. Démarrer la calibration : Lorsque tous les réglages sont effectués, appuyez sur le bouton OK lorsque l'élément « démarrer la calibration » est sélectionné.

Établir l'absence de charge :	Retirez tout poids sur l'application qui n'est pas destiné à être un poids de l'application et appuyez sur OK pour continuer. Il est recommandé d'effectuer la calibration sans, par exemple, le matelas et autres éléments que les utilisateurs finaux peuvent changer eux-mêmes.
Établir la charge de calibration :	Placez votre poids de calibration au centre de l'application et appuyez sur OK pour continuer.
Calibration terminée :	La calibration a été effectuée avec succès. Appuyez sur OK pour enregistrer les données de calibration.

REMARQUE : Un minimum de 300 kg est requis pour obtenir une valeur de calibration correcte.

Fenêtres contextuelles

Les fenêtres contextuelles apparaissent lorsque l'utilisateur doit effectuer une action.

Il existe quatre types de fenêtres contextuelles :

Instructions utilisateur :	Ce sont des messages à l'utilisateur, lui demandant d'attendre ou d'accepter certains changements. Les instructions utilisateur auront un fond noir avec du texte blanc.
Notifications :	Les fenêtres contextuelles de notification apparaissent lorsque vous entrez dans un menu avec une notification. Les notifications auront un fond jaune.
Erreurs :	La fenêtre contextuelle d'erreur s'affiche lorsqu'une erreur ou une erreur utilisateur se produit. Les erreurs auront un fond orange.
Batterie faible :	L'icône « batterie faible » (moins de 20 %) clignotera dans la zone gauche de l'infobande (Infoline).

Priorisation

Dans le cas où plusieurs fenêtres contextuelles apparaissent en même temps, la priorité des icônes est la suivante:

- **Priorité élevée** → Erreurs
- **Priorité moyenne** → Notification – Hors du lit
- **Priorité basse** → Notification – Batterie faible

Liste des icônes de fenêtres contextuelles

Les icônes ci-dessous s'affichent lorsqu'elles sont activées ou détectées :

	Erreur
	Batterie faible
	Batterie faible

Codes d'erreur :

Détail du type de message :

- E : Erreur – quelque chose bloque le fonctionnement normal.
- W : Avertissement – quelque chose entraîne une baisse de performance.
- U : Erreur utilisateur – l'application a détecté que le système est utilisé de manière incorrecte ; l'utilisateur habituel est en mesure de corriger le problème.


Description	Icône neutre	Icône sélectionnée
Erreur		

Général :

ID du message	Type de message	Courte description	Longue description	Guide de dépannage
E1AA01	E	OB inactif	E1AA01: OB inactif	Vérifiez connexions et câbles, puis redémarrez le système.
E1AB01	E	Erreur fatale	E1AB01: Erreur fatale	Vérifiez connexions et câbles, puis redémarrez le système.

Balance :

ID du message	Type de message	Courte description	Longue description	Guide de dépannage
E1AE01	E	Erreur de comm.	E1AE01: Erreur de communication	Allumer/éteindre la balance
E1AE04	E	LC1 déconnecté	E1AE04: Cellule de charge 1 déconnecté	Vérifiez connexion cellule de charge 1 et calibrez le système.
E1AE05	E	LC2 déconnecté	E1AE05: Cellule de charge 2 déconnecté	Vérifiez connexion cellule de charge 2 et calibrez le système.
E1AE06	E	LC3 déconnecté	E1AE06: Cellule de charge 3 déconnecté	Vérifiez connexion cellule de charge 3 et calibrez le système.
E1AE07	E	LC4 déconnecté	E1AE07: Cellule de charge 4 déconnecté	Vérifiez connexion cellule de charge 4 et calibrez le système.
E1AE08	E	Non calibré	E1AE08: Non calibré	Veuillez calibrer à nouveau le système.
E1AE09	E	Calibration incorrecte	E1AE09: Mauvaise calibration	Veuillez calibrer à nouveau le système.
E1AE10	E	Échec de la somme de contrôle	E1AE10: Échec de la somme de contrôle	Allumer/éteindre la balance
E1AE11	E	Erreur matérielle	E1AE11: Erreur matérielle	Vérifiez connexions et câbles, puis redémarrez le système.
U1AE01	U		U1AE01: Surcharge	Retirez le poids du lit Risque d'endommager le lit
U1AE02	U		U1AE02: Charge insuffisante	Veuillez ajouter du poids sur le lit ou vérifier si les cellules de charge sont déchargées en raison de facteurs externes.
U1AE03	U		U1AE03: Poids instable	Assurez-vous que le poids est stable. Ne pas changer le poids en cas de nouvel essai.
U1AE04	U		U1AE04: Poids supérieur au max.	Veuillez retirer le poids du lit et réessayer.
U1AE05	U		U1AE05: Poids supérieur au min.	Veuillez retirer le poids du lit et réessayer.
U1AE06	U		U1AE06: Zéro au-dessus du max.	Veuillez retirer le poids du lit et réessayer.
W1AE01	W	Balance manquante	W1AE01: Manquant	Vérifiez connexions et câbles, puis redémarrez le système.

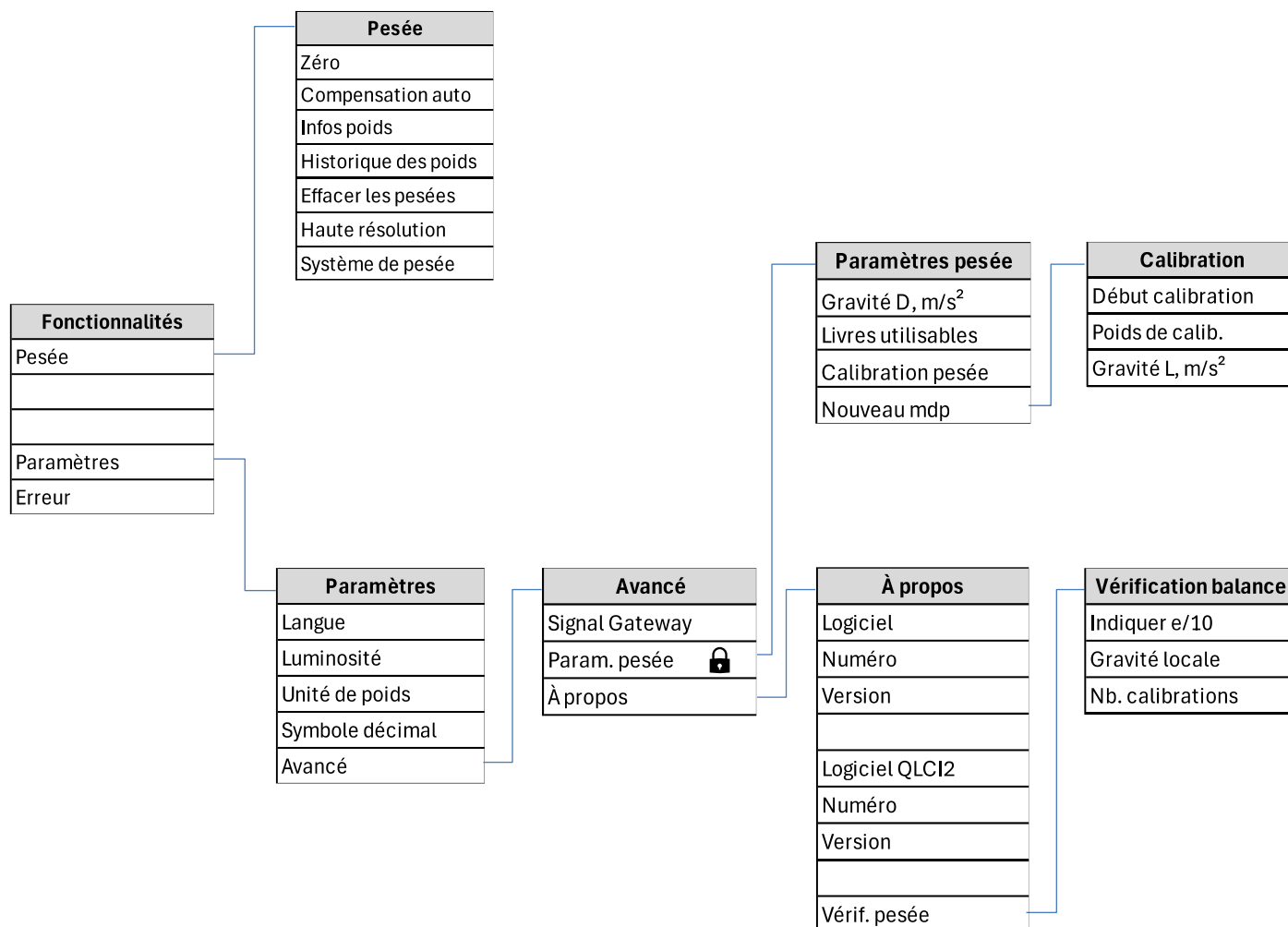Structure du menu :**AVERTISSEMENT CONCERNANT LE SYSTÈME DE PESÉE**

- Désactiver la balance désactivera également la fonction de détection de sortie du lit.
- Toute intervention non autorisée, réparation ou modification du système de pesée invalide la vérification initiale et nécessite une nouvelle vérification avant remise en service.

3.17. Système de détection de sortie du lit

Le système de détection de sortie du lit ne nécessite aucune calibration. Il vous avertit des variations de poids détectées par la balance. Pour l'activer, assurez-vous que le patient est au lit et stable, sélectionnez la zone désirée, puis maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que la lumière verte cesse de clignoter. Il suffit d'appuyer sur le bouton correspondant pendant que le patient est au lit pour activer la fonction.

Identification des boutons



Zone 1: Le bouton de la Zone 1 active le système de détection de sortie du lit. Il vous alerte si le poids mesuré du lit diminue de façon significative, ce qui peut indiquer que le patient a quitté le lit.



Zone 2: Le bouton de la Zone 2 active la détection de mouvement latéral. Ce système vous alerte si le patient tente de sortir du lit par le côté. Notez qu'il peut provoquer de fausses alertes si le patient est agité ou bouge pendant son sommeil. Pour minimiser les fausses alertes et améliorer la précision, assurez-vous que le patient est centré dans le lit lors de l'activation de la Zone 2. Cette fonction inclut également l'alerte de la Zone 1.



Zone 3: Le bouton de la Zone 3 active la détection de mouvement frontal. Ce système vous alerte si le patient tente de sortir du lit par le bas (du côté des pieds). Notez qu'il peut provoquer de fausses alertes si le patient est agité ou bouge pendant son sommeil. Pour minimiser les fausses alertes et améliorer la précision, assurez-vous que le patient est centré dans le lit lors de l'activation de la Zone 3. Ce réglage inclut également les alertes des Zones 1 et 2, ce qui en fait l'option la plus sensible.

Alertes:

Lorsque le patient bouge et déclenche l'alerte, le système émet trois (3) types d'avertissements :

1. **Indication visuelle :** Les voyants lumineux sous l'interface au pied du lit clignotent en rouge pour avertir le personnel.
2. **Avertisseur sonore :** L'avertisseur sonore retentit pour alerter les soignants. Vous pouvez l'activer ou le désactiver en appuyant simultanément et en maintenant enfoncés les boutons d'activation des Zones 1 et 2 sur le système de détection de sortie du lit.
 - 1 bip = Buzzer désactivé
 - 3 bips = Buzzer activé

*Le niveau sonore du buzzer peut également être ajusté en tournant son capuchon.
3. **Alerte au poste de garde :** Celle-ci est transmise via la prise DB37 connectée à l'établissement. Pour plus de détails, consultez la section Appel infirmier et prise DB37.

Veuillez noter qu'il peut y avoir un délai pouvant aller jusqu'à 5 secondes entre la détection du mouvement et le déclenchement de l'alarme. De plus, la désactivation de la balance désactivera également le système de détection de sortie du lit.

Note importante :

Le système de détection de sortie du lit ne peut pas être activé lorsque la balance est en mode de pesée. Pour activer l'alarme de sortie, assurez-vous de quitter l'écran de pesée au préalable.

Mise en garde

- Ce système peut ne pas convenir à tous les patients. Des dispositifs supplémentaires peuvent être requis.
- Cet appareil ne remplace pas la surveillance visuelle du personnel médical. Le fabricant ne garantit pas que cet équipement empêchera les chutes. Il est destiné à être utilisé comme outil complémentaire dans le cadre d'un programme global de gestion de la mobilité des résidents.
- L'équipement doit être testé avant chaque utilisation. Lisez attentivement toutes les instructions et les avertissements juridiques.
- Ce système n'est pas conçu pour remplacer les pratiques médicales appropriées, incluant notamment la supervision directe du patient ou la formation adéquate du personnel en prévention des chutes.
- Cet appareil émet des avertissements lorsque le patient quitte le lit, mais il ne prévient pas les chutes.
- L'alarme peut ne pas se déclencher si les instructions d'utilisation ne sont pas suivies.
- Si l'alarme ne fonctionne pas correctement, éteignez-la et remplacez-la par un système en bon état de fonctionnement.
- Assurez-vous que votre établissement dispose d'une politique claire et efficace de gestion des chutes et des alarmes de chute.
- Dans la mesure du possible, le fournisseur vise à limiter sa responsabilité pour tout dommage spécifique, accessoire ou toute perte économique indirecte liée à la réparation ou au remplacement du produit.
- Le fournisseur décline toute responsabilité pour les dommages, réclamations compensatoires ou autres pertes découlant de l'utilisation du produit.
- Ce produit est destiné exclusivement à un usage par du personnel médical certifié.

**AVERTISSEMENTS CONCERNANT LE SYSTÈME DE DÉTECTION DE SORTIE DU LIT**

- Cette fonction ne doit **JAMAIS** être utilisée comme seul moyen de prévention des chutes. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner un **RISQUE DE BLESSURES** pour le patient.
- Cette fonction ne doit **JAMAIS** être utilisée comme substitut à la surveillance visuelle. Se fier uniquement à cette fonction pourrait entraîner un **RISQUE DE BLESSURES** pour le patient.
- Cette fonction ne doit **JAMAIS** être utilisée comme seul moyen de surveillance des patients agités, agressifs, suicidaires ou à risque élevé de chute. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner un **RISQUE DE BLESSURES GRAVES** pour le patient.
- La désactivation de la balance désactivera également la fonction de détection de sortie du lit.

3.18. Roue motorisée VersaDrive (option)

Les lits VersaTech de Rotec peuvent être équipés en option du système d'assistance motorisée VersaDrive, qui facilite le déplacement du lit. L'interface de ce système est située sur le panneau au pied du lit.

Pour activer et désactiver le système



Pour activer :

1. Vous devez d'abord débrancher le lit, ranger le câble et placer la pédale de frein en position neutre avant d'activer l'assistance motorisée.
2. Appuyez sur le bouton de mise en marche pour activer le système jusqu'à entendre un bip et voir le témoin lumineux clignoter.
3. Relâchez le bouton, retirez vos mains du panneau et attendez que le système se calibre et que la roue motorisée s'abaisse au sol. Lorsque vous entendrez un signal sonore et que le témoin cessera de clignoter pour rester allumé en continu, le système VersaDrive sera activé.
4. La roue motorisée assistera votre mouvement en fonction de la pression exercée sur le pied du lit.

Pour désactiver :

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de démarrage jusqu'à entendre un bip et voir le témoin lumineux clignoter.
2. Une fois désactivée, la roue se rétractera et le témoin lumineux s'éteindra.

Notes

- Appliquez toujours le frein après avoir utilisé le système d'assistance motorisée ou lorsque vous laissez le lit sans surveillance.
- Pour des raisons de sécurité, la roue assiste le déplacement jusqu'à une vitesse de 4,32 km/h (2,7 mi/h) vers l'avant et de 2,64 km/h (1,65 mi/h) vers l'arrière, avec une autonomie de 8 km (5 miles).

Niveau de charge de la batterie




La roue motorisée est alimentée par une batterie indépendante. Des voyants lumineux indiquent approximativement le pourcentage de charge restant de la batterie.

La batterie du VersaDrive se recharge automatiquement lorsque le lit est branché via le câble d'alimentation principal. Lorsque le lit est branché, la roue motorisée est désactivée.

Bouton d'arrêt d'urgence

En cas d'urgence, appuyez sur le bouton d'arrêt d'urgence pour couper l'alimentation du système d'assistance motorisée. Tournez le bouton pour le réactiver, puis appuyez sur le bouton de mise en marche.

Attention : L'utilisation du bouton d'arrêt d'urgence désactive le frein électrique. L'opérateur devra alors ralentir la charge manuellement sans assistance. N'utilisez ce bouton qu'en cas de défaillance électrique entraînant une perte de contrôle. Ne l'utilisez pas pour le freinage normal ni pour arrêter le système de façon standard.

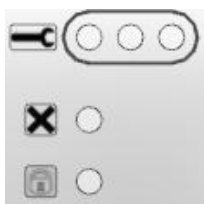Indicateurs de dépannage

Si le témoin lumineux du bouton de démarrage est allumé dans une autre couleur que le vert, ou si d'autres voyants sont allumés, cela peut indiquer que le système est dans un état d'erreur non fonctionnel.

Pour résoudre le problème, redémarrez le système VersaDrive. Si le problème persiste, contactez le service à la clientèle pour obtenir de l'assistance.

⚠ AVERTISSEMENT CONCERNANT LA ROUE MOTORISÉE

- Désactivez toujours le système de roue motorisée après un déplacement et réengagez le frein afin de prévenir tout mouvement involontaire pouvant entraîner des blessures.
- Éteignez complètement la roue motorisée avant que le patient monte ou descende du lit pour réduire le risque de chute.
- Le système VersaDrive doit être utilisé uniquement par du personnel qualifié.
- L'opérateur ne doit pas être distrait ni sous l'influence de substances pouvant nuire à sa capacité d'utiliser le système de manière sécuritaire.
- N'utilisez pas le VersaDrive sur des pentes supérieures à 6 degrés.
- Assurez-vous qu'aucune pression n'est exercée sur le panneau au pied du lit, ni par le matelas ni par le patient, pendant l'utilisation du VersaDrive

Guide de dépannage VersaDrive

Si le système VersaDrive ne fonctionne pas comme prévu, suivez les étapes ci-dessous jusqu'à ce que le problème soit résolu :

1. Éteindre le système, puis le rallumer.
2. Ne pas toucher au panneau de pied pendant les premières secondes de calibration.
3. S'assurer qu'aucun voyant ne clignote et que les indicateurs de dépannage sont éteints.
4. Si le problème persiste, se référer au tableau de dépannage :
 - a. Inspecter les composants indiqués.
 - b. Vérifier que tous les câbles sont bien connectés.
 - c. Si possible, essayer de remplacer la pièce concernée.
5. Si le problème demeure, communiquer avec le service à la clientèle.

Problème	Cause possible
Tous les voyants clignotent.	Le bouton d'urgence est activé. Tournez-le pour le réinitialiser.
Voyant de batterie orange clignotant.	Faible charge de la batterie. Brancher le lit à une source d'alimentation.
Voyant de batterie vert clignotant.	Débrancher le câble d'alimentation principal avant de déplacer le lit.
Le système ne démarre pas ou s'éteint immédiatement.	Problème avec la batterie ou le chargeur.
La roue reste inactive alors que le système est en marche.	Problème avec la roue ou le boîtier de commande.
Le lit ne freine pas automatiquement.	Problème avec le capteur du panneau de pied.
Le lit se déplace par petites distances de lui-même.	Problème lié à l'angle du sol ou au capteur du panneau de pied.
L'indicateur X ou Verrou est allumé.	Problème avec le programme du boîtier de commande.
 ● ● ●	Problème avec le boîtier de commande.
 ● ● ●	 ● ● ● ● ● Problème lors de la calibration initiale.  ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● Problème avec le signal stable. Possiblement cause par un objet en contact avec le panneau de pied, exerçant une pression constante sur le capteur. Cela peut parfois se produire à très basse vitesse avec une pression constante sur la poignée. Sinon, il s'agit d'un problème avec le capteur du panneau de pied.
 ● ● ●	Problème avec la connexion du panneau de pied ou les boutons.
 ● ● ●	Problème avec la roue motorisée.

Prise auxiliaire (option)

Si le lit est équipé d'une prise d'alimentation auxiliaire, celle-ci est située sous le pied de lit.

La tension de la prise auxiliaire correspond à celle de l'alimentation principale, et sa capacité peut être de 2,5 ampères ou 5 ampères, selon le modèle.

Cette prise est reliée à l'alimentation principale du lit par l'intermédiaire d'un transformateur d'isolement.


Le débranchement de l'alimentation murale du lit désactive automatiquement la sortie de la prise auxiliaire.

Note : La prise auxiliaire est conçue pour une puissance maximale de **600 watts**

Dépasser la puissance indiquée sur le marquage de la prise peut entraîner une interruption du circuit.

Si la prise ne fonctionne pas, appuyez sur le bouton de réinitialisation du disjoncteur, situé près de l'entrée du câble d'alimentation à la tête du lit, pour rétablir le circuit.

Finalement, ne jamais utiliser la prise auxiliaire pour un équipement essentiel au maintien des fonctions vitales.

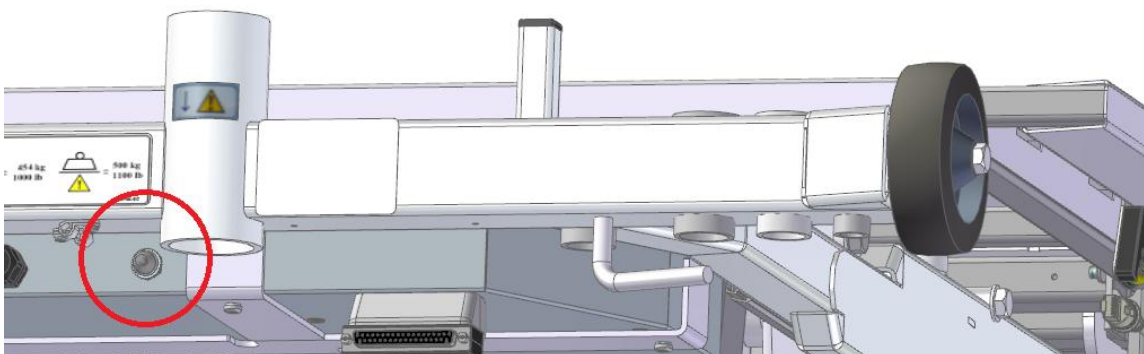

AVERTISSEMENT CONCERNANT LA PRISE D'ALIMENTATION AUXILIAIRE

- Ne branchez à la prise auxiliaire que des dispositifs médicaux certifiés consommant 5 A (120 V CA) ou 2,5 A (220/230/240 V CA) ou moins.
- Le branchement d'un appareil électrique à la prise auxiliaire crée un système électromécanique, ce qui peut réduire le niveau global de sécurité.
- Ne branchez pas de rallonge ou de multiprise à la prise auxiliaire du lit.
- **N'utilisez jamais la prise auxiliaire pour un équipement essentiel au maintien des fonctions vitales.**

4. ENTRETIEN

4.1. Nettoyage

Voici les précautions à prendre en compte lors du nettoyage de l'appareil :

- Ne pas laver le lit avec un jet d'eau à haute pression. Le nettoyage par ultrasons et l'immersion des composants du lit ne sont pas recommandés.
- Toujours débrancher le lit de l'alimentation électrique avant le nettoyage.
- Utilisez des solutions nettoyantes de qualité hospitalière telles que Presept, Zochlor, Fectolime, F-12167 Zep, Zep Spirit II, ACCEL Prevention RTU (Virox), Clorox Healthcare Wipes, 3M HWS-100 ou des savons ménagers couramment utilisés. Nettoyez le lit manuellement ; les produits nettoyants peuvent être appliqués par vaporisation. Assurez-vous d'utiliser la solution nettoyante à la concentration recommandée par le fabricant.
- Une solution chlorée jusqu'à 10 000 ppm peut être utilisée. Rincez à l'eau claire après le temps d'exposition recommandé pour éliminer tout résidu de chlore.
- Le nettoyage à la vapeur est autorisé, mais n'utilisez pas de jet à haute pression.
- Assurez-vous que toutes les parties nettoyées soient complètement sèches avant d'utiliser le lit.
- Si le lit est équipé d'une roue motorisée VersaDrive, retirez toute accumulation de poussière ou de fibres autour de l'axe de la roue.



AVERTISSEMENT CONCERNANT L'ENTRETIEN

- Le non-respect de ces consignes de sécurité liées au nettoyage peut compromettre l'intégrité du lit et le rendre inutilisable.

4.2. Entretien préventif

Pour garantir que l'appareil reste en bon état de fonctionnement, effectuez les vérifications suivantes une fois par an :

- Inspecter l'état général de l'équipement afin de s'assurer qu'il fonctionne toujours correctement.
- Brancher le câble d'alimentation de l'appareil et le laisser branché pendant au moins 48 heures consécutives.
- S'assurer que tous les écrous et boulons sont bien serrés.
- Inspecter l'usure des bagues d'épaulement, qui réduisent la friction sur les pièces mobiles. Ne pas lubrifier — remplacer si nécessaire.
- S'assurer qu'aucun objet ou équipement n'obstrue le mouvement des parties mobiles du lit (ex. : roues, structure).
- Vérifier l'état du fil de la télécommande, du cordon d'alimentation et des câbles du lit. Remplacer toute pièce endommagée.
- Tester toutes les fonctions de l'appareil pour s'assurer qu'elles fonctionnent correctement, en suivant les instructions du présent manuel (voir Section 3).
- Débrancher le câble d'alimentation et actionner les moteurs pour vérifier le bon fonctionnement de la batterie.
- Si l'option VersaDrive est installée, tester la roue motorisée pour évaluer son fonctionnement et la durée de vie de sa batterie.
- Pour une performance optimale, remplacer les batteries du lit tous les 3 ans.
- Vérifier la précision du système de balance en appliquant un poids calibré. Si le système n'est pas conforme, contacter le service Rotec pour assistance.

AVERTISSEMENT CONCERNANT L'ENTRETIEN PRÉVENTIF

- L'entretien préventif est essentiel pour assurer la fiabilité du lit. Un lit présentant toute anomalie ne doit pas être utilisé. Tout problème doit être réparé immédiatement par un technicien autorisé et qualifié. Le non-respect des consignes de sécurité liées au nettoyage peut compromettre l'intégrité du lit et entraîner des **BLESSURES GRAVES**.
- L'utilisation de pièces de rechange non certifiées par Rotec peut entraîner des **BLESSURES GRAVES ET/OU DES DÉFAILLANCES MÉCANIQUES MAJEURES** et peut limiter ou annuler la garantie du produit.
- Si une pièce permettant l'accès aux composants électroniques est brisée, l'appareil doit être immédiatement mis hors service jusqu'à ce que la pièce endommagée soit réparée ou remplacée. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner des **BLESSURES GRAVES PAR ÉLECTROCUTION**.

4.3. Disposition de l'appareil en fin de vie

Pour assurer l'élimination sécuritaire de l'appareil à la fin de son cycle de vie, suivez les étapes suivantes :

- **Retirez** les batteries et apportez-les à un centre de recyclage spécialisé pour les piles.
- **Détachez et recyclez** les câbles d'alimentation, connecteurs, moteurs, circuits, contrôleur et système de commande électronique dans un centre de recyclage approprié.
- **Retirez et recyclez** les roues, les couvercles en plastique, les panneaux, les barrières latérales et les articulations en plastique des mécanismes du lit dans un centre de recyclage désigné.
- **Recyclez** tous les composants métalliques restants conformément aux procédures de recyclage en vigueur.


4.4. Guide de dépannage

En cas de problème avec le lit ou l'un de ses composants, référez-vous au guide ci-dessous.
Si les problèmes suivants — ou d'autres — persistent, n'hésitez pas à contacter l'un de nos techniciens.


PROBLÈMES	VÉRIFICATIONS
Aucune des fonctions de la télécommande ni de la commande infirmière ne fonctionne.	- Le cordon d'alimentation est-il correctement branché ? - Le cordon d'alimentation est-il endommagé ? Si c'est le cas, remplacez-le. - Vérifiez toutes les connexions.
Aucune des fonctions de la télécommande ne fonctionne.	- Le verrouillage des commandes est-il activé ? - Le fil de la télécommande est-il correctement branché ? - Le fil de la télécommande est-il endommagé ? Si c'est le cas, remplacez-le.
Une ou plusieurs fonctions de la télécommande ne fonctionne pas.	- Vérifiez les éléments mentionnés ci-dessus. - Le verrouillage des commandes est-il activé pour ces fonctions ? - Sinon, les fonctions de la commande infirmière fonctionnent-elles ? Si oui, faites inspecter la télécommande.
Le lit fonctionne très lentement.	- Le cordon d'alimentation est-il correctement branché ? - Le cordon d'alimentation est-il endommagé ? Si c'est le cas, remplacez-le.
L'appareil émet un ou plusieurs bips sonores.	- Référez-vous à la prochaine section concernant l'explication des signaux sonores.

Explication des signaux sonores


Position perdue :

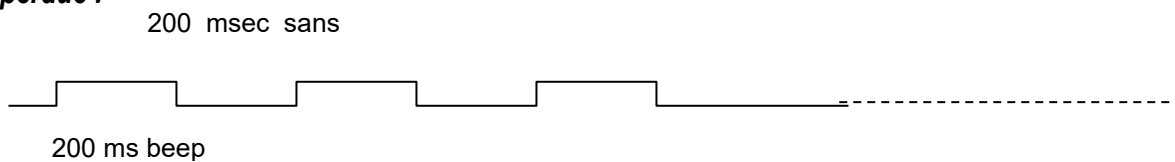


Alarme OBD :

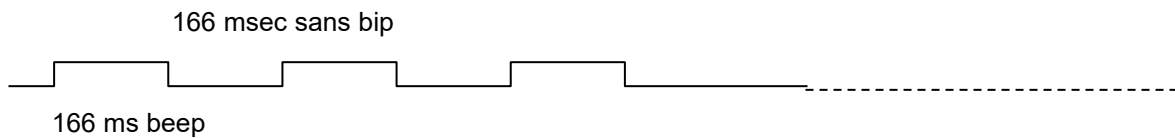


Erreur fatale :

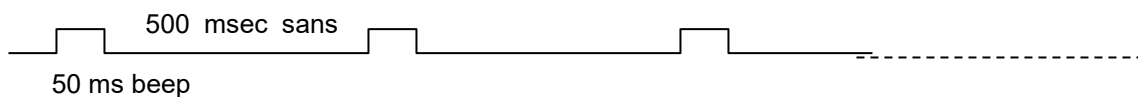


Réinitialisation de l'erreur fatale :

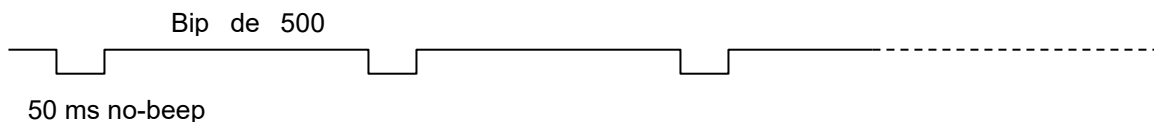

Signal sonore bref :

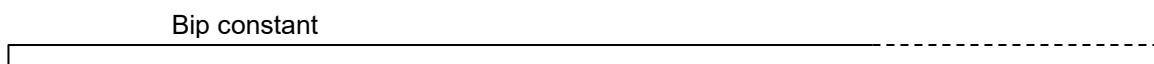

Surchauffe :

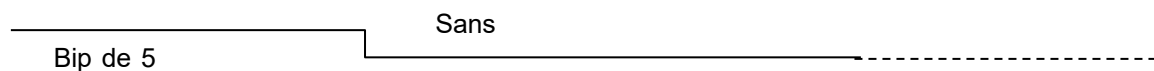

Dépannage en cas d'erreur fatale

Lorsque le boîtier de commande entre en mode d'erreur fatale, un bip d'erreur fatale retentit chaque fois qu'un bouton est pressé, alertant l'utilisateur du problème. De plus, tous les voyants clignotent lorsque le système est en mode d'erreur fatale. Chaque fonction du boîtier de commande réagit différemment selon le type d'erreur fatale rencontré.

Voici les types d'erreurs fatales possibles :

1) Erreur des positionneurs sur les actionneurs :

- Se produit lorsque le boîtier de commande s'attend à recevoir des impulsions de positionnement d'un actionneur, mais qu'aucune n'est détectée.

2) Erreur de sortie du moteur :

- Se produit lorsqu'une demande de puissance est générée, mais qu'aucune commande correspondante n'est détectée.
- Cette erreur est déclenchée pour des raisons de sécurité afin d'éviter tout mouvement involontaire du lit, à moins qu'une commande spécifique (pression sur un bouton) ait été émise.

3) Erreur d'actionneur(s) manquant(s)

- Se produit lorsqu'une fonction est appelée, mais que tous les actionneurs requis ne sont pas présents.

Pour effacer une erreur fatale, suivez ces étapes :

1. Appuyez simultanément et maintenez enfoncés les boutons de montée et de descente de la hauteur sur l'une des options suivantes :
 - La commande infirmière située au pied du lit, ou
 - La télécommande amovible (boîtier portable)
2. Maintenez les boutons enfoncés pendant **5 secondes**.
3. Vous entendrez **10 bips** indiquant que la réinitialisation est en cours.
4. Lorsque les bips cessent, la réinitialisation est terminée.

Remarque :

Une erreur fatale n'efface pas la mémoire de position des actionneurs. Toutefois, l'utilisateur doit vérifier que le système est en position sécuritaire. Il est recommandé de relever le lit à sa hauteur maximale afin d'assurer un bon calibrage de la position des actionneurs.

5. GARANTIE ET POLITIQUE DE RETOUR

5.1. Garantie limitée

Rotec offre à l'acheteur initial du lit VersaTech 1100 ULB les protections suivantes :

- 1 an contre les défauts de fabrication et sur les accessoires.
- 2 ans sur les moteurs et les composants électroniques.
- 10 ans sur le cadre.

La couverture de la garantie commence à la date d'achat de l'appareil. Aucun employé ni représentant de Rotec n'est autorisé à modifier cette garantie de quelque manière que ce soit. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par la négligence ou une mauvaise utilisation. Rotec ne sera pas tenu responsable de toute autre garantie offerte par une personne, une entreprise ou une société, à l'exclusion de celle stipulée ci-dessus.

Rotec se réserve le droit de remplacer par des matériaux de qualité égale ou supérieure lors des réparations et/ou des remplacements. Le matériel remplacé et couvert par cette garantie ne donne pas droit à une nouvelle garantie ; il bénéficie uniquement de la garantie d'origine.

La garantie sur le lit et/ou ses accessoires ne s'applique pas aux dommages résultant de modifications et/ou d'ajouts ou d'installations d'accessoires non autorisés par Rotec. Utilisez uniquement les pièces de rechange fournies par Rotec. Une preuve d'entretien préventif annuel pourrait être exigée pour bénéficier de cette garantie.

Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter notre service technique.

Nos heures d'ouverture sont du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 17 h 00.



AVERTISSEMENT SUR LA GARANTIE

- Toute modification de l'appareil sans l'autorisation de Rotec peut entraîner des **BLESSURES GRAVES ET/OU DES DOMMAGES MÉCANIQUES IMPORTANTS** et pourrait **LIMITER OU ANNULER LA GARANTIE DU PRODUIT**.

5.2. Politique de retour

Produit non conforme

Si un produit Rotec ne correspond pas à la facture de commande initiale, le problème doit être signalé dans les 48 heures suivant la livraison. Toute action corrective nécessaire sera effectuée aux frais de Rotec et sera traitée dans les plus brefs délais après notification de la non-conformité.

Produit endommagé

Il est de la responsabilité du réceptionnaire d'inspecter l'envoi, même si la ou les boîtes semblent en bon état. Tout dommage doit être noté sur le connaissance. Rotec doit être informé dans les 24 heures suivant la réception afin d'aviser le transporteur dans les meilleurs délais. Si Rotec n'est pas informé dans les 24 heures, ou si les dommages ne sont pas inscrits sur le connaissance, le client pourrait être tenu responsable de tous les coûts liés au remplacement ou à la réparation du produit endommagé.

Retour de produit


Tout retour de produit nécessite un numéro d'autorisation de retour de marchandises (RGA) et est soumis à des frais de restockage de 25 %. De plus, le client est responsable de tous les frais de transport liés au retour. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service à la clientèle.

6. PROCÉDURES DE RÉPARATION

6.1. Remplacement du QLCI (circuit de pesée)

Outils requis :

- Tournevis plat
- Pince coupante

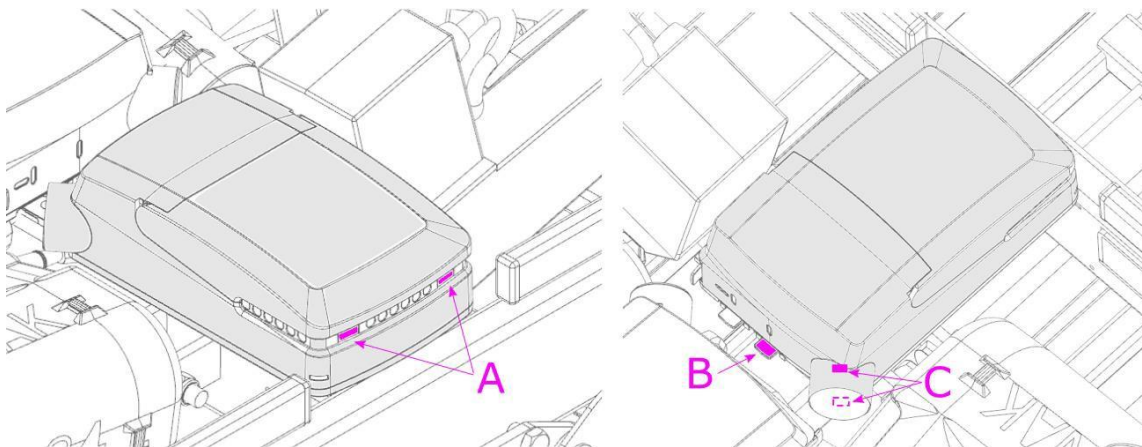


Procédure:

1. Relevez le lit à sa position la plus haute et appliquez les freins.
2. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
3. Ouvrez le boîtier en appuyant sur les deux loquets (A).
4. Débranchez tous les câbles sous le couvercle en prenant soin de noter leur emplacement.
5. Retirez le QLCI en appuyant sur le verrou situé au bas (B) et en le faisant glisser. Coupez les attaches de câble si nécessaire.
6. Débranchez l'alimentation électrique située dans le coin du QLCI (C) à l'aide d'un tournevis plat.
7. Réinstallez le nouveau QLCI en suivant les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
8. Vérifiez le bon fonctionnement de la balance avant de remettre le lit en service.

6.2. Remplacement du circuit principal ou de sa batterie

Outils requis :

- Tournevis plat
- Pince coupante

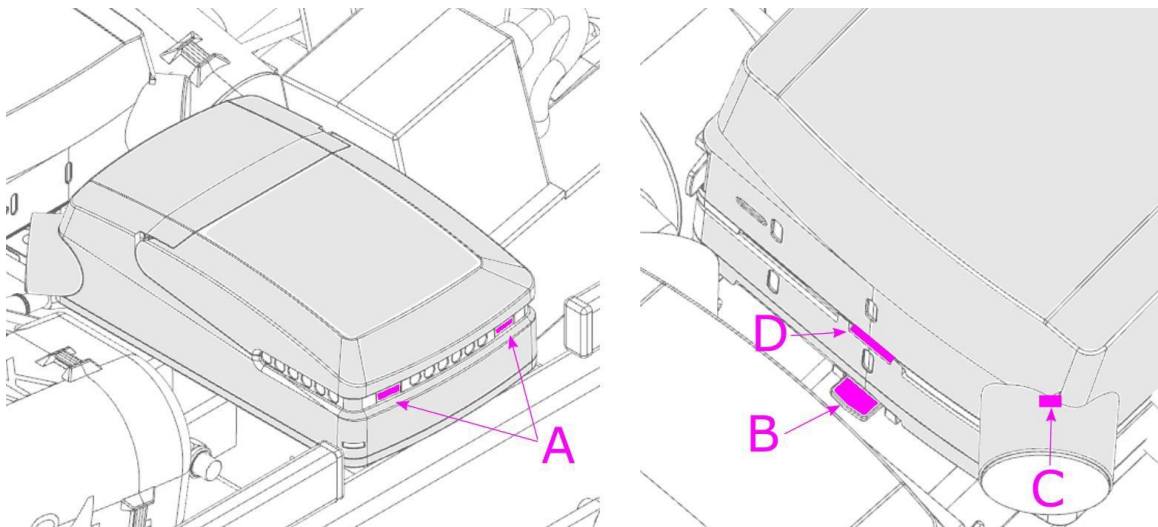

Procédure:

1. Relevez le lit à sa position la plus haute et appliquez les freins.
2. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
3. Ouvrez le boîtier en appuyant sur les deux loquets (A).
4. Débranchez tous les câbles sous le couvercle en prenant soin de noter leur emplacement.
5. Retirez le circuit en appuyant sur le verrou situé en bas (B) et en le faisant glisser. Coupez les attaches de câble si nécessaire.
6. Débranchez l'alimentation située dans le coin du circuit (C) à l'aide d'un tournevis plat.
7. Séparez la batterie du circuit en appuyant et en faisant glisser le verrou (D). Ouvrez la trappe des fils à l'aide d'un tournevis pour déconnecter le fil.
8. Réinstallez les nouvelles pièces en suivant les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
9. Vérifiez le bon fonctionnement de toutes les commandes avant de remettre le lit en service.



AVERTISSEMENT CONCERNANT LE RECYCLAGE DES BATTERIES

- Assurez-vous que la batterie soit recyclée dans un centre spécialisé prévu à cet effet.

6.3. Remplacement de la batterie VersaDrive

Outils requis :



- Tournevis carré Robertson #2
- Tournevis plat
- Tournevis extracteur




**ATTENTION ! L'ENTRETIEN DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ
UNIQUEMENT PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ.**

Procédure:

1. Relevez le lit à sa position la plus haute et appliquez les freins.
2. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
3. Soulevez le dossier et ouvrez le boîtier électrique en retirant les rivets à l'aide d'un tournevis.
4. Dévissez la vis à l'aide d'un tournevis carré Robertson #2.
5. Déclipsez le couvercle à l'aide d'un tournevis plat.

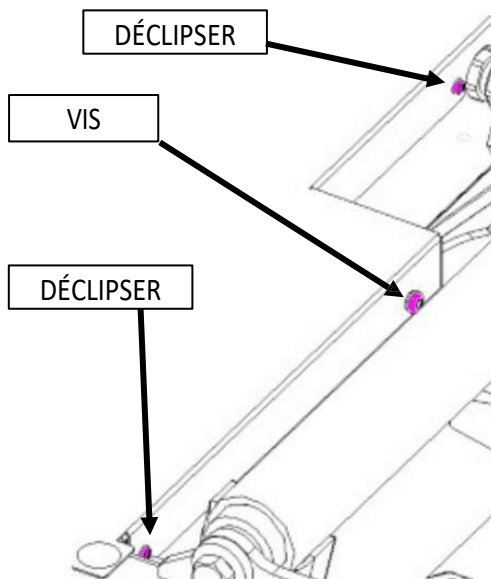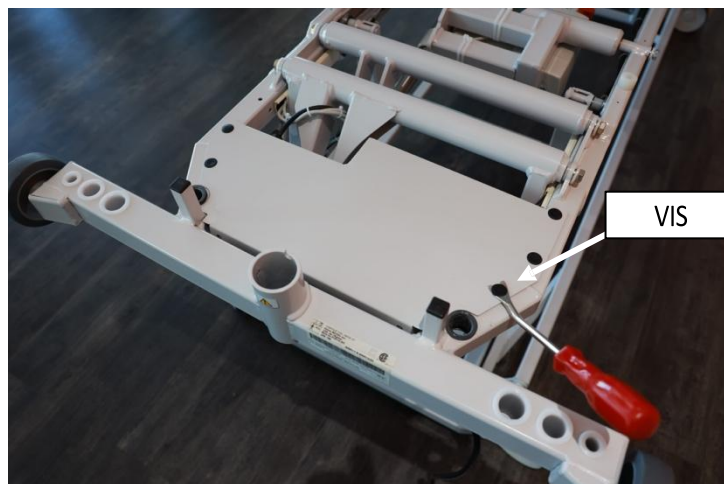

6. Retirez le support métallique de la batterie en dévissant les deux vis.

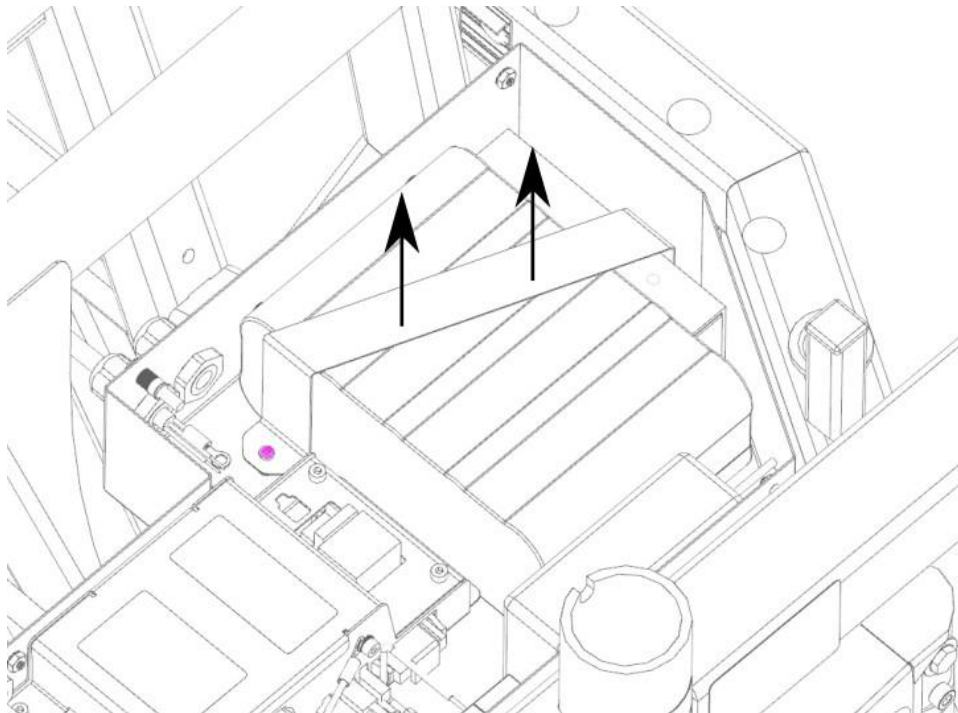

7. Retirez complètement la batterie et débranchez-la.
8. Réinstallez la nouvelle batterie en suivant les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
9. Vérifiez le bon fonctionnement de toutes les commandes avant de remettre le lit en service.




AVERTISSEMENT CONCERNANT LE RECYCLAGE DE LA BATTERIE

- Assurez-vous que la batterie soit recyclée dans un centre spécialisé prévu à cet effet.

6.4. Remplacement du cordon d'alimentation

Outils requis :

- Tournevis carré Robertson #2
- Tournevis plat
- Tournevis Phillips #2
- Tournevis extracteur

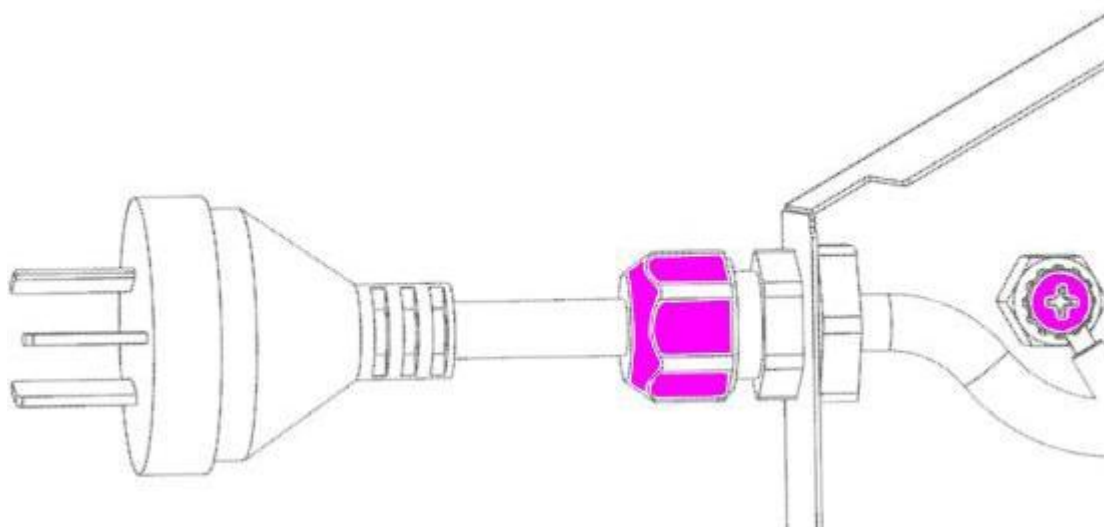


**ATTENTION ! L'ENTRETIEN DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ
UNIQUEMENT PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ.**

Procédure:

1. Relevez le lit à sa position la plus haute et appliquez les freins.
2. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
3. Retirez les œillets qui fixent le câble au cadre.
4. Dévissez le passe-fil.

5. Soulevez le dossier et ouvrez le boîtier électrique.

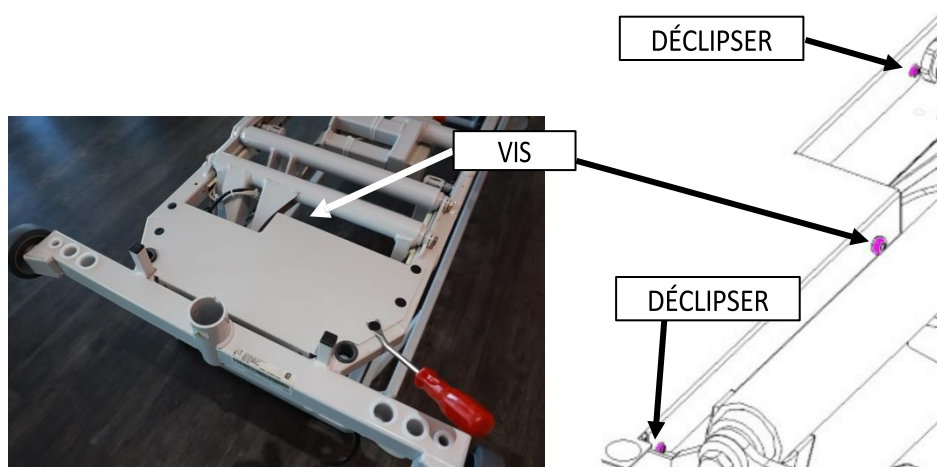

6. Débranchez les fils blanc et noir du cordon d'alimentation des borniers de jonction. **ASSUREZ-VOUS QUE LE LIT EST DÉBRANCHÉ AVANT DE PROCÉDER.**





7. Débranchez le fil vert du point de mise à la terre.
8. Retirez le cordon d'alimentation.
9. Réinstallez le nouveau cordon d'alimentation en suivant les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse. Assurez-vous que le connecteur de mise à la terre du cordon soit placé en dessous, en contact avec la tige filetée.
10. Vérifiez le bon fonctionnement de toutes les commandes avant de remettre le lit en service.

6.5. Remplacement du port d'appel infirmier

Outils requis :

- Tournevis plat
- Pince coupante

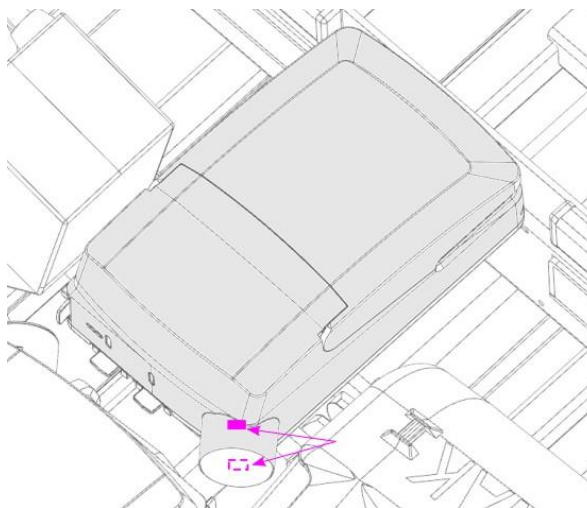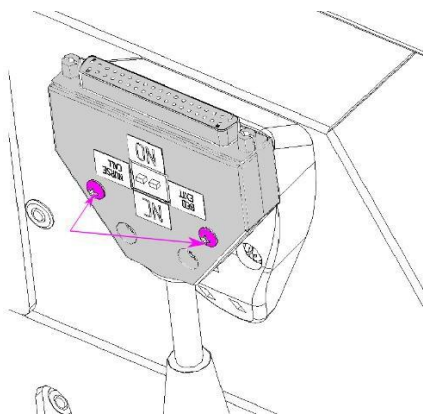


Procédure:

1. Relevez le lit à sa position la plus haute et appliquez les freins.
2. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
3. À l'aide de pinces coupantes, retirez les attaches retenant le câble du connecteur d'appel infirmier au cadre.
4. Retirez les deux vis comme indiqué.
5. Suivez le câble et débranchez-le en appuyant sur les deux barrures, puis en le retirant.
6. Réinstallez le nouveau connecteur d'appel infirmier en suivant les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
7. Vérifiez le bon fonctionnement de toutes les commandes avant de remettre le lit en service.

6.6. Remplacement d'une barrière latérale

Outils requis :

- Douille de 1/2"
- Clé à cliquet avec carré d'entraînement de 3/8"
- Pince coupante

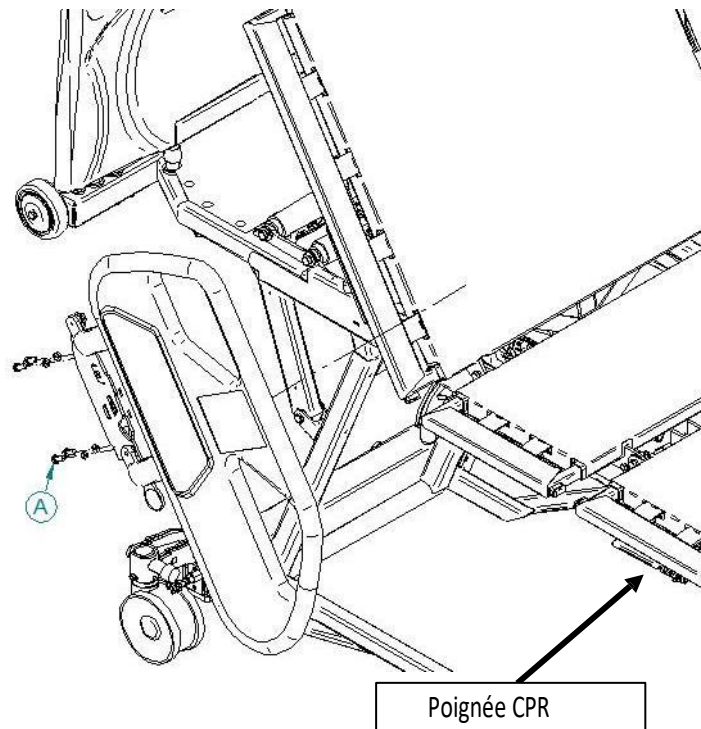


Procédure:

1. Relevez le lit à sa position la plus haute et appliquez les freins.
2. Relevez la section du dossier à sa position la plus haute.
 - Si les commandes ne fonctionnent plus, utilisez la poignée de CPR pour relever manuellement la section du dossier.
3. Relevez le côté du lit nécessitant la réparation.
4. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
5. Suivez le câble du côté du lit jusqu'à la boîte de jonction, retirez la barrure et débranchez-le.
6. À l'aide de pinces coupantes, retirez les attaches qui fixent le câble du côté du lit au châssis.
7. À l'aide d'une clé à cliquet de 3/8" et d'une douille de 1/2", retirez les 4 vis (A) qui fixent l'assemblage de la barrière latérale à la section de la tête.
 - Soutenez l'assemblage lors du retrait de la dernière vis pour éviter qu'il ne tombe.
8. Réinstallez le nouvel assemblage de barrière latérale en suivant les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
9. Vérifiez le bon mouvement de la barrière latérale et testez le bon fonctionnement de toutes les commandes, y compris l'option d'appel infirmier si présente, avant de remettre le lit en service.

6.7. Remplacement de l'extension de structure de pied du lit

Outils requis :

- Tournevis plat
- Clé 1/2"
- Tournevis carré Robertson #2

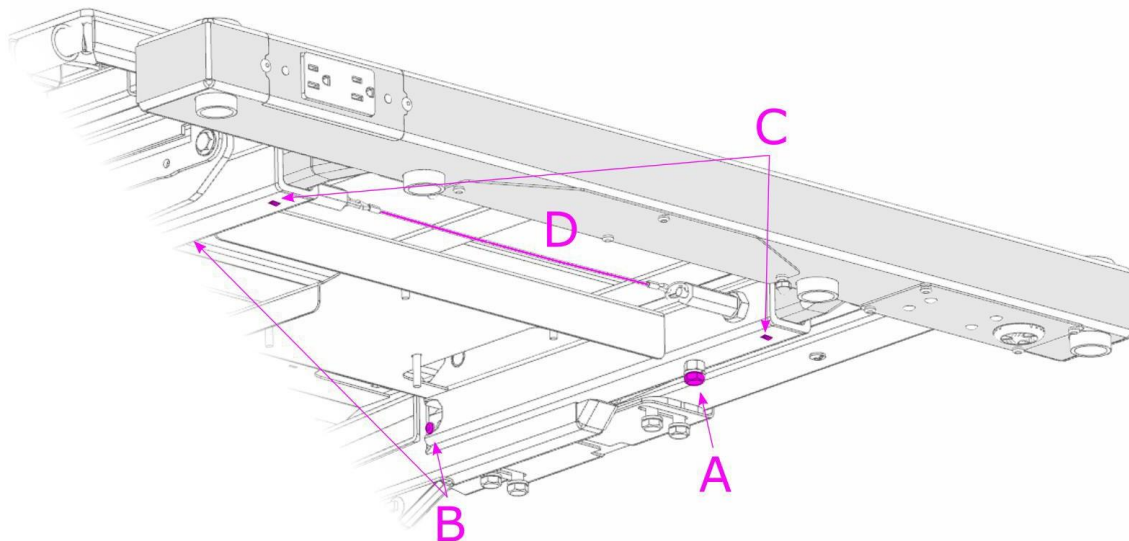


Procédure:

1. Relevez le lit à sa position la plus haute et appliquez les freins.
2. Relevez la section des pieds.
3. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
4. Déployez la section des pieds en tirant sur le câble rouge (D).
5. Retirez la vis (A) à l'aide d'une clé de 1/2", ainsi que les vis (B) à l'aide d'un tournevis carré.
6. Débranchez les câbles sortants situés près des vis (B).
7. À l'aide d'un tournevis plat, appuyez sur les languettes du guide (C) et faites-le glisser pour le retirer. Répétez l'opération de l'autre côté, puis retirez l'extension du pied.
8. Installez la nouvelle extension en suivant les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
9. Vérifiez le bon fonctionnement du panneau au pied du lit ainsi que de toutes les commandes avant de remettre le lit en service.

6.8. Remplacement d'un pare-choc

Outils requis :

- Clé mixte de 9/16"

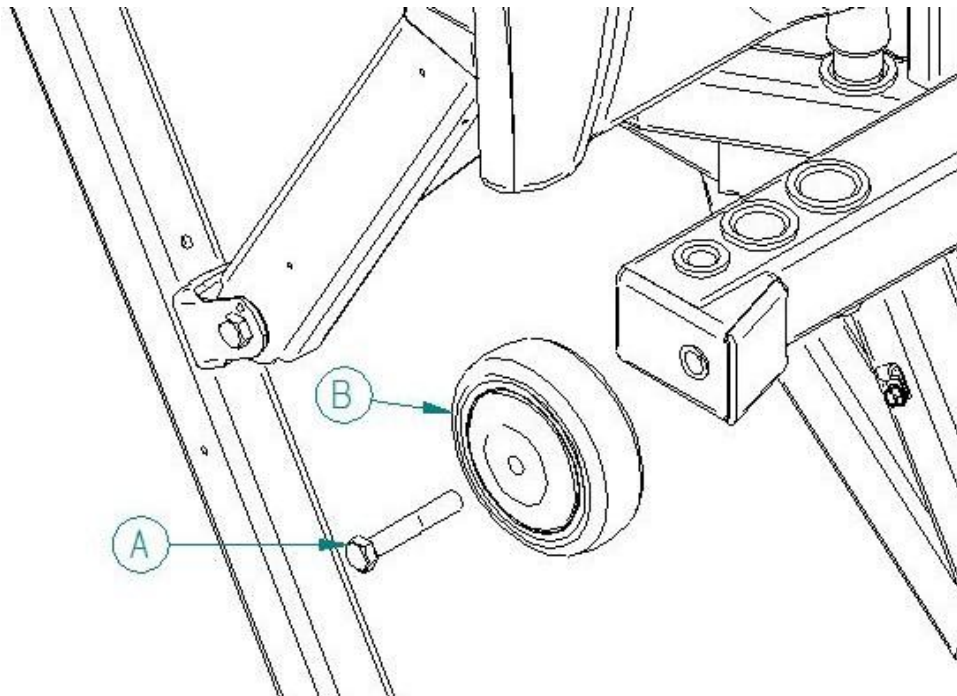

Procédure:

1. Relevez le lit à sa position la plus haute et appliquez les freins.
2. Retirez l'écrou (A) à l'aide d'une clé mixte de 9/16", puis enlevez le pare-choc mural.
3. Réinstallez le nouveau pare-choc mural en suivant les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.

6.9. Remplacement d'une roulette du lit


Outils requis :

- Clé mixte de 9/16"
- Clé Allen #3
- Clé Allen #4
- Clé Allen #5
- Deux chandelles (supports d'essieu)
- Clé mixte de 1/2"
- Outil de retrait de clips de garniture

Procédure:


1. Relevez le lit à sa position la plus haute.
2. Placez la pédale de frein des roulettes en position neutre.
3. Placez des chandelles sous le châssis du lit, près de la roulette défectueuse.
4. Abaissez le lit jusqu'à ce que la roulette défectueuse ne touche plus le sol.



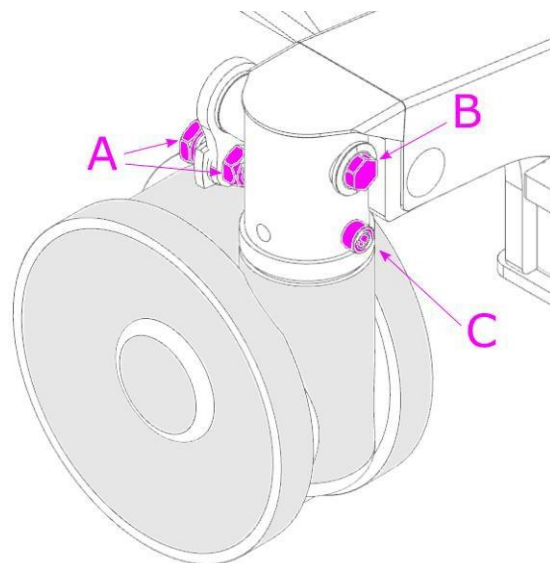

5. Dévissez la vis (A) et son écrou à l'aide de clés hexagonales.
6. Retirez la tige hexagonale (B) en tapant doucement sur son extrémité.
7. Dévissez la vis Allen (C) et retirez la roue.

Avis : Avant d'installer la nouvelle roulette, assurez-vous qu'elle est correctement orientée. L'illustration ci-dessous montre le fonctionnement du mécanisme de la roulette.

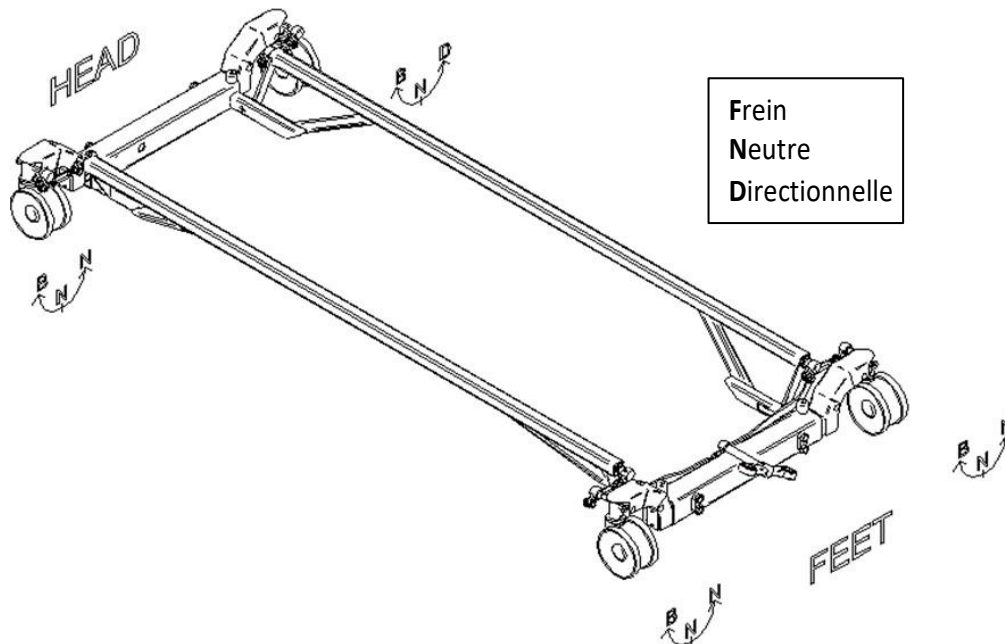

8. Réinstallez la nouvelle roulette en suivant les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse, en vous assurant qu'elle est bien alignée.

9. Vérifiez que la nouvelle roulette fonctionne correctement avant de remettre le lit en service.

Avis : Si la nouvelle roulette ne freine pas correctement, un mécanisme de réglage situé sous la roulette permet d'effectuer les ajustements nécessaires.

- Utilisez une clé Allen #4 pour tourner la vis de réglage, un quart de tour à la fois, jusqu'à ce que la roulette freine correctement.
- Tournez dans le sens antihoraire pour serrer le frein.
- Tournez dans le sens horaire pour desserrer le frein.




6.10. Remplacement de la cellule de charge

Outils requis :


- Outils pour retirer la roulette (voir section précédente)
- Douille longue de $\frac{3}{4}$ " avec cliquet
- Clé de 9/16"
- Aimant

Procédure:

1. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale et relevez le lit à sa position la plus haute.
2. Placez la pédale de frein des roulettes en position neutre.
3. Placez des chandelles sous le châssis du lit, à proximité de la cellule de charge défectueuse.
4. Abaissez le lit jusqu'à ce que la roulette de la cellule de charge défectueuse ne touche plus le sol.

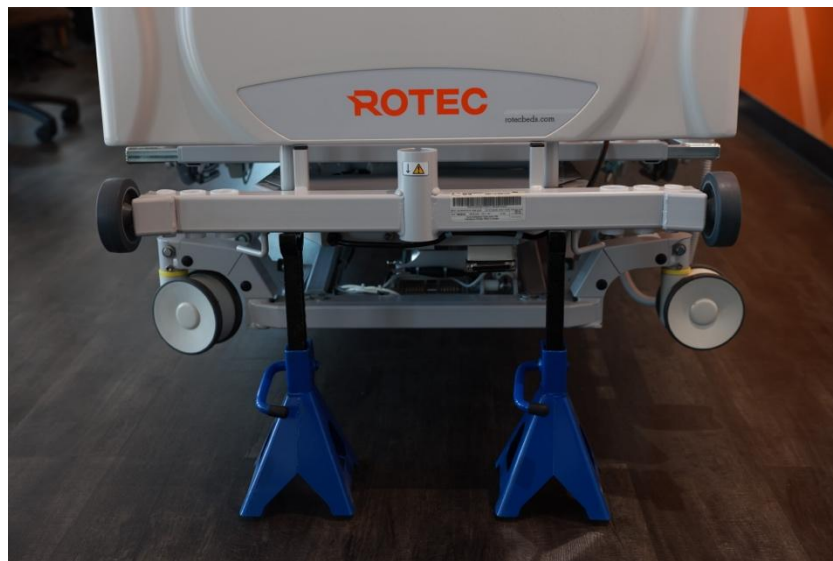

5. Retirez la roulette du lit en suivant la procédure décrite dans la section précédente.


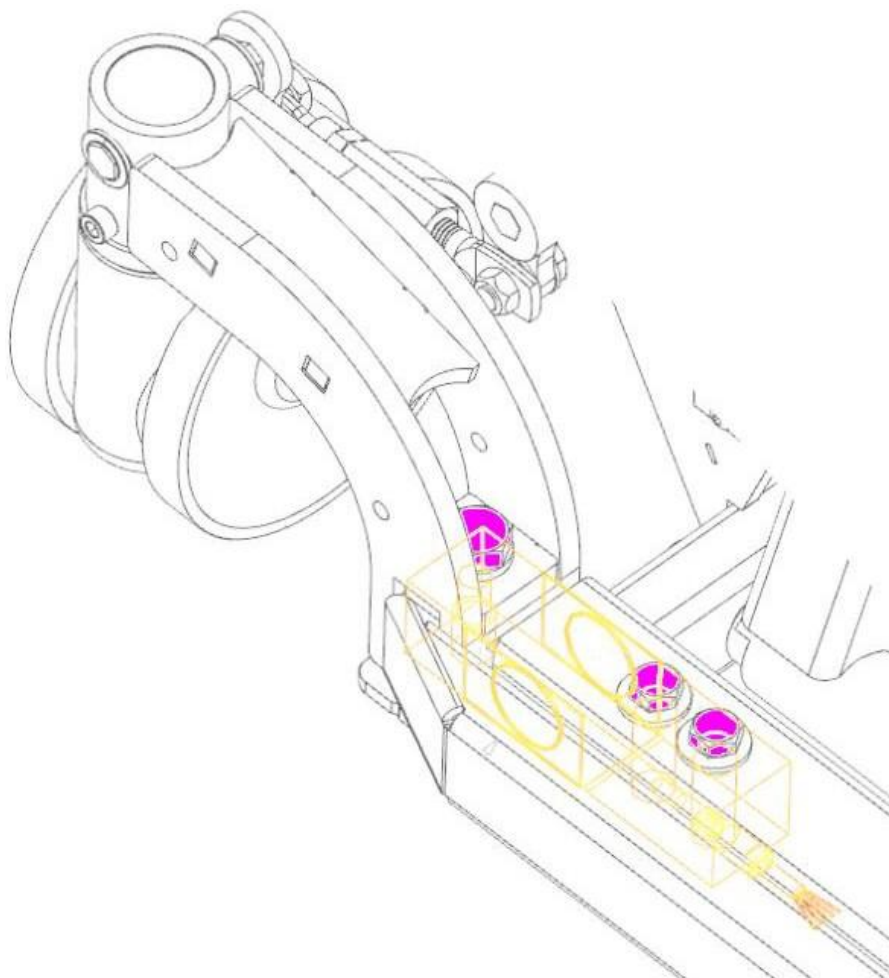


6. Retirez le couvercle métallique à l'aide d'un extracteur de vis.
7. Dévissez les trois (3) boulons qui fixent la cellule de charge.
8. Retirez le couvercle en plastique à l'endroit où les fils entrent dans l'axe.
9. Tirez le fil hors de l'axe, puis déconnectez-le du connecteur de la balance.
10. Retirez la cellule de charge, idéalement à l'aide d'un aimant ou en la saisissant avec un objet pointu.
11. Réinstallez la nouvelle cellule de charge en suivant les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
12. Vérifiez que la nouvelle cellule fonctionne correctement avant de remettre le lit en service.

6.11. Remplacement du moteur de la section des pieds


Outils requis :

- Clé mixte de 9/16"
- Tournevis plat standard
- Pince coupante

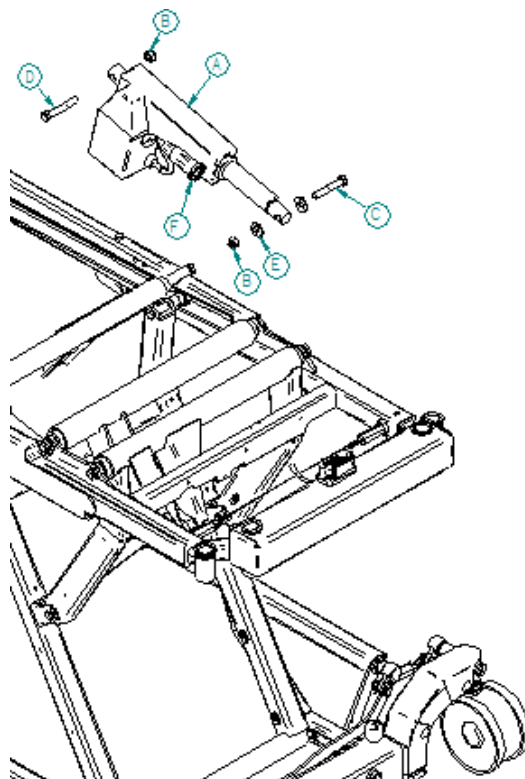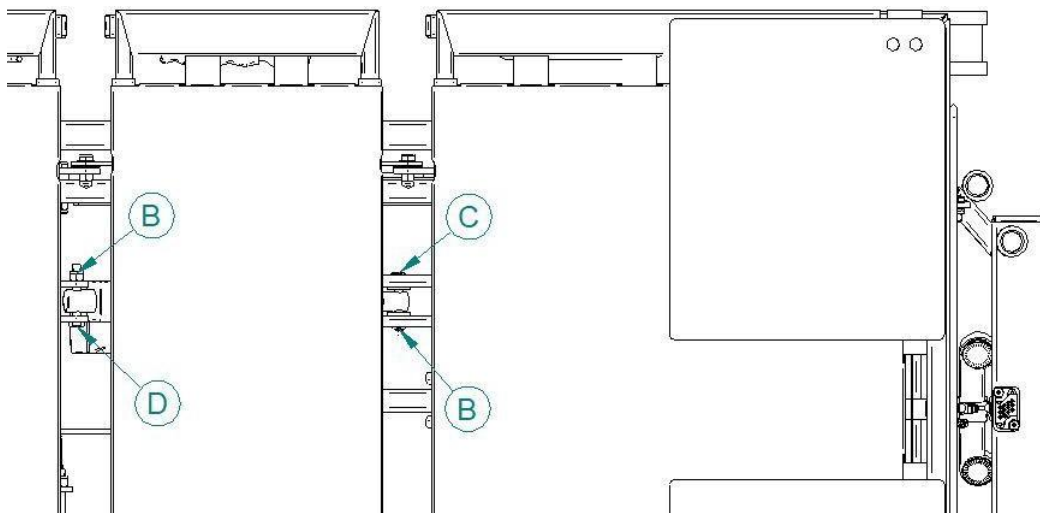

Procédure:

1. Relevez le lit à sa position la plus haute et appliquez les freins.
2. Placez la section des pieds en position horizontale.
3. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
4. À l'aide d'une pince coupante, retirez les attaches qui maintiennent les câbles sur le moteur (A).
5. Débranchez le câble du moteur (A) en retirant la barrure (F) du connecteur à l'aide d'un tournevis plat standard.

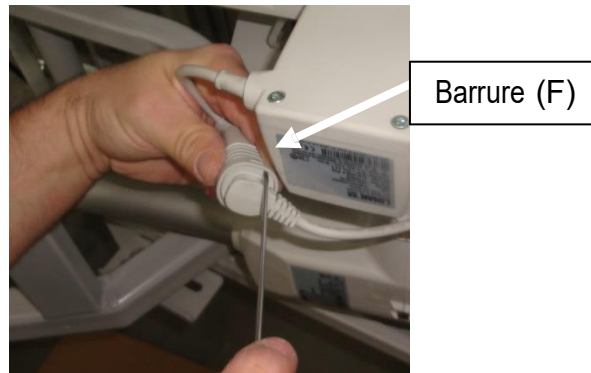


6. Retirez les boulons (C et D) en les maintenant avec une clé mixte de 9/16", puis retirez l'écrou (B) à l'aide d'une autre clé mixte de 9/16".
7. Réinstallez le nouveau moteur dans le mécanisme de la section des jambes en suivant les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
8. Vérifiez que le nouveau moteur fonctionne correctement avant de remettre le lit en service.

6.12. Remplacement du moteur du dossier


Outils requis :

- Clé mixte de 9/16"
- Tournevis plat standard
- Pince coupante

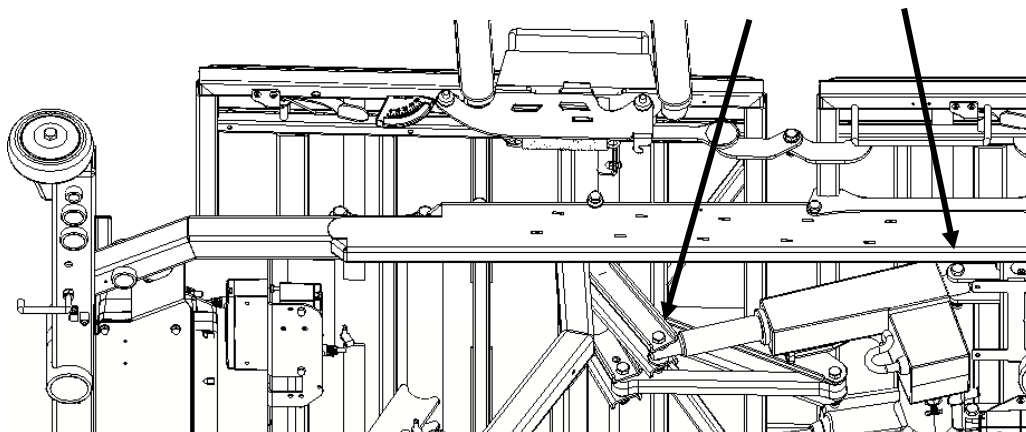


Procédure:


1. Relevez le lit à sa position la plus haute et appliquez les freins.
2. Relevez le dossier à sa position la plus haute.
3. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
4. À l'aide d'une pince coupante, retirez les attaches qui maintiennent les câbles sur le moteur.

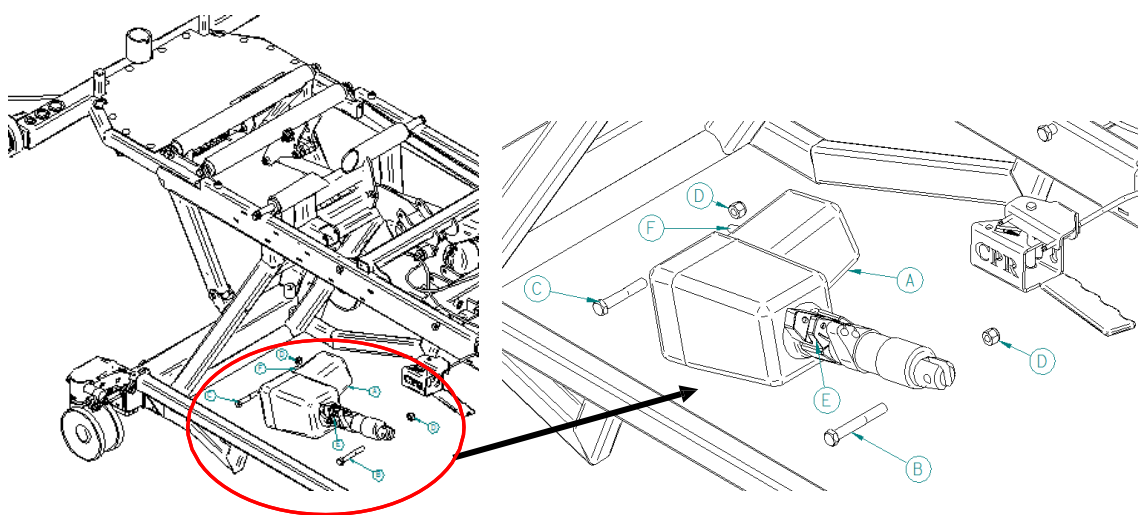


5. Débranchez le câble du moteur (A) en retirant la barrure (F) du connecteur à l'aide d'un tournevis plat.

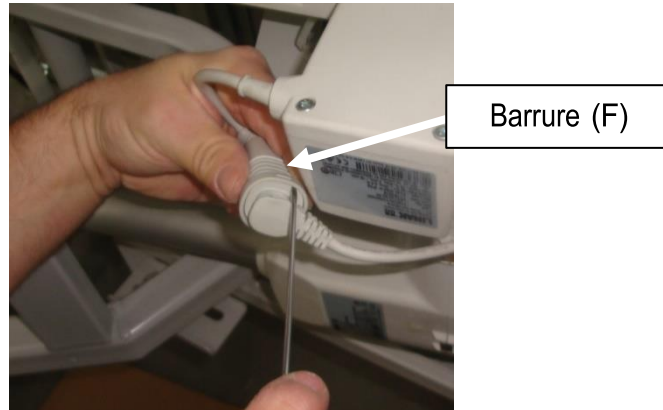


6. Déverrouillez le mécanisme de déclenchement en appuyant directement dessus avec un tournevis plat standard.

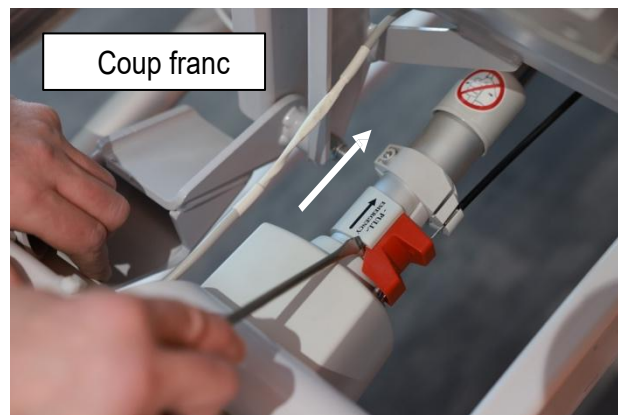

7. Retirez la barrière de déclenchement, le déclencheur et la cale (bande d'espacement).

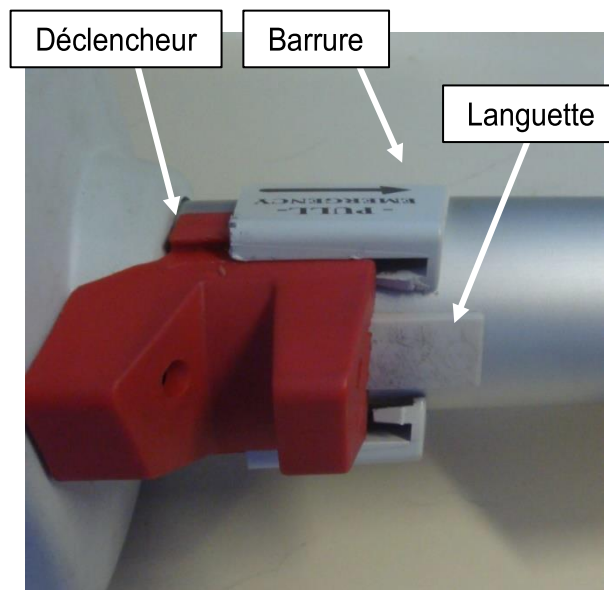


8. Ajustez la vis pour qu'elle corresponde à la même longueur que la tige avec le jonc d'arrêt.

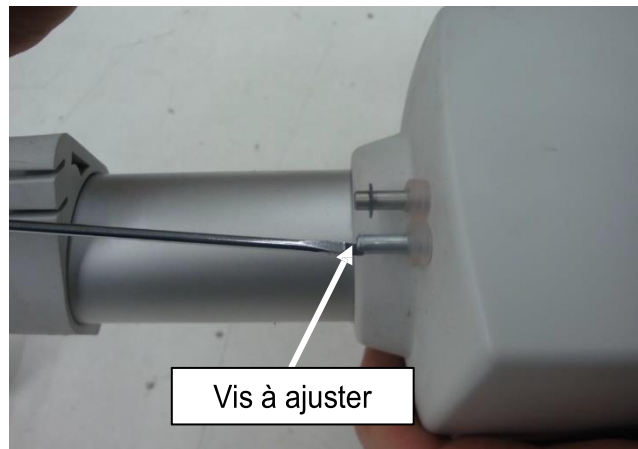


9. Retirez les boulons (B et C) en les maintenant avec une clé mixte de 9/16", puis retirez l'écrou (D) à l'aide d'une autre clé mixte de 9/16".

- Le moteur devrait maintenant être libre et prêt à être retiré du châssis du lit.
- Suivez ces étapes en sens inverse pour installer le nouveau moteur.

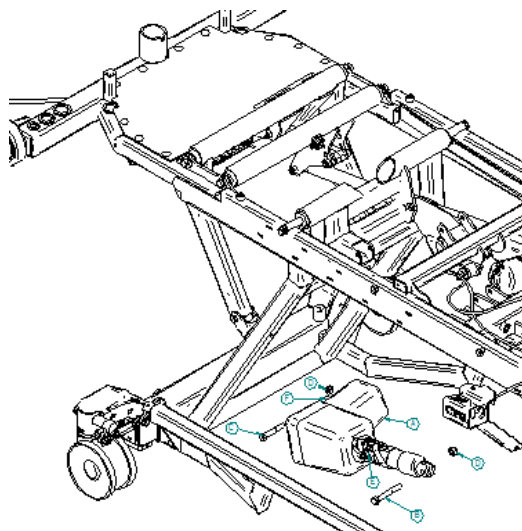

10. Placez les câbles dans les encoches du support-guide de câbles.

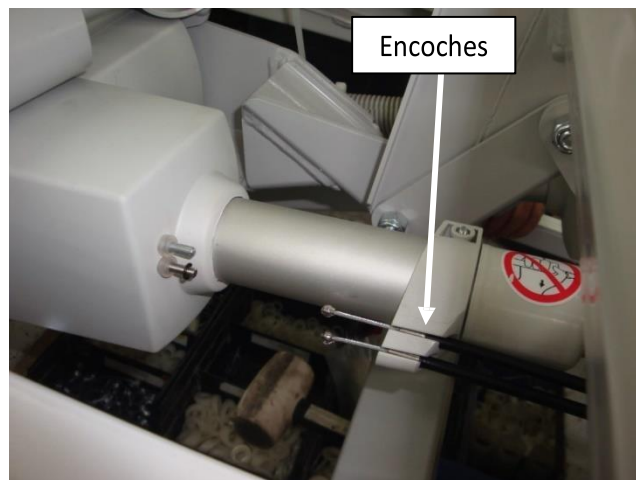


Assurez-vous que la tige avec le jonc d'arrêt s'insère correctement dans le déclencheur en vérifiant à l'intérieur du déclencheur.


11. Insérez les extrémités des câbles dans les encoches du déclencheur.




12. Installer la languette de positionnement.

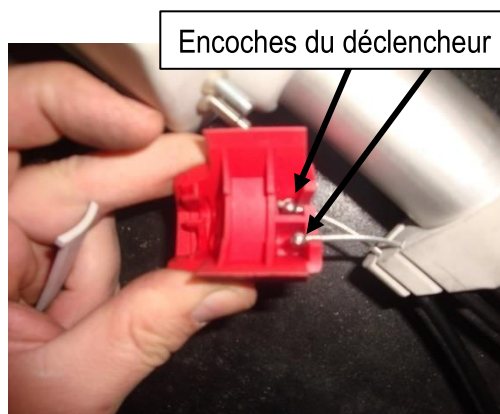

13. Fixez le déclencheur au moteur et faites-le glisser jusqu'au jonc d'arrêt.

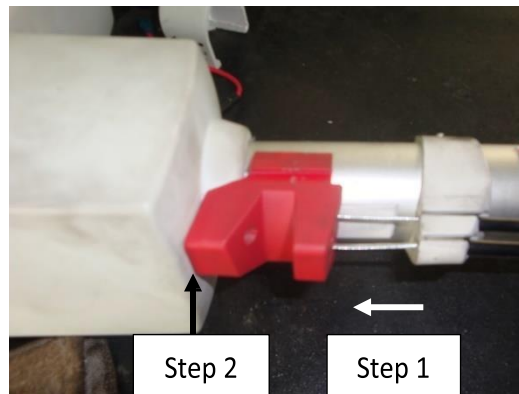


14. Insérez le verrou du déclencheur.

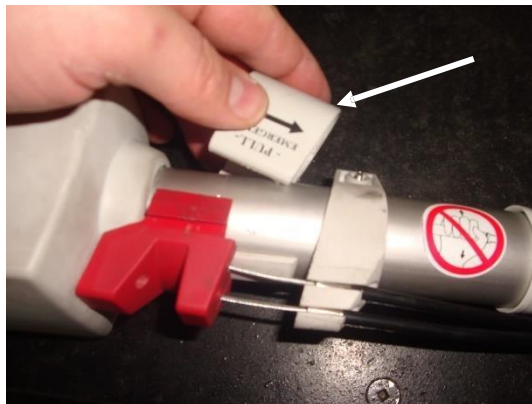

15. Faites glisser le verrou du déclencheur dans les encoches.



16. Faites glisser le support de câble jusqu'à la bande d'espacement et fixez-le à l'aide d'un tournevis plat.

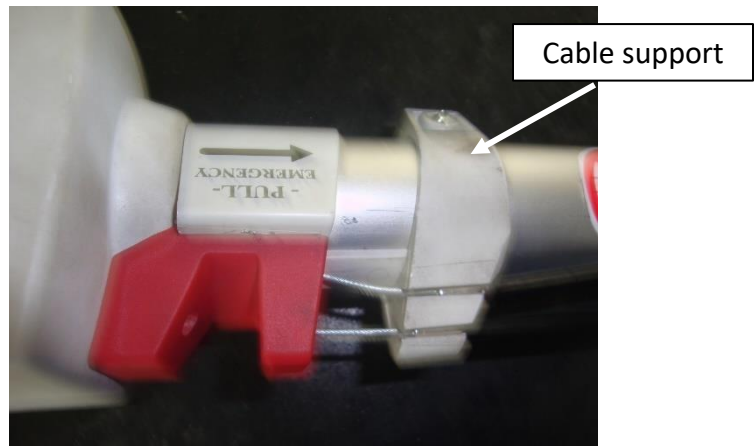


17. Attachez les câbles avec de nouvelles attaches, comme à l'origine.
18. Vérifiez que le nouveau moteur fonctionne correctement avant de remettre le lit en service.

6.13. Remplacement des moteurs d'élévation

Outils requis :

- Clé mixte de 9/16"
- Tournevis plat standard
- Pince coupante
- Deux chandelles (supports d'essieu)
- Outil de retrait de clips de garniture

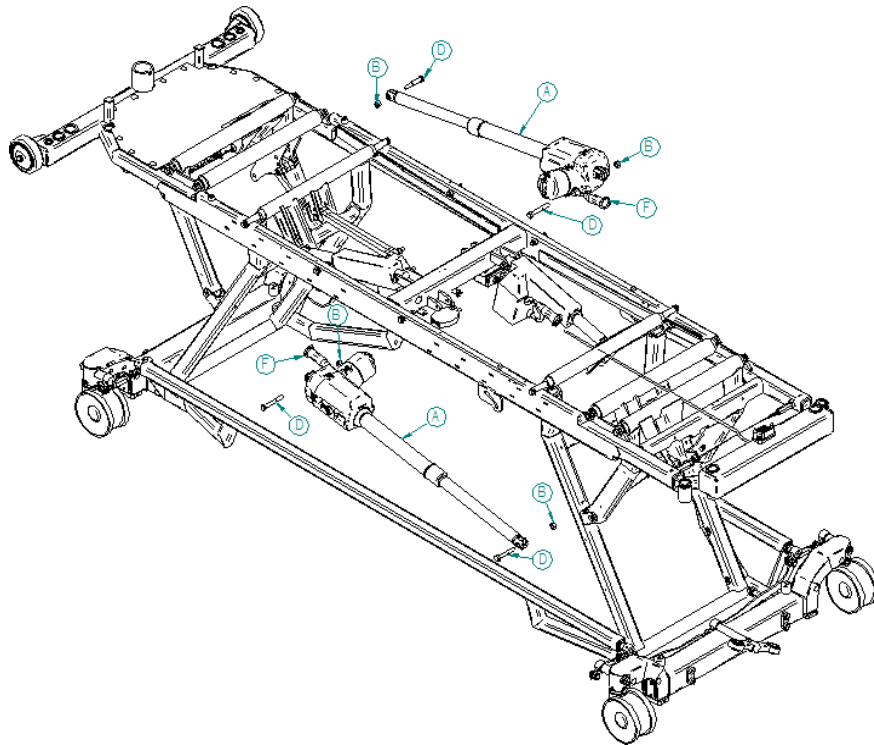


Procédure:

1. Relevez le lit à sa position la plus haute et appliquez les freins.
2. Placez des chandelles sous l'extrémité du châssis supérieur, à l'endroit où le moteur doit être remplacé, puis abaissez le châssis sur les chandelles jusqu'à ce que le mécanisme de levée soulève les roulettes.



3. Relevez le dossier à sa position la plus haute et abaissez la barrière latérale.
4. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.

5. Retirez le couvercle de la section assise à l'aide d'un outil de retrait de clips de garniture.
6. À l'aide d'une pince coupante, retirez les attaches qui maintiennent les câbles sur le moteur (A).
7. Débranchez le câble du moteur (A) en retirant la barrure (F) du connecteur à l'aide d'un tournevis plat.

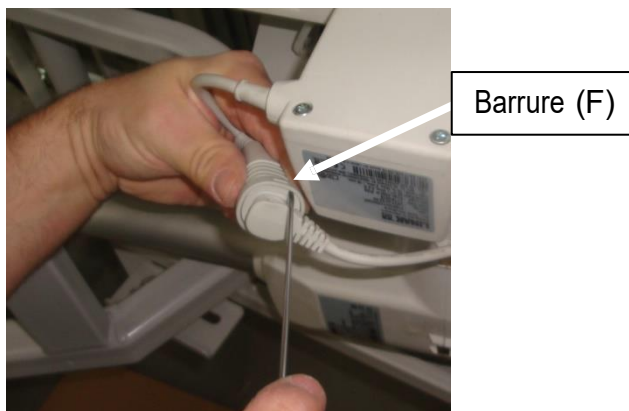

8. Retirez les boulons (D) en les maintenant avec une clé mixte de 9/16" et retirez l'écrou (B) avec une autre clé mixte de 9/16".



AVERTISSEMENT : RETIREZ LES BOULONS AVEC PRÉCAUTION. LA STRUCTURE DE LA BASE VA S'AFFAISER. MAINTENEZ-LE FERMEMENT.

9. Réinstallez le nouveau moteur dans le mécanisme de levée/descente en suivant les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
10. Vérifiez que le nouveau moteur fonctionne correctement avant de remettre le lit en service.



6.14. Remplacement de la poignée CPR

Outils requis :

- Tournevis carré Robertson #2
- Clé mixte de 9/16"

Procédure:

1. Relevez le lit à sa position la plus haute et appliquez les freins.
2. Allongez la section des jambes à sa longueur maximale.
3. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.

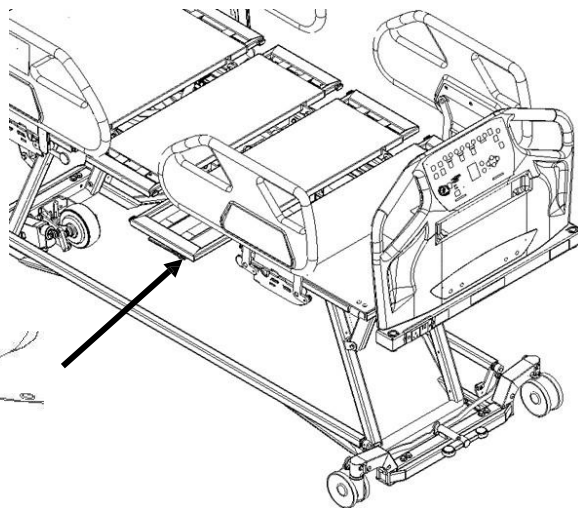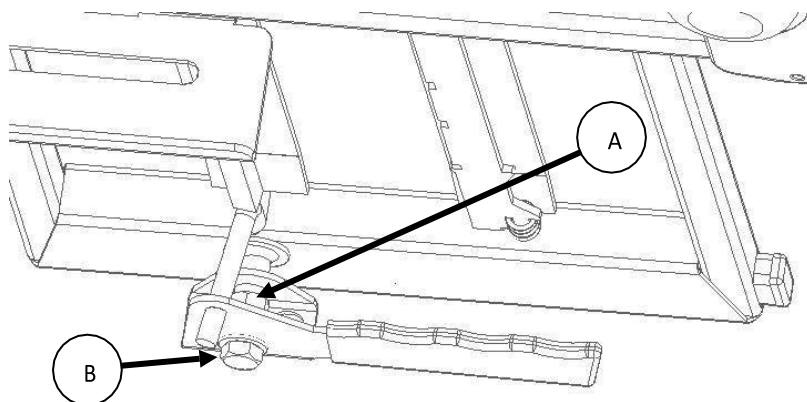

4. À l'aide d'une clé mixte de 9/16", dévissez le contre-écrou (A), puis dévissez complètement la vis (B).
5. Remplacez la poignée brisée par une neuve.
6. Réinstallez la nouvelle poignée en suivant les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
7. Vérifiez que la fonction CPR fonctionne correctement avant de remettre le lit en service.



6.15. Remplacement du câble de commande CPR

Outils requis :

- Tournevis carré Robertson #2
- Clé mixte de 9/16"
- Deux clés mixtes de 7/16"

Procédure:


1. Relevez le lit à sa position la plus haute et appliquez les freins.
2. Allongez la section des jambes à sa longueur maximale.
3. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
4. À l'aide des deux clés de 7/16", retirez la vis (A) et l'écrou (B).
5. Le ressort de rappel, la cale et le support de verrouillage tomberont avec la vis et l'écrou. Assurez-vous de les conserver pour le remontage.
6. Avec les deux clés de 7/16", dévissez complètement le contre-écrou (C) et retirez le câble de son support.
7. Pour les instructions concernant le retrait et l'installation de l'autre extrémité du câble de commande, voir la section 6.12.
8. Installez le nouveau câble de commande dans la section des jambes en suivant les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
9. Vérifiez que la fonction CPR fonctionne correctement avant de remettre le lit en service.

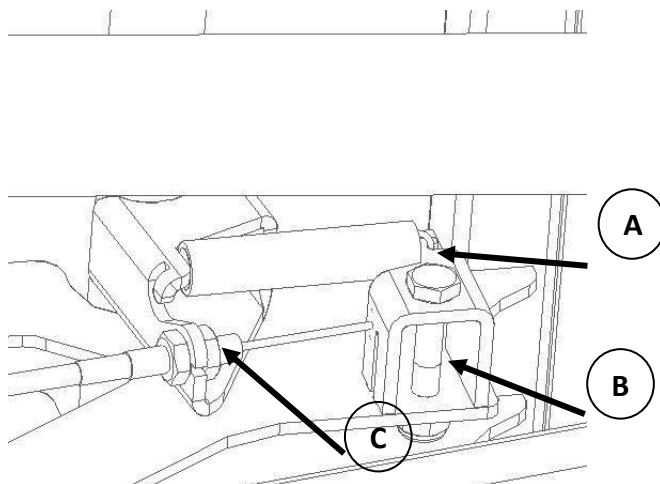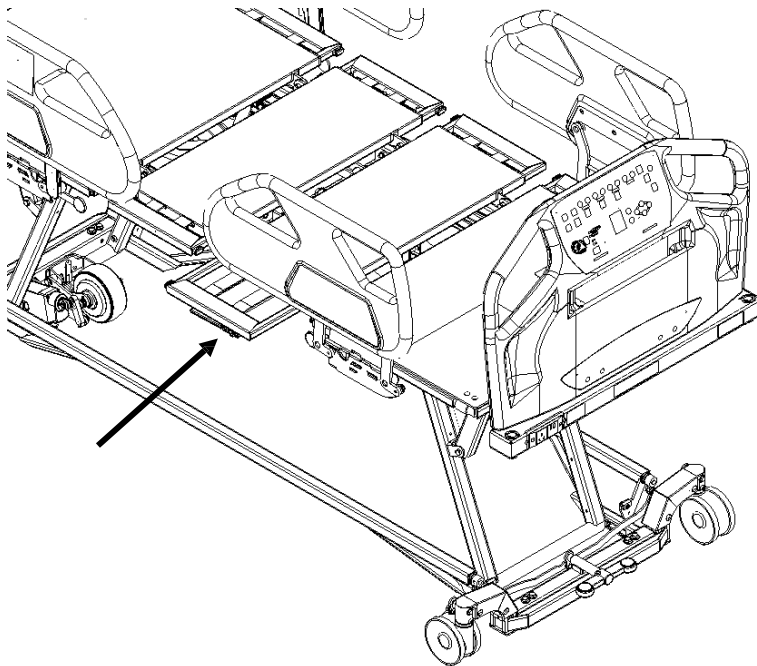


6.16. Remplacement du cadre d'élévation des pieds

Outils requis :

- 9/16" Clé mixte de 9/16"
- Tournevis carré Robertson #2
- Deux chandelles (supports d'essieu)
- Clé à cliquet avec carré d'entraînement de 3/8"
- Douille de 9/16"
- Douille de 5/8"
- Clé mixte de 5/8"

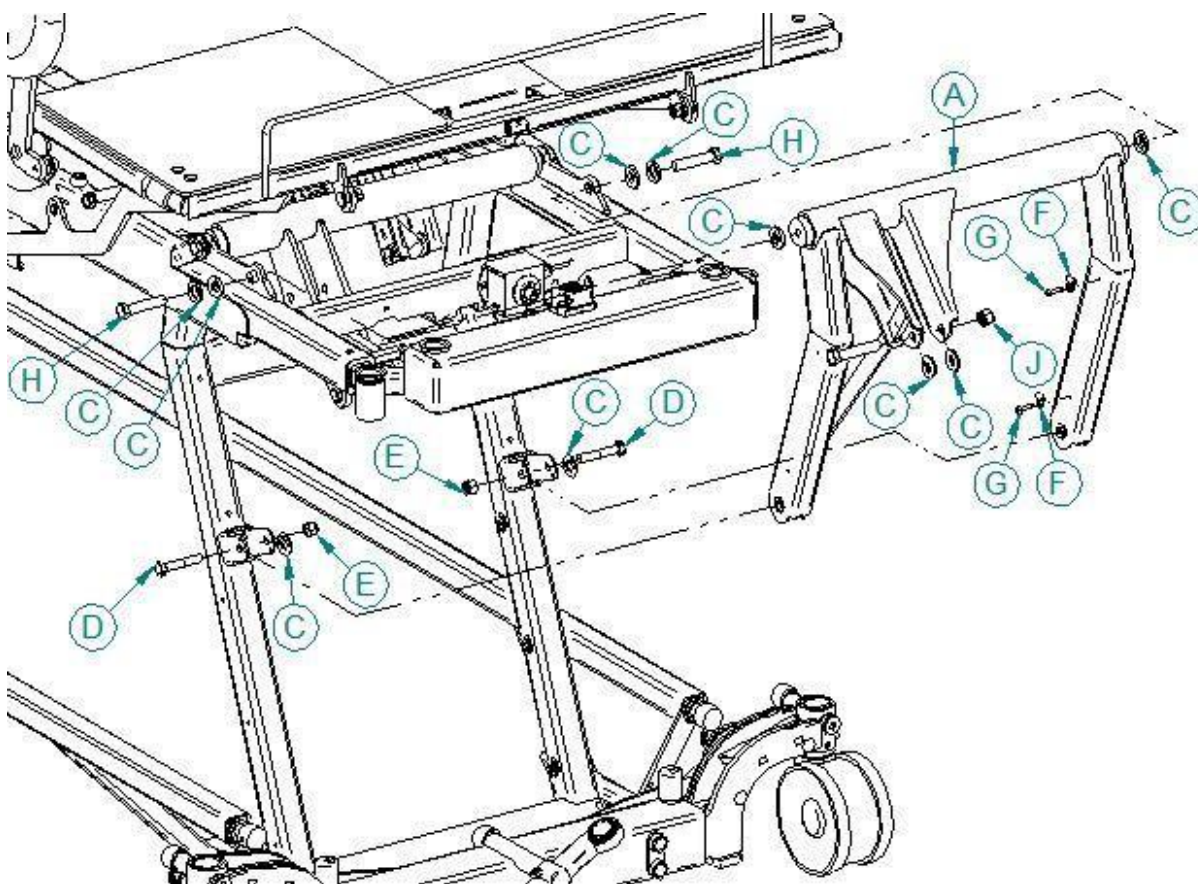

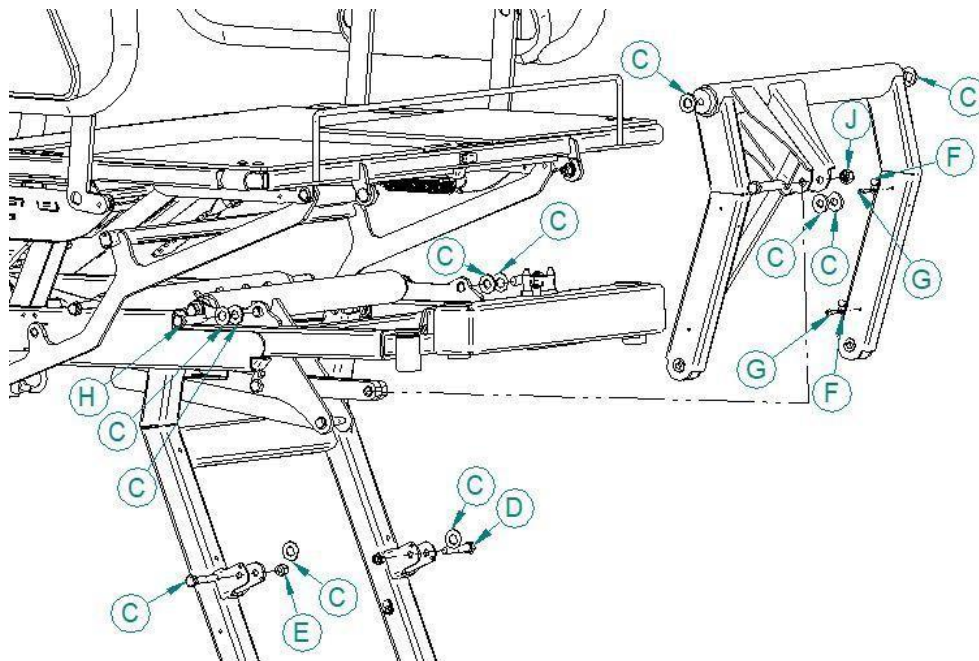

Procédure:

1. Relevez le lit à sa position la plus haute et appliquez les freins.
2. Déployez l'extension du châssis supérieur.
3. Placez des chandelles sous l'extension du châssis supérieur, puis abaissez le châssis sur les chandelles jusqu'à ce que le mécanisme de levée commence à soulever les roulettes.



4. Soulevez la plateforme de la section des pieds.
5. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.

6. Retirez les vis (G) des œillets en plastique (F) qui fixent les câbles au châssis du lit à l'aide d'un tournevis Robertson #2.
7. Maintenez le boulon (H) avec une clé mixte de 5/8", puis retirez l'écrou (J) à l'aide d'un cliquet de 3/8" et d'une douille de 11/16". Notez l'emplacement de la rondelle en nylon (K) et conservez toutes les pièces.
8. Maintenez les boulons (D) avec une clé mixte de 9/16", puis retirez les écrous (E) à l'aide d'un cliquet de 3/8" et d'une douille de 9/16". Notez l'emplacement des rondelles en nylon (K) et conservez toutes les pièces.




**AVERTISSEMENT : RETIREZ LES BOULONS AVEC PRÉCAUTION. LA STRUCTURE VA S’AFFAISER
TENEZ-LA FERMEMENT.**


9. À l'aide d'un cliquet de 3/8" et d'une douille de 5/8", retirez les boulons (B) qui fixent le levier du moteur de levée/descente au châssis supérieur. Soutenez l'ensemble pendant le retrait du dernier boulon pour éviter qu'il ne tombe. Notez l'emplacement des rondelles en nylon (C).
10. Installez la nouvelle section des pieds en suivant les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
11. Vérifiez que le mécanisme de levée/descente fonctionne correctement avant de remettre le lit en service.

6.17. Remplacement du cadre d'élévation de la tête

Outils requis :

- 9/16" Clé mixte de 9/16"
- Tournevis carré Robertson #2
- Deux chandelles (supports d'essieu)
- Clé à cliquet (entraîneur de 3/8")
- Douille de 9/16"
- Douille de 5/8"
- Clé mixte de 5/8"

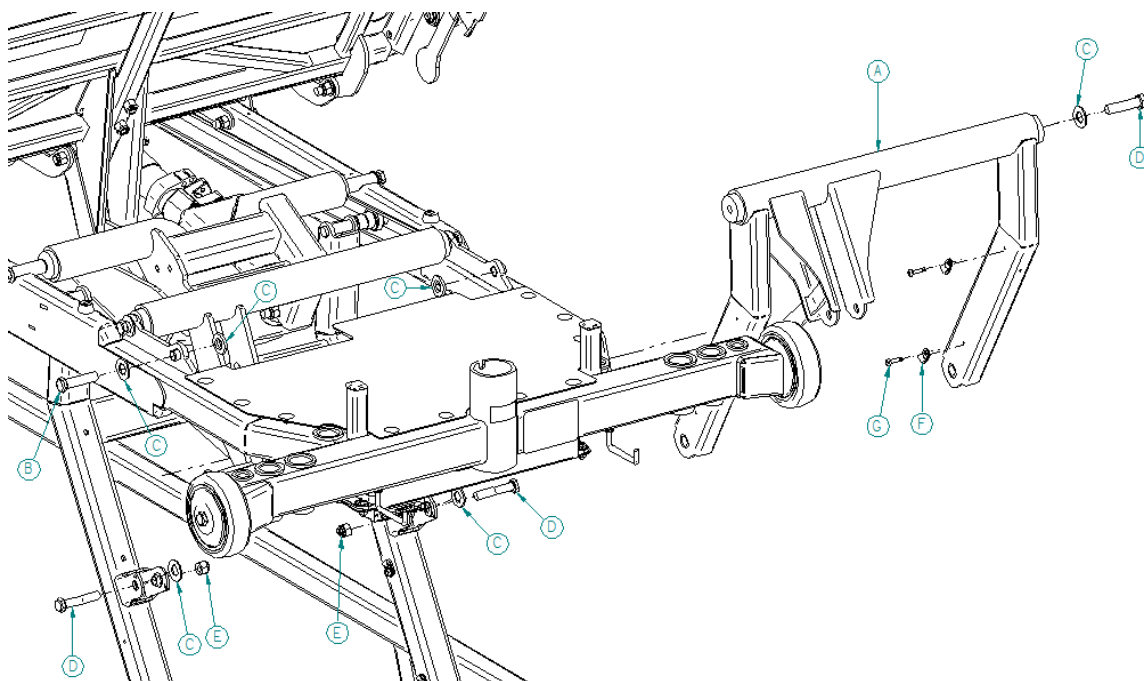

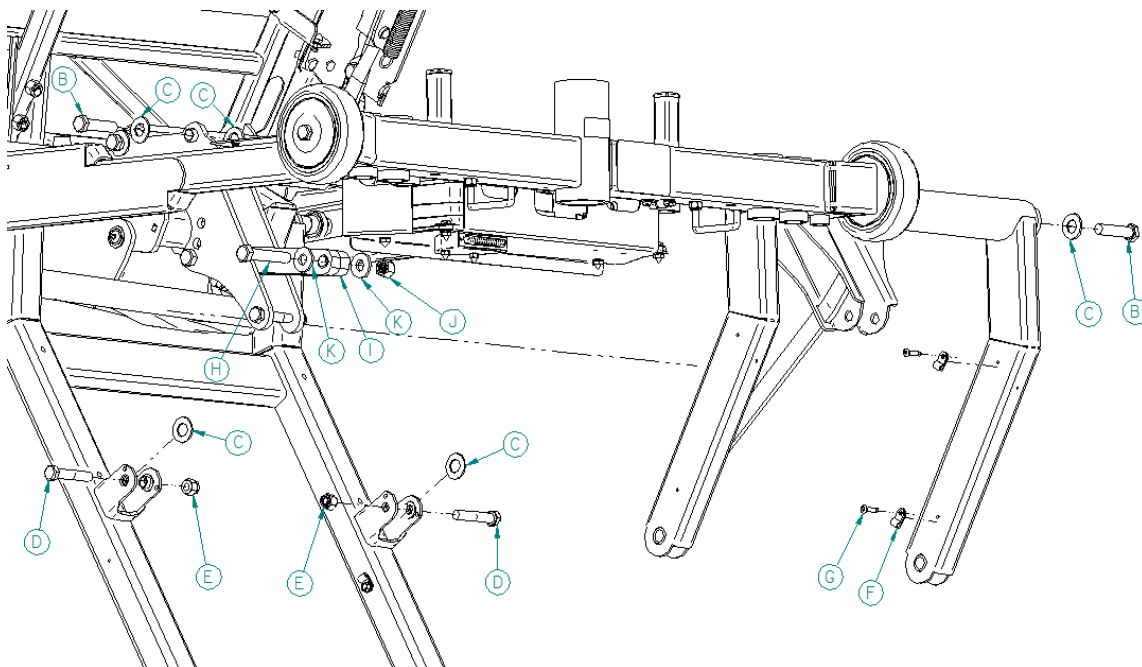

Procédure:

1. Relevez le lit à sa position la plus haute et appliquez les freins.
2. Placez les chandelles sous le châssis supérieur, puis abaissez le châssis jusqu'à ce que le mécanisme de levée commence à soulever les roulettes.



3. Soulevez la plateforme de la section du dossier.
4. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
5. Retirez les vis (G) des œillets en plastique (F) qui fixent les câbles au châssis du lit à l'aide d'un tournevis Robertson #2.
6. Maintenez le boulon (H) avec une clé mixte de 5/8", puis retirez l'écrou (J) à l'aide d'un cliquet de 3/8" et d'une douille de 11/16". Notez l'emplacement de la rondelle en nylon (K) et conservez toutes les pièces.
7. Maintenez les boulons (D) avec une clé mixte de 9/16", puis retirez les écrous (E) à l'aide d'un cliquet de 3/8" et d'une douille de 9/16". Notez l'emplacement des rondelles en nylon (K) et conservez toutes les pièces.



**AVERTISSEMENT : RETIREZ LES BOULONS AVEC PRÉCAUTION.
LA STRUCTURE DE LA BASE VA S’AFFAISER — MAINTENEZ-LE FERMEMENT.**

8. Retirez les boulons (B) qui fixent le levier du moteur de levée/descente au châssis supérieur à l’aide d’un cliquet de 3/8" et d’une douille de 5/8". Maintenez l’assemblage pendant le retrait du dernier boulon pour éviter qu’il ne tombe.
9. Notez l’emplacement des rondelles en nylon (C). Réinstallez le nouveau châssis de tête en suivant les étapes ci-dessus dans l’ordre inverse.
10. Vérifiez que le mécanisme de levée/descente fonctionne correctement avant de remettre le lit en service.

7. DESSINS TECHNIQUES

Les pages suivantes présentent les dessins techniques liés à ce modèle de lit.


ASSISTANCE TECHNIQUE ET PIÈCES

- info@rotecbeds.com
- 1-450-783-6444
- 1-450-783-6446

123 rue de l'Église, Baie-du-Febvre, QC J0G 1A0 Canada

Publication : 2026-08-25

N°	# Item	Titre	Description	Qté
1	III-000-006	RONDELLE BLOCANTE	Rondelle frein 1/2" (lock washer)	2
2	III-100-002	RONDELLE	5/16" (3/8 INT 7/8 EXT)	4
3	III-100-012	RONDELLE	RONDELLE no.8 3/16 X 7/16"	2
4	III-III-001	BOULON HEXAGONAL	Boulon 2 step 5/16-18 épaulement .375	4
5	III-133-002	RONDELLE PLATE	750"DE x .390"Dl x .062"Ep	8
6	III-133-007	BAGUE À ÉPAULEMENT	BAGUE BRONZE Ø1/2"	2
7	III-133-007COUP	BAGUE À ÉPAULEMENT	BAGUE BRONZE ID Ø 0.510"	2
8	III-133-023	BAGUE À ÉPAULEMENT	BAGUE DE NYLON Ø1/2"	2
9	III-133-028	BAGUE	BAGUE NYLON .750X.510X.375	2
10	III-322-013	BUTÉE	GARNITURE DE BORD	2
11	III-400-002	BOULON HEXAGONALE	3/8"-16 X 1" LG.	4
12	III-401-028	CELLULE DE CHARGE DE LA BASE	ASSEMBLAGE ELECTRONIQUE	2
13	III-411-015	LEVIER	LEVIER PRISE HEX 28mm(7/16)	2
14	III-411-034	ROUE	ROUE FREIN DIRECTIONNELLE ANTISTATIQUE 5 PO	1
15	III-411-035	ROUE	ROUE DIRECTIONNEL Ø 5"	1
16	III-525-043	BOULON HEX	M12 x 1.75 x 50mm LG.	2
17	III-528-006PER	VIS D'ATTACHE	3/8"-16 X 2-1/4"	2
18	III-528-006TAR	VIS D'ATTACHE	3/8"-16 X 2-1/4"	2
19	III-528-007	ÉCROU DE RACCORDEMENT	3/8"-16 X 1-3/4" LG.	2
20	III-555-041	BOULON BALANCE	TIGE HEXAGONALE 5/8"	4
21	III-777-003	ÉCROU	3/8"-16 UNC	2
22	III-777-016	ÉCROU HEX. IND. DÉFORMÉ	ÉCROU HEX. IND. 5/16-18 DÉFORMÉ	4
23	III-777-023	ÉCROU DE RETENUE	D.E. 0.750 X D.I. 0.500 X 0.025 ÉP.	2
24	III-888-010	BOULON T.R. CARRÉ	#8-32 x 3/4	2
25	III-888-020	ÉCROU NYLON	8-32	2
26	III-888-028	BOULON	BOULON "ALLEN" M6X1.0 X 10 MM"	2
27	III-901-018	RIVET	RIVET DE PLASTIQUE (SAPIN)	8
28	III-999-037	VIS RÉGLAGE	M6 X 8mm POLY LOK PATCH	2
29	AU021	BASE DE LIT SANS MOTORISATION	ASSEMBLAGE SOUDÉ	1
30	FJ004	TIGE DE FREIN RENFORCIE	ASSEMBLAGE SOUDÉ	2
31	FJ010	PIVOT DE FREIN	ASSEMBLAGE SOUDÉ	2
32	HA107	CORNE DE ROUE	ASSEMBLAGE SOUDÉ	1
33	LAZCOV017	COUVERCLE DE CORNE	PLAQUE 18 GA (0.048")	2

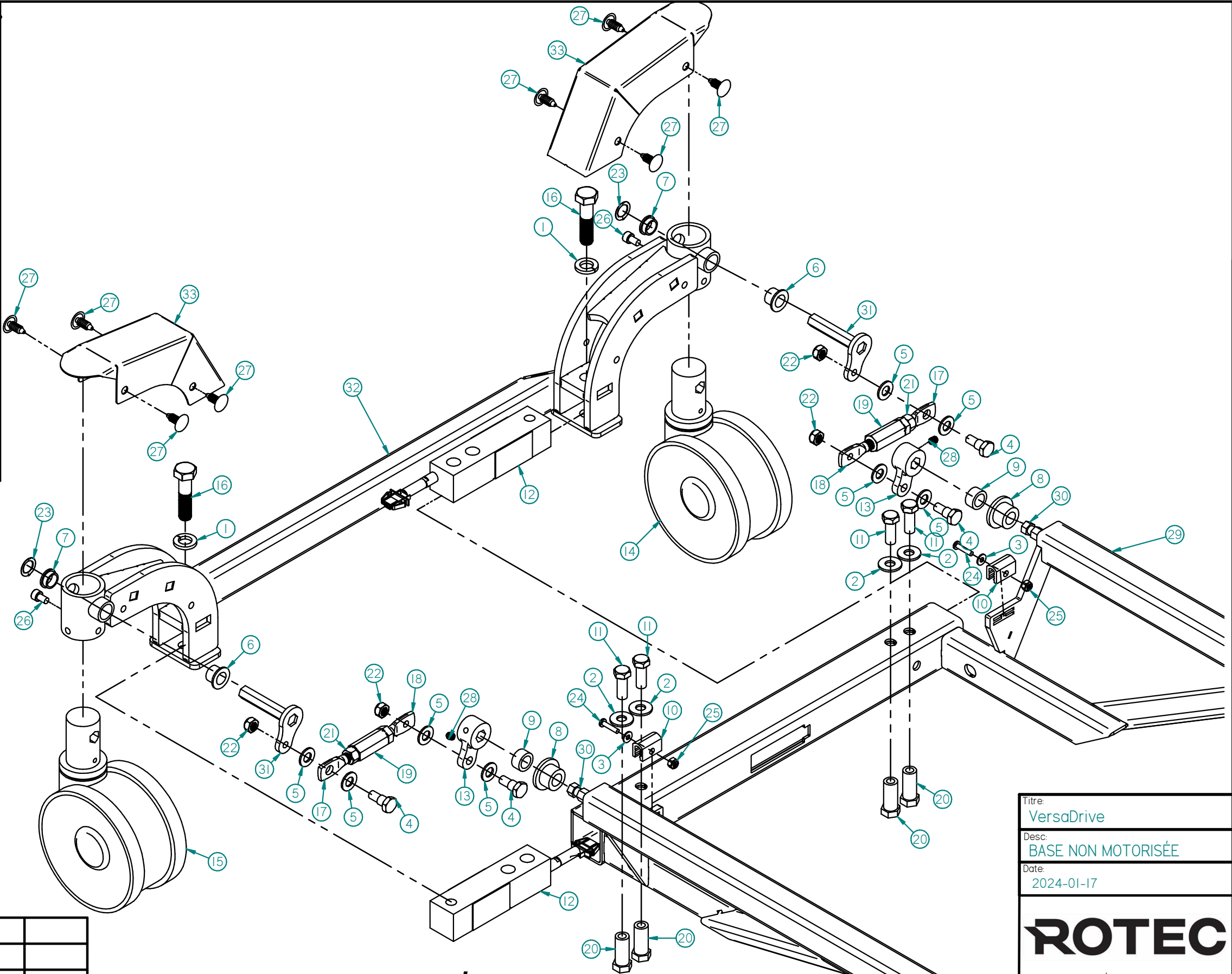

CÔTÉ TÊTE

*Conçu selon les standards de Usine Rotec inc.

REV.	DATE :	DESCRIPTION :	PRÉPARÉ PAR	VÉRIFIÉ PAR

Titre:
VersaDrive


Desc:
BASE NON MOTORISÉE

Date:
2024-01-17

ROTEC

123, rue de l'Église Baie-du-Febvre,
(Québec) J0G 1A0 CANADA
TÉLÉPHONE : 450 783-6444
SANS FRAIS : 1 800 358-6440
Email : info@rotecbeds.com

N°	#	Item	Titre	Description	Qté
1	III-000-006		RONDELLE BLOCANTE	Rondelle frein 1/2" (lock washer)	2
2	III-100-002		RONDELLE	5/16" (3/8 INT 7/8 EXT)	4
3	III-III-001		BOULON HEXAGONAL	Boulon 2 step 5/16-18 épaulement .375	4
4	III-133-002		RONDELLE PLATE	750"DE x .390"DI x .062"Ep	8
5	III-133-007		BAGUE À ÉPAULEMENT	BAGUE BRONZE Ø1/2"	2
6	III-133-007COUP		BAGUE À ÉPAULEMENT	BAGUE BRONZE ID Ø 0.510"	2
7	III-133-023		BAGUE À ÉPAULEMENT	BAGUE DE NYLON Ø1/2"	2
8	III-133-028		BAGUE	BAGUE NYLON .750X.510X.375	2
9	III-244-055		CAPUCHON BARBELÉ	7/16" LG.	2
10	III-322-013		BUTÉE	GARNITURE DE BORD	2
11	III-400-002		BOULON HEXAGONALE	3/8"-16 X 1" LG.	4
12	III-401-028		CELLULE DE CHARGE DE LA BASE	ASSEMBLAGE ELECTRONIQUE	2
13	III-411-015		LEVIER	LEVIER PRISE HEX 28mm(7/16)	2
14	III-411-034		ROUE	ROUE FREIN DIRECTIONNELLE ANTISTATIQUE 5 PO	1
15	III-411-035		ROUE	ROUE DIRECTIONNEL Ø 5"	1
16	III-525-043		BOULON HEX	M12 x 1.75 x 50mm LG.	2
17	III-526-016		BARIL	1/2" LG.	2
18	III-528-006-ASS2		RIDOIR	ASSEMBLAGE MÉCANIQUE	2
19	III-555-041		BOULON BALANCE	TIGE HEXAGONALE 5/8"	4
20	III-777-016		ECROU HEX. IND. DÉFORMÉ	ECROU HEX. IND. 5/16-18 DÉFORMÉ	4
21	III-777-023		ECROU DE RETENUE	D.E. 0.750 X D.I. 0.500 X 0.025 ÉP.	2
22	III-888-028		BOULON	BOULON "ALLEN" M6X1.0 X 10 MM"	2
23	III-901-018		RIVET	RIVET DE PLASTIQUE (SAPIN)	8
24	III-999-037		VIS RÉGLAGE	M6 X 8mm POLY LOK PATCH	2
25	AU020		BASE DE LIT	ASSEMBLAGE SOUDÉ	1
26	FJ004		TIGE DE FREIN RENFORCIE	ASSEMBLAGE SOUDÉ	2
27	FJ010		PIVOT DE FREIN	ASSEMBLAGE SOUDÉ	2
28	HA107		CORNE DE ROUE	ASSEMBLAGE SOUDÉ	1
29	LAZCOV017		COUVERCLE DE CORNE	PLAQUE 18 GA (0.048")	2

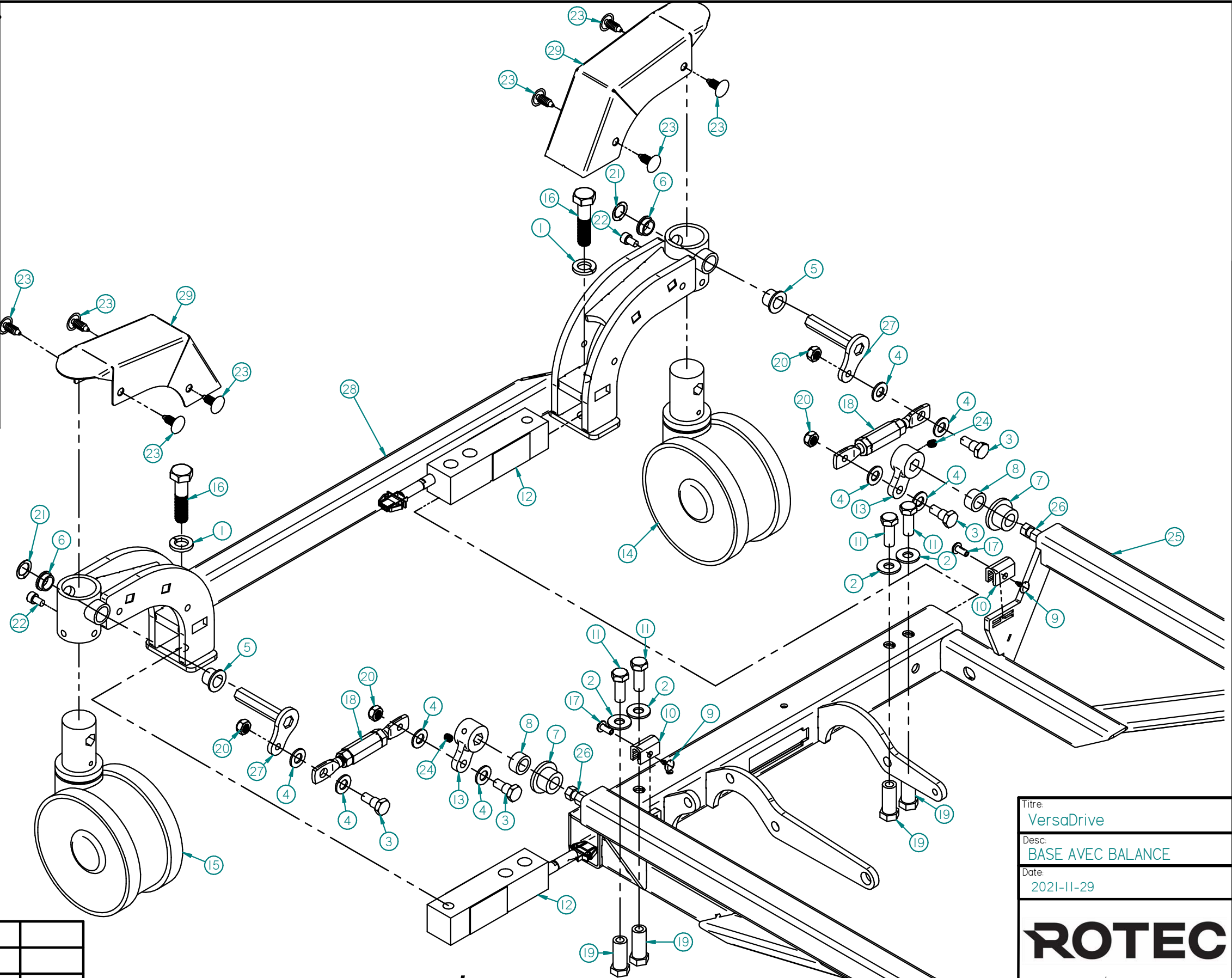

REV:	DATE :	DESCRIPTION :	PRÉPARÉ PAR	VÉRIFIÉ PAR:

CÔTÉ TÊTE

**Conçu selon les standards de Usine Rotec inc.*

Titre:
VersaDrive

Desc:
BASE AVEC BALANCE


Date:
2021-11-29

ROTEC

123, rue de l'Église Baie-du-Febvre,
(Québec) J0G 1A0 CANADA
TÉLÉPHONE : 450 783-6444
SANS FRAIS : 1 800 358-6440
Email : info@rotecbeds.com

Toute information contenue dans les dessins d'atelier et autres sources techniques est confidentielle et demeure la propriété exclusive de Usine Rotec inc. L'usage de l'information est limitée aux professionnels spécifiant les produits d'Usine Rotec inc et à leurs clients directs. Toute reproduction partielle ou totale de l'information présentée est strictement interdite sans le consentement écrit de Usine Rotec. Tous Droits Réservés - Usine Rotec inc.

N°	#	Item	Titre	Description	Qté
1	III-000-006		RONDELLE BLOCANTE	Rondelle frein 1/2" (lock washer)	2
2	III-100-002		RONDELLE	5/16" (3/8 INT 7/8 EXT)	4
3	III-III-001		BOULON HEXAGONAL	Boulon 2 step 5/16-18 épaulement .375	2
4	III-III-002		BOULON HEXAGONAL	BOULON HEX 2 STEP 5/16-18 x .250	1
5	III-III-004		BOULON HEXAGONAL	Boulon 2 step 5/16-18 épaulement .688	2
6	III-133-002		RONDELLE PLATE	750°DE x .390°DI x .062°Ep	10
7	III-133-003		RONDELLE	RONDELLE I.D. 1/2"X O.D.1" x 1/8" TH.	4
8	III-133-007		BAGUE À ÉPAULEMENT	BAGUE BRONZE Ø1/2"	4
9	III-133-007COUP		BAGUE À ÉPAULEMENT	BAGUE BRONZE ID Ø 0.510"	2
10	III-133-023		BAGUE À ÉPAULEMENT	BAGUE DE NYLON Ø1/2"	2
11	III-133-029		BAGUE	BAGUE NYLON .683X.505 X .500	1
12	III-133-046		RONDELLE	RONDELLE .750 DE. X .390 DI X .050	1
13	III-244-055		CAPUCHON BARBELÉ	7/16" LG.	2
14	III-322-013		BUTÉE	GARNITURE DE BORD	2
15	III-400-002		BOULON HEXAGONALE	3/8"-16 X 1" LG.	4
16	III-401-028		CELLULE DE CHARGE DE LA BASE	ASSEMBLAGE ELECTRONIQUE	2
17	III-411-015		LEVIER	LEVIER PRISE HEX 28mm(7/16)	2
18	III-411-026-ASS		PÉDALE DE FREIN ASSEMBLÉ	PRÉ-ASSEMBLAGE	1
19	III-411-035		ROUE	ROUE DIRECTIONNEL Ø 5"	2
20	III-525-043		BOULON HEX	M12 x 1.75 x 50mm LG.	2
21	III-526-016		BARIL	1/2" LG.	2
22	III-528-006-ASS2		RIDOIR	ASSEMBLAGE MÉCANIQUE	2
23	III-555-041		BOULON BALANCE	TIGE HEXAGONALE 5/8"	4
24	III-777-016		ECROU HEX. IND. DÉFORMÉ	ECROU HEX. IND. 5/16-18 DÉFORMÉ	4
25	III-777-023		ECROU DE RETENUE	DE. 0.750 X DI. 0.500 X 0.025 ÉP.	2
26	III-888-028		BOULON	BOULON "ALLEN" M6X1.0 X 10 MM"	2
27	III-901-018		RIVET	RIVET DE PLASTIQUE (SAPIN)	8
28	III-999-037		VIS RÉGLAGE	M6 X 8mm POLY LOK PATCH	2
29	FJ009		PIVOT DE FREIN	ASSEMBLAGE SOUDÉ	1
30	FJ010		PIVOT DE FREIN	ASSEMBLAGE SOUDÉ	2
31	HA107		CORNE DE ROUE	ASSEMBLAGE SOUDÉ	1
32	LAZCOV017		COUVERCLE DE CORNE	PLAQUE 18 GA (0.048")	2
33	LAZLEV003		BRAS LEVIER FTP	MTL DE BASE # LAZLEV003	1

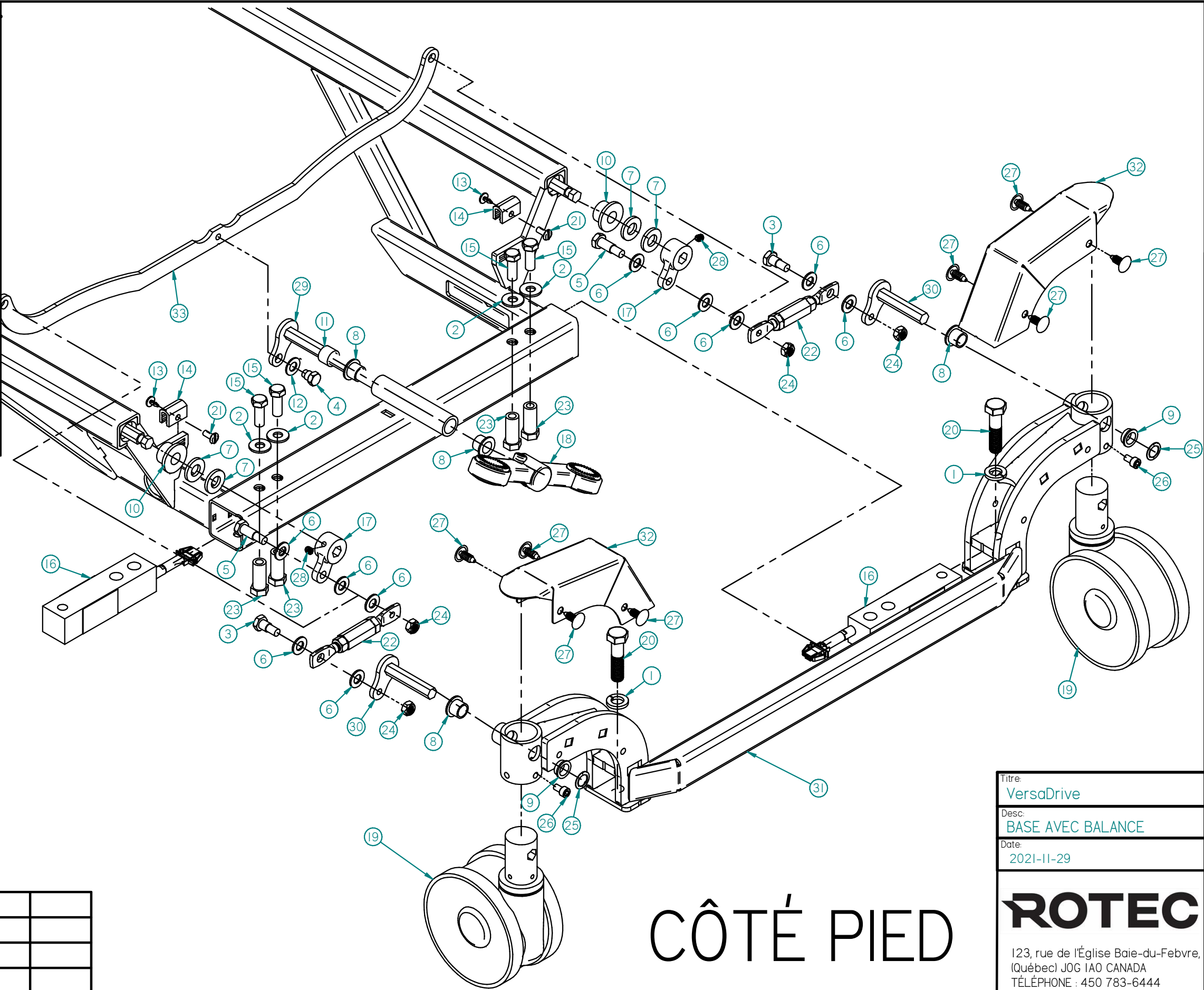

REV:	DATE :	DESCRIPTION :	PRÉPARÉ PAR	VÉRIFIÉ PAR

CÔTÉ PIED

**Conçu selon les standards de Usine Rotec inc.*

Titre:
VersaDrive


Desc:
BASE AVEC BALANCE

Date:
2021-11-29

ROTEC

123, rue de l'Église Baie-du-Febvre,
(Québec) J0G 1A0 CANADA
TÉLÉPHONE : 450 783-6444
SANS FRAIS : 1 800 358-6440
Email : info@rotecbeds.com

N°	#	Item	Titre	Description	Qté
1	III-133-002		RONDELLE PLATE	750"DE x .390"DI x .062"Ep	4
2	III-133-009		BAGUE À ÉPAULEMENT	3/8"DI x 1/2"DE x 1/4"Lg	2
3	III-322-011		BUTOIR	BARRE RONDE Ø15/16" X 5/8" LG.	2
4	III-400-004		BOULON HEXAGONALE	3/8"-16 X 2 1/4" LG.	1
5	III-400-007		BOULON HEXAGONALE	3/8"-16 X 3 1/4" LG. gr. 5	2
6	III-400-011		BOULON HEXAGONAL	3/8"-16 X 2 1/2" LG.	3
7	III-411-055		ROULETTE PARE CHOC	DE100mm X DI. 12mm	2
8	III-526-003		CAPUCHON	CAPUCHON 3/4 x 3/4 x 16-18GA	2
9	III-526-011		ÉCROU D'INSERTION	ÉCROU D'ANCRAGE 3/8"-16	2
10	III-655-041		BARRURE	BARRURE POUR CABLE MINI-FIT	1
11	III-666-012		VIS AUTOPERÇANTE	VIS METAL TÊTE FRAISER #8 X 3/4"	2
12	III-888-003		ÉCROU HEX. NYLON IND.	3/8"-16 UNC	2
13	III-901-064		DOUILLE	DOUILLE TÊTE-PIED Ø 0.910" X 2" LG.	2
14	III-901-065		DOUILLE	DOUILLE TÊTE-PIED Ø0.910" X 2-1/2" L.	2
15	III-901-066		DOUILLE	DOUILLE PORTE-SOLUTÉ Ø 3/4 X 2" LG.	2
16	III-901-067		DOUILLE	DOUILLE PORTE-SOLUTÉ Ø 1.031 X 2-1/2" LG.	2
17	III-901-082		DOUILLE ÉPAULEMENT CARRÉ	MOULAGE PAR INJECTION	1
18	300-903-042		MOTEUR	MOTEUR CPR LINAK 10KN	1
19	AS001-ASS		BRAS CPR	ASSEMBLAGE MÉCANIQUE	1
20	BD014		CHÂSSIS SUPÉRIEUR	ASSEMBLAGE SOUDÉ	1

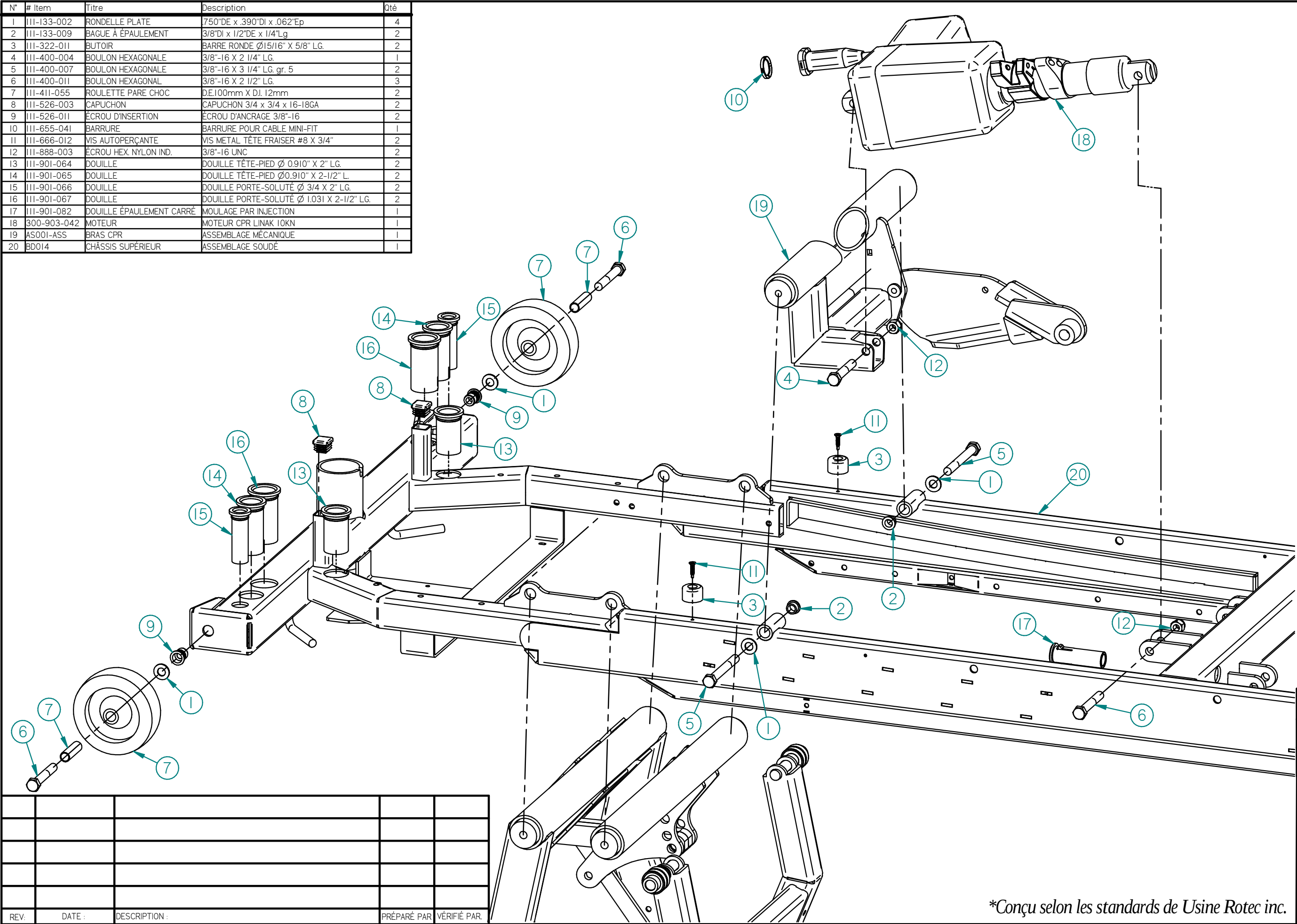

Titre:

VersaDrive

Desc:

HI-LO TÊTE

Date:


2021-11-30

ROTEC

123, rue de l'Église Baie-du-Febvre,
(Québec) J0G 1A0 CANADA
TÉLÉPHONE : 450 783-6444
SANS FRAIS : 1 800 358-6440
Email : info@rotecbeds.com

*Conçu selon les standards de Usine Rotec inc.

N°	# Item	Titre	Description	Qté	N°	# Item	Titre	Description	Qté
1	III-133-003	RONDELLE	RONDELLE ID. 1/2"X O.D.1" x 1/8" TH.	2	11	III-525-030F	BOULON HEXAGONAL PLAQUÉ ZINC	BOULON COUPÉ À 2-3/8"	1
2	III-133-025	RONDELLE	RONDELLE NYLON 0.560x1.000x0.125	4	12	III-526-018	ÉCROU DEFORMÉ	3/8"-16 UNC	2
3	III-133-028	BAGUE	BAGUE NYLON .750X.510X.375	2	13	III-655-041	BARRURE	BARRURE POUR CABLE MINI-FIT	1
4	III-133-030	BAGUE À ÉPAULEMENT	BAGUE .190x.238x.210 - .350x.040 FL.	8	14	III-655-060	SUPPORT DE MONTAGE	FIXATION POUR CIRCUIT	2
5	III-133-031	BAGUE	BAGUE .220x.266x.500	4	15	III-666-011	VIS TEK RUSPRO PAN CARRÉ	# 10-16 X 3/4" LG.	2
6	III-133-039	RONDELLE	RONDELLE NYLON 0.550 x1.030 x 0.062	4	16	III-666-012	VIS AUTOPERÇANTE	VIS METAL TÊTE FRAISER #8 X 3/4"	6
7	III-133-047	RONDELLE	RONDELLE NYLON 0.563x1.024x0.220	4	17	III-888-003	ÉCROU HEX. NYLON IND.	3/8"-16 UNC	2
8	III-400-010	BOULON HEXAGONAL	3/8"-16 X 1 3/4" LG.	2	18	III-888-005B	ÉCROU HEXAGONAL NYLON	7/16"-14	1
9	III-400-011	BOULON HEXAGONAL	3/8"-16 X 2 1/2" LG.	4	19	300-903-036	MOTEUR ÉLEVATION	POUSSÉ 10 000 N TIRÉ 4 000 N	1
10	III-525-030D	BOULON HEXAGONAL	BOULON HEX 7/16-14 x 2" GRADE 8	4	20	AT009	PIVOT DE TRANSMISSION	ASSEMBLAGE SOUDÉ	1
					21	B678	SUPPORT QLCI	TUBE 2" X 1" X 0.065" ÉP.	1
					22	FQ006-ASS	HI-LO SUPÉRIEUR	ASSEMBLAGE MÉCANIQUE	1
					23	W032-ASS	HI-LO INFÉRIEUR	ASSEMBLAGE MÉCANIQUE	1

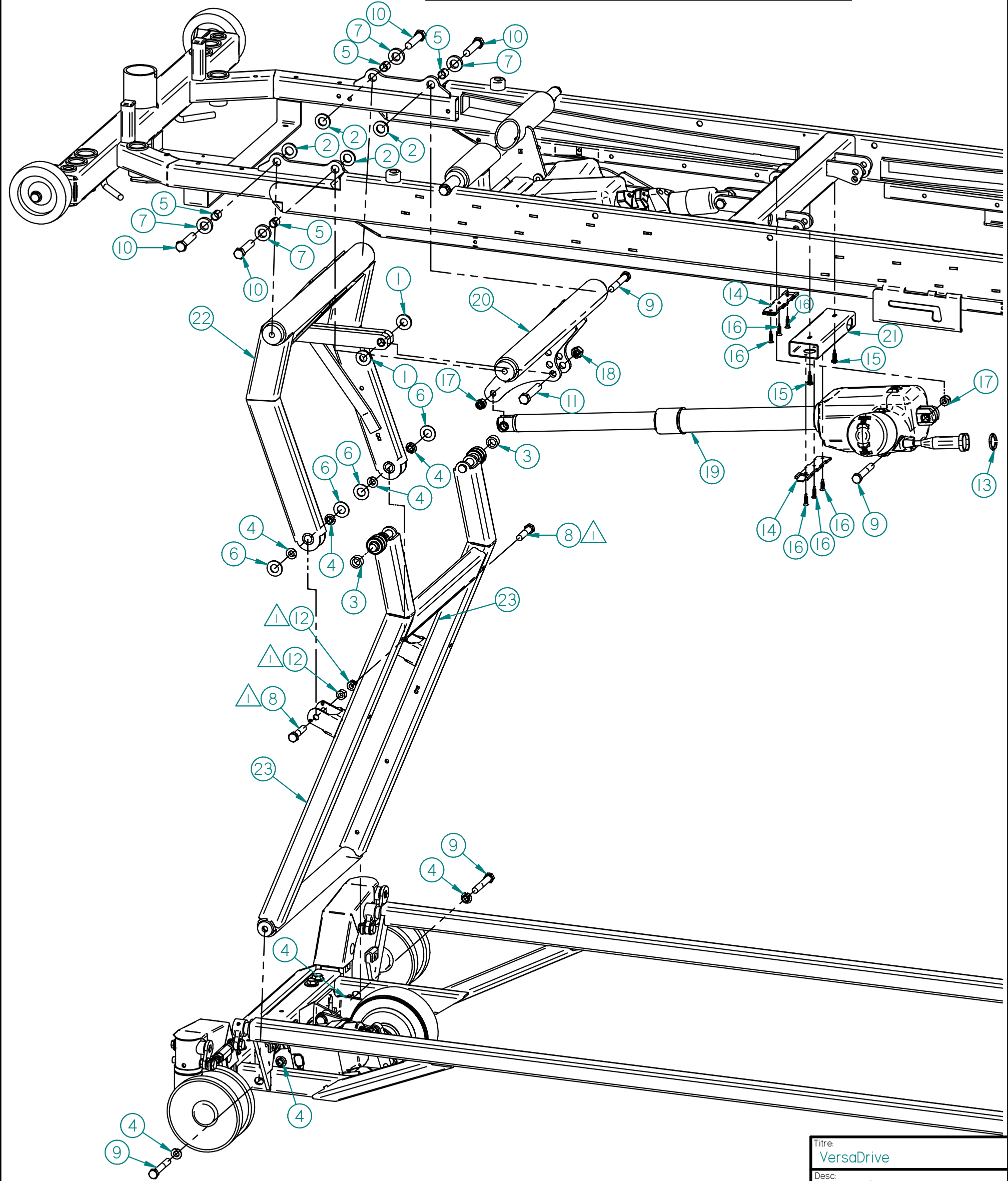

	2025-06-11	ENLEVER 2X III-400-008, 2X III-888-003 REMPLACER PAR 2X III-400-010 ET 2X III-526-018	A.ROY	K.P.
REV.	DATE :	DESCRIPTION :	PRÉPARÉ PAR	VÉRIFIÉ PAR.

*Conçu selon les standards de Usine Rotec inc.

Titre:
VersaDrive


Desc:
HI-LO TÊTE

Date:
2021-11-29



123, rue de l'Église Baie-du-Febvre,
(Québec) J0G 1A0 CANADA
TÉLÉPHONE : 450 783-6444
SANS FRAIS : 1 800 358-6440
Email : info@rotecbeds.com

N°	# Item	Titre	Description	Qté
1	III-133-002	RONDELLE PLATE	750"DE x .390"Dl x .062"Ep	4
2	III-133-009	BAGUE À ÉPAULEMENT	3/8"Dl x 1/2"DE x 1/4"Lg	2
3	III-322-010	BUTOIR	BUTOIR Ø15/16" X 5/8"	2
4	III-400-007	BOULON HEXAGONALE	3/8"-16 X 3 1/4" LG. gr. 5	2
5	III-400-008	BOULON	Boulon hex 3/8-16 X 2	1
6	III-400-011	BOULON HEXAGONAL	3/8"-16 X 2 1/2" LG.	1
7	III-655-041	BARRURE	BARRURE POUR CABLE MINI-FIT	1
8	III-666-012	VIS AUTOPERÇANTE	VIS METAL. TÊTE FRAISER #8 X 3/4"	2
9	III-888-003	ÉCROU HEX. NYLON IND.	3/8"-16 UNC	2
10	300-903-025	MOTEUR	MOTEUR PIED LINAK # LA31-U723-00	1
11	GSGT001-ASS	ASSEMBLAGE PIVOT DE TRANSMISSION	ASSEMBLAGE MÉCANIQUE	1

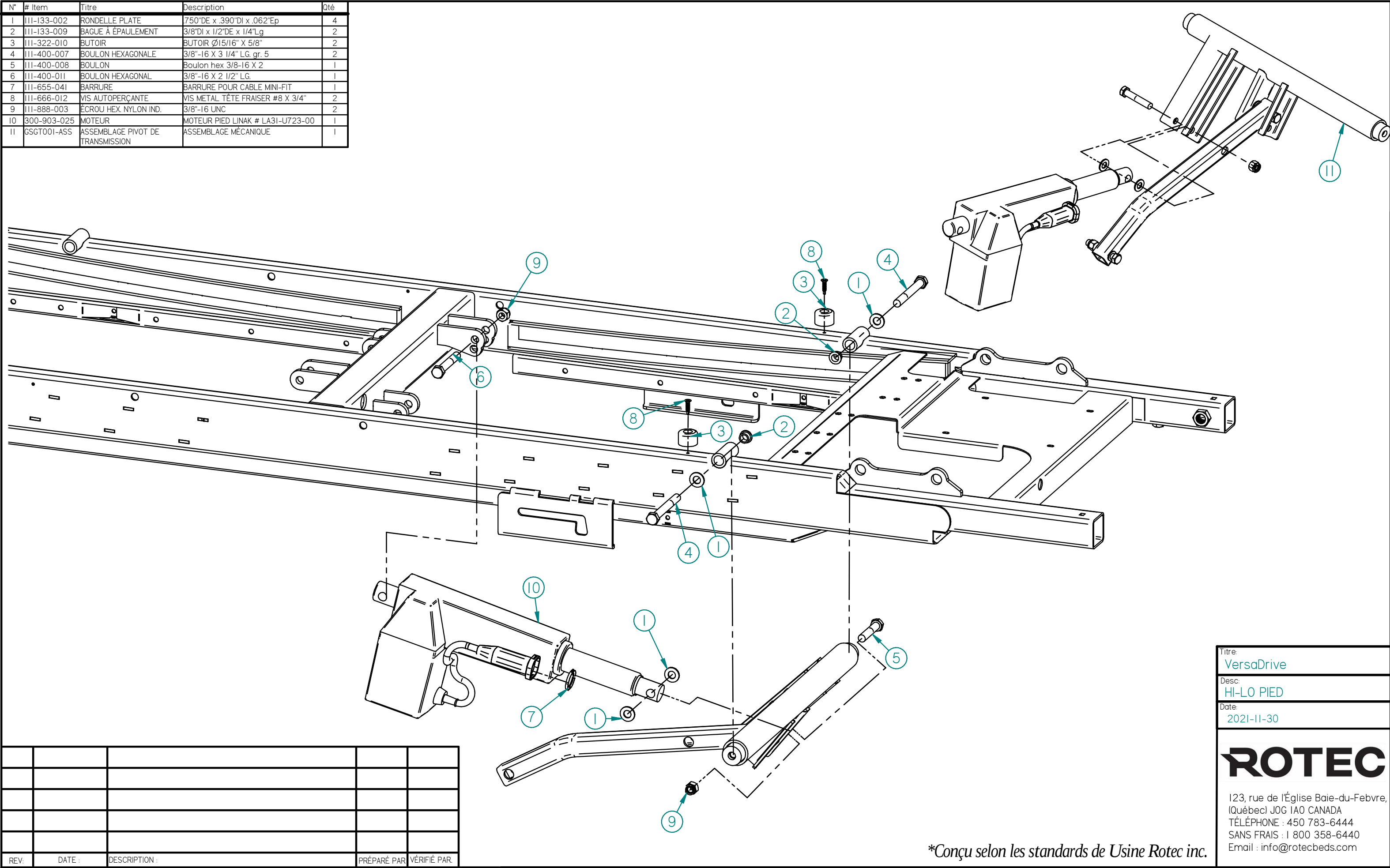

Titre:

VersaDrive

Desc:

HI-LO PIED

Date:


2021-11-30

ROTEC

123, rue de l'Église Baie-du-Febvre,
(Québec) J0G 1A0 CANADA
TÉLÉPHONE : 450 783-6444
SANS FRAIS : 1 800 358-6440
Email : info@rotecbeds.com

*Conçu selon les standards de Usine Rotec inc.

N°	# Item	Titre	Description	Qté	N°	# Item	Titre	Description	Qté
1	III-133-003	RONDELLE	RONDELLE I.D. 1/2" X O.D.1" x 1/8" TH.	2	12	III-525-030F	BOULON HEXAGONAL PLAQUÉ ZINC	BOULON COUPÉ À 2-3/8"	1
2	III-133-025	RONDELLE	RONDELLE NYLON 0.560x1.000x0.125	4	13	III-526-018	ÉCROU DEFORMÉ	3/8"-16 UNC	2
3	III-133-028	BAGUE	BAGUE NYLON .750X.510X.375	2	14	III-555-044	BAGUE AVEC BRIDE	BARRE RONDE Ø5/8"	2
4	III-133-030	BAGUE À ÉPAULEMENT	BAGUE .190x.238x.210 - .350x.040 FL.	4	15	III-655-041	BARRURE	BARRURE POUR CABLE MINI-FIT	1
5	III-133-031	BAGUE	BAGUE .220x.266x.500	4	16	III-888-003	ÉCROU HEX. NYLON IND.	3/8"-16 UNC	2
6	III-133-039	RONDELLE	RONDELLE NYLON 0.550 x1.030 x 0.062	4	17	III-888-005B	ÉCROU HEXAGONAL NYLON	7/16"-14	1
7	III-133-047	RONDELLE	RONDELLE NYLON 0.563x1.024x0.220	4	18	300-903-036	MOTEUR ÉLEVATION	POUSSÉ 10 000 N TIRÉ 4 000 N	1
8	III-400-010	BOULON HEXAGONAL	3/8"-16 X 1 3/4" LG.	4	19	AT009	PIVOT DE TRANSMISSION	ASSEMBLAGE SOUDÉ	1
9	III-400-011	BOULON HEXAGONAL	3/8"-16 X 2 1/2" LG.	2	20	FQ006-ASS	HI-LO SUPÉRIEUR	ASSEMBLAGE MÉCANIQUE	1
10	III-411-050	ROULEMENT À BILLE	Ø INT. 1/2" X Ø EXT. 1-1/8"	2	21	W032-ASS	HI-LO INFÉRIEUR	ASSEMBLAGE MÉCANIQUE	1
11	III-525-030D	BOULON HEXAGONAL	BOULON HEX 7/16-14 x 2" GRADE 8	4					

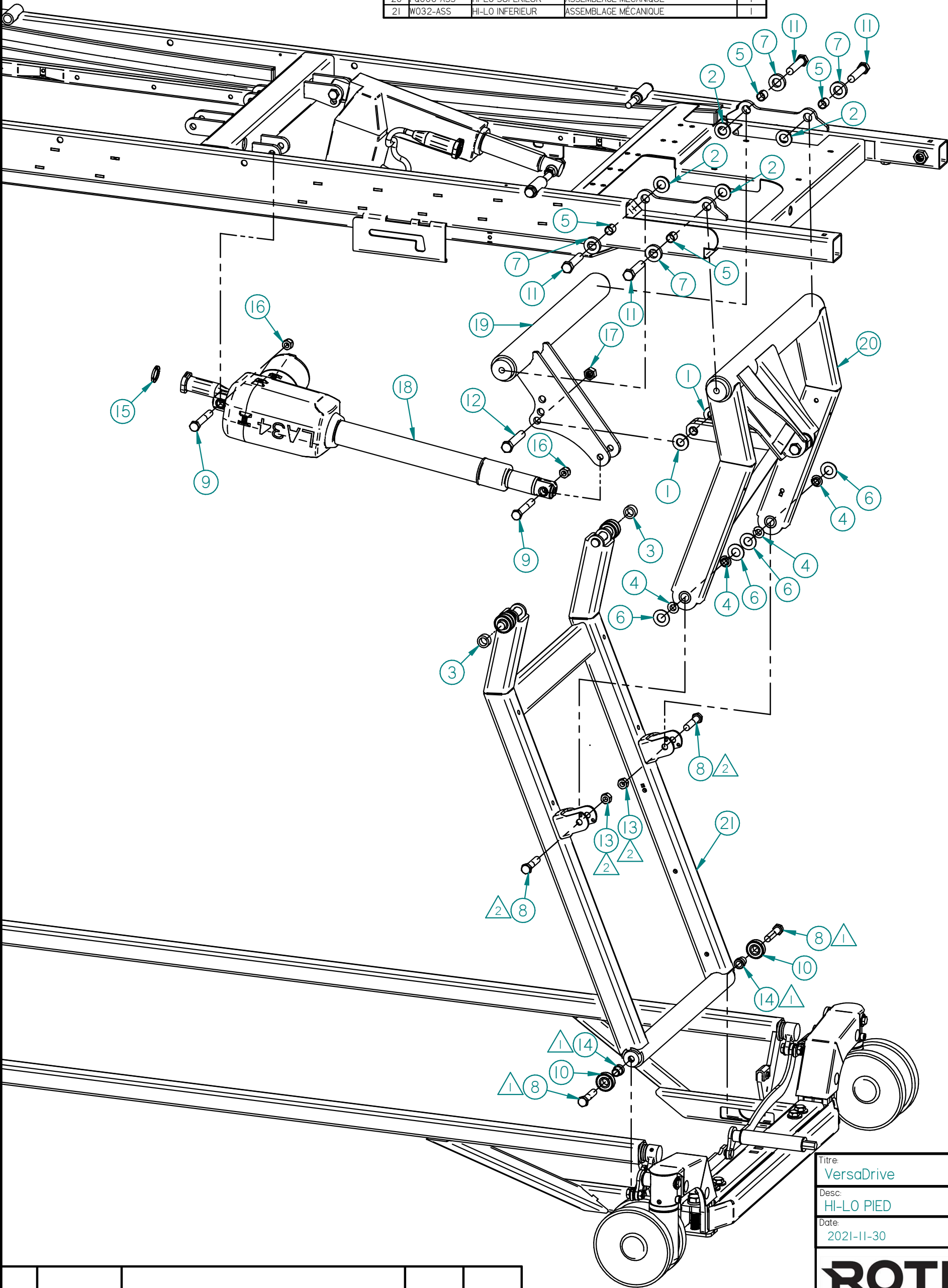

Titre:
VersaDrive

Desc:
HI-LO PIED

Date:
2021-11-30

ROTEC

123, rue de l'Église Baie-du-Febvre,
(Québec) J0G 1A0 CANADA
TÉLÉPHONE : 450 783-6444
SANS FRAIS : 1 800 358-6440
Email : info@rotecbeds.com

2	2025-06-11	ENLEVER 2X III-400-008, 2X III-888-003 REMPLACER PAR 2X III-400-010 ET 2X III-526-018	AROY	K.P.
1	2025-02-12	ENLEVER 2X III-133-009, REMPLACER 2X LAZWAS004 PAR 2X III-555-044 REMPLACER 2X III-400-008 PAR 2X III-400-010	AROY	K.P.
REV.	DATE :	DESCRIPTION :	PRÉPARÉ PAR	VÉRIFIÉ PAR.


*Conçu selon les standards de Usine Rotec inc.

The diagram shows an exploded view of a mechanical assembly. The main body is a rectangular frame with various components attached. A large cylindrical component is mounted on the side. A motor assembly is shown at the bottom right, connected to a control box. The parts list table is as follows:

N°	# Item	Titre	Description	Qté	N°	# Item	Titre
26	GZ00146-ST	CÂBLE MOTEUR MODIFIER 850mm	ASSEMBLAGE ELECTRONIQUE	1	1	III-000-026	RONDELLE FREIN
27	GZ00149-ST	DB37 VERSADRIVE	ASSEMBLAGE ELECTRONIQUE	1	2	III-000-036	RONDELLE
28		BOITIER SANS CONTRÔLE	ASSEMBLAGE MÉCANIQUE	1	3	III-000-073	RESSORT COMPRESION
					4	III-244-031	BOUCHON
					5	III-244-047	CAPUCHON
					6	III-244-054	SAPIN POUR COLL
					7	III-423-010	RECouvreMENT
					8	III-488-006	COLLIER POUR CÂ
					9	III-525-069	VIS À FILETER PO
					10	III-525-070	VIS TÊTE RONDE
					11	III-655-058	CÂBLE BATTERIE/
					12	III-666-008	VIS TÊTE RONDE
					13	III-777-012	ÉCROU HEXAGONA
					14	III-777-013	ÉCROU BORGNE
					15	III-888-016	BOULON À TÊTE R
					16	III-888-017	VIS
					17	III-901-018	RIVET
					18	III-901-099	ESPACEUR DB37
					19	III-901-100	PASSE FIL
					20	401-500-036	BOITE DE CONTRÔ
					21	401-500-037	BA21
					22	555-200-008	GAINÉ THERMOMET
					23	555-644-011	CÂBLE MJB
					24	GZ00144-ST	CÂBLE MOTEUR M
					25	GZ00145-ST	CÂBLE MOTEUR M

Titre: VersaDrive	
Desc: Avec Prise	
Date: 2021-12-01	
 123, rue de l'Église Baie-du-Febvre, (Québec) JOG 1A0 CANADA TÉLÉPHONE : 450 783-6444 SANS FRAIS : 1 800 358-6440 Email : info@rotecbeds.com	

*Conçu selon les standards de Usine Rotec inc.

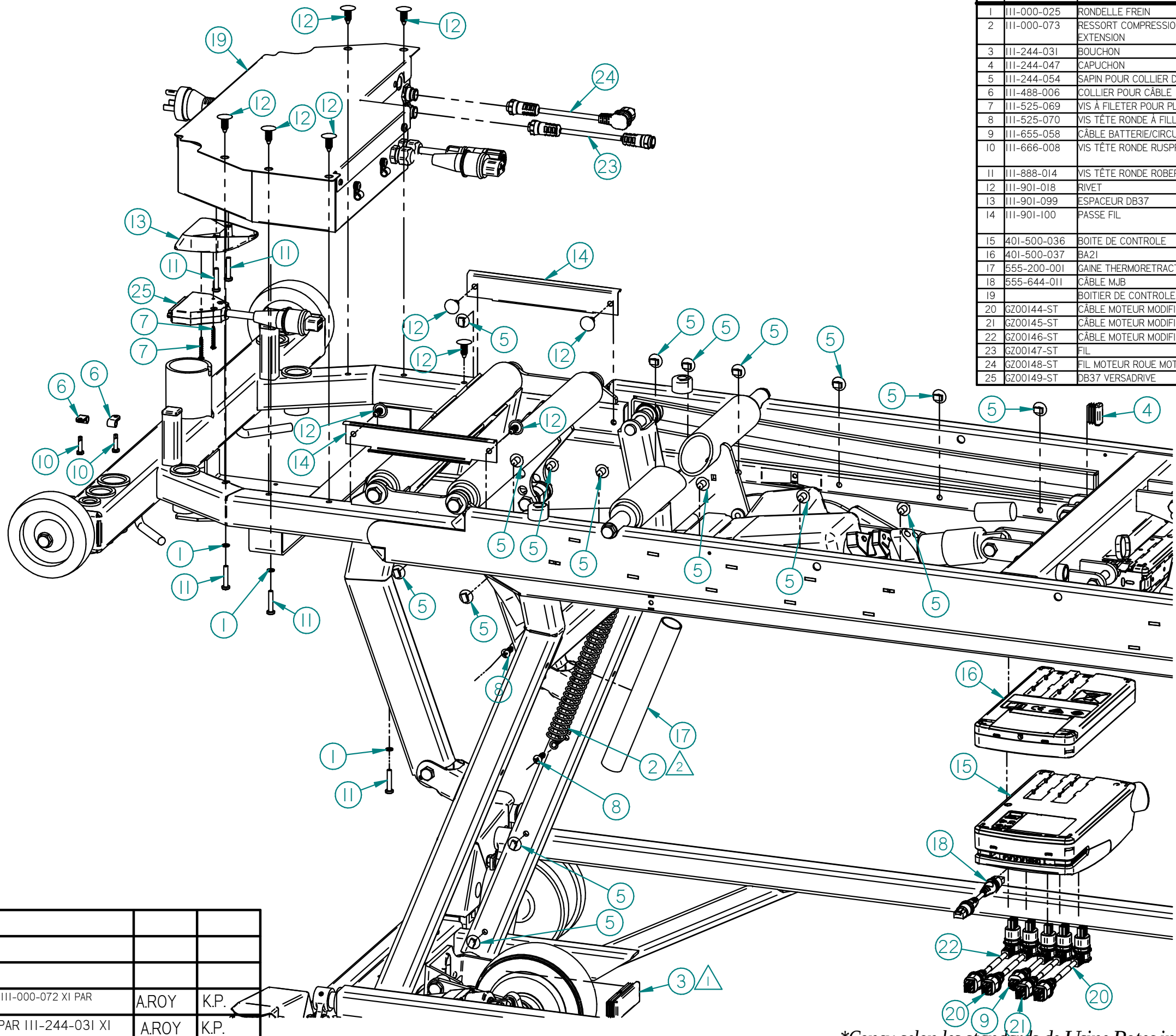

N°	# Item	Titre	Description	Qté
1	111-000-025	RONDELLE FREIN	# 10 PLAQUÉ ZINC	3
2	111-000-073	RESSORT COMPRESSION ET EXTENSION	D.E. 7/8" x 10 5/8" L.G. x 0.080" JAUGE 3 SPIRAL PAR POUCE	1
3	111-244-031	BOUCHON	3" X 1" X 14-20GA	1
4	111-244-047	CAPUCHON	1" X 1/2" X 16-18 ga	1
5	111-244-054	SAPIN POUR COLLIER DE SERRAGE	Ø 1/4"	17
6	111-488-006	COLLIER POUR CÂBLE	Ø 1/4"	2
7	111-525-069	VIS À FILETER POUR PLASTIQUE	# 6 X 1" L.G.	2
8	111-525-070	VIS TÊTE RONDE À FILLETAGE	1/2-24 X 3/4" L.G.	2
9	111-655-058	CÂBLE BATTERIE/CIRCUIT	190MM	1
10	111-666-008	VIS TÊTE RONDE RUSPRO	VIS TEK RUSPRO PAN CARRÉ #8-18 x 3/4	2
11	111-888-014	VIS TÊTE RONDE ROBERTSON	10/32 X 1" L.G.	5
12	111-901-018	RIVET	RIVET DE PLASTIQUE ISAPINI	10
13	111-901-099	ESPACEUR DB37	MOULAGE PAR INJECTION	1
14	111-901-100	PASSE FIL	HAUTEUR 7/16" X LARGEUR 1-5/16"	2
15	401-500-036	BOITE DE CONTROLE	C071	1
16	401-500-037	BA21	BATTERIE	1
17	555-200-001	GAINÉ THERMORETRACTABLE	Ø 1" x 10" L.G.	1
18	555-644-011	CÂBLE MJB	800mm	1
19		BOITIER DE CONTROLE	ASSEMBLAGE BOITIER	1
20	GZ00144-ST	CÂBLE MOTEUR MODIFIÉ 450mm	ASSEMBLAGE ELECTRONIQUE	2
21	GZ00145-ST	CÂBLE MOTEUR MODIFIÉ 575mm	ASSEMBLAGE ELECTRONIQUE	1
22	GZ00146-ST	CÂBLE MOTEUR MODIFIER 850mm	ASSEMBLAGE ELECTRONIQUE	1
23	GZ00147-ST	FIL	ASSEMBLAGE ELECTRONIQUE	1
24	GZ00148-ST	FIL MOTEUR ROUE MOTORISÉ	ASSEMBLAGE ELECTRONIQUE	1
25	GZ00149-ST	DB37 VERSADRIE	ASSEMBLAGE ELECTRONIQUE	1

2	2023-12-07	ENLEVER 2X LAZCEN033, REMPLACER 111-000-072 XI PAR 111-000-073 XI	A.ROY	K.P.
1	2023-03-15	REEMPLACER 111-244-029 XI PAR 111-244-031 XI	A.ROY	K.P.
REV:	DATE :	DESCRIPTION :	PRÉPARÉ PAR	VÉRIFIÉ PAR.

*Conçu selon les standards de Usine Rotec inc.

Titre:
VersaDrive

Desc:
Avec Prise et Drive


Date:
2021-12-01

ROTEC

123, rue de l'Église Baie-du-Febvre,
(Québec) J0G 1A0 CANADA
TÉLÉPHONE : 450 783-6444
SANS FRAIS : 1 800 358-6440
Email : info@rotecbeds.com

REV.	DATE :	DESCRIPTION :	PRÉPARÉ PAR	VÉRIFIÉ PAR

N°	# Item	Titre	Description	Qté
1	III-000-002	RONDELLE FREIN	RONDELLE FREIN 5/16"	2
2	III-000-073	RESSORT COMPRESSION ET EXTENSION	D.E. 7/8" x 10 5/8" LG. x 0.080" JAUGE 3 SPIRAL PAR POUCE	1
3	III-244-025	CABLE	CABLE 11-5/8" LG. ASSEMBLÉ	1
4	III-244-031	BOUCHON	3" X 1" X 14-20GA	1
5	III-244-047	CAPUCHON	1" X 1/2" X 16-18 ga	1
6	III-244-054	SAPIN POUR COLLIER DE SERRAGE	Ø 1/4"	17
7	III-300-007	BOULON HEXAGONAL	Boulon hex 5/16-18 x 1/2	1
8	III-400-618	CIRCUIT QLCI2	BOITE DE CONTROLE CA30	1
9	III-525-070	VIS TÊTE RONDE À FILLETAGE	1/2-24 X 3/4" LG.	2
10	III-999-042	VIS AUTOPERCEUSE	PAN CARRÉ #10-16 x 5/8	1
11	555-200-008	GAINE THERMORETRACTABLE	Ø 1" x 10" LG.	1
12	FST1006	PLONGEUR	PISTON RESSORT 5/16"	2
13	GZ00124	EXTENSION DE TOP SANS PRISE	ASSEMBLAGE MÉCANIQUE	1
14	GZ00142-ST	CABLAGE DE CTRL VERS L'EXTENSION	ASSEMBLAGE ÉLECTRONIQUE	1
15	GZ00143-ST	CABLE MONTÉ CELLULE/QLCI2	ASSEMBLAGE ÉLECTRONIQUE	4

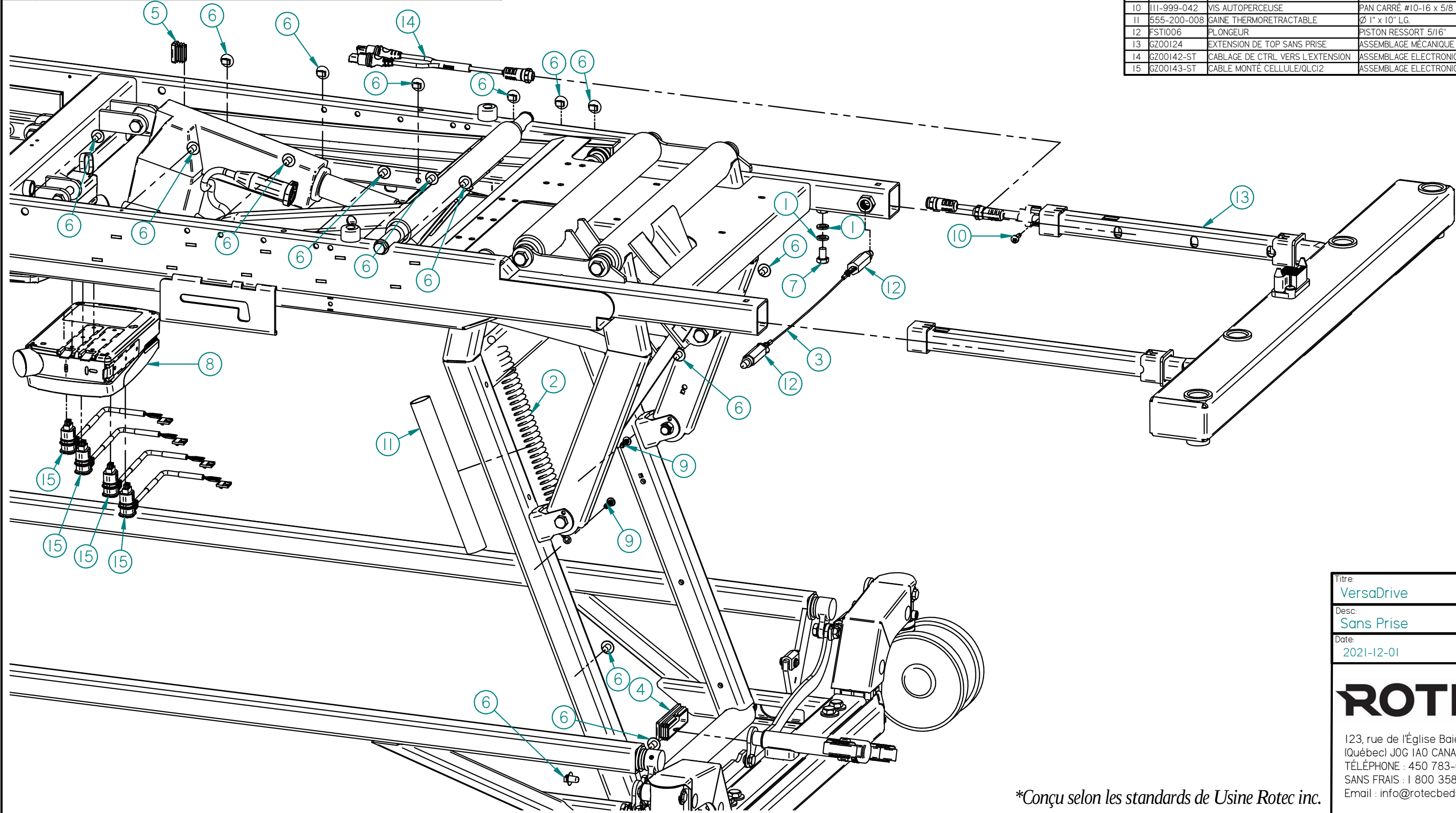

Titre:	VersaDrive
Desc:	Sans Prise
Date:	2021-12-01


ROTEC

123, rue de l'Église Baie-du-Febvre,
(Québec) J0G 1A0 CANADA
TÉLÉPHONE : 450 783-6444
SANS FRAIS : 1 800 358-6440
Email : info@rotecbeds.com

**Conçu selon les standards de Usine Rotec inc.*

REV.	DATE :	DESCRIPTION :	PRÉPARÉ PAR	VÉRIFIÉ PAR
1	2023-03-15	REEMPLACER III-244-029 XI PAR III-244-031 XI	A.ROY	K.P.
2	2023-12-07	ENLEVER 2X LAZCEN033, REMPLACER III-000-072 XI PAR III-000-073 XI, AJOUTER IX III-000-002	A.ROY	K.P.

N°	# Item	Titre	Description	Qté
1	III-000-002	RONDELLE FREIN	RONDELLE FREIN 5/16"	2
2	III-000-025	RONDELLE FREIN	# 10 PLAQUÉ ZINC	4
3	III-000-073	RESSORT COMPRESSION ET EXTENSION	D.E. 7/8" x 10 5/8" LG. x 0.080" JAUGE 3 SPIRAL PAR POUCE	1
4	III-244-025-ASS	CÂBLE PLATEFORME	CÂBLE ASSEMBLÉ	1
5	III-244-031	BOUCHON	3" X 1" X 14-20GA	1
6	III-244-047	CAPUCHON	1" X 1/2" X 16-18 ga	1
7	III-244-054	SAPIN POUR COLLIER DE SERRAGE	Ø 1/4"	17
8	III-300-001	BOULON	Boulon hex 5/16-18 x 3/4" LG.	1
9	III-400-618	CIRCUIT QLCI2	BOITE DE CONTROLE CA30	1
10	III-525-070	VIS TÊTE RONDE À FILLETAGE	12-24 X 3/4" LG.	2
11	III-666-012	VIS AUTOPERÇANTE	VIS METAL TÊTE FRAISER #8 X 3/4"	2
12	III-888-014	VIS TÊTE RONDE ROBERTSON	10/32 X 1" LG.	4
13	555-200-001	GAINÉ THERMORETRACTABLE	Ø 1" x 10" LG.	1
14		EXTENSION DE TOP	ASSEMBLAGE MÉCANIQUE	1
15		BOITIER TRANSFORMATEUR	ASSEMBLAGE BOITIER	1
16	GZ00142-ST	CABLAGE DE CTRL VERS L'EXTENSION	ASSEMBLAGE ELECTRONIQUE	1
17	GZ00143-ST	CABLE MONTÉ CELLULE/QLCI2	ASSEMBLAGE ELECTRONIQUE	4

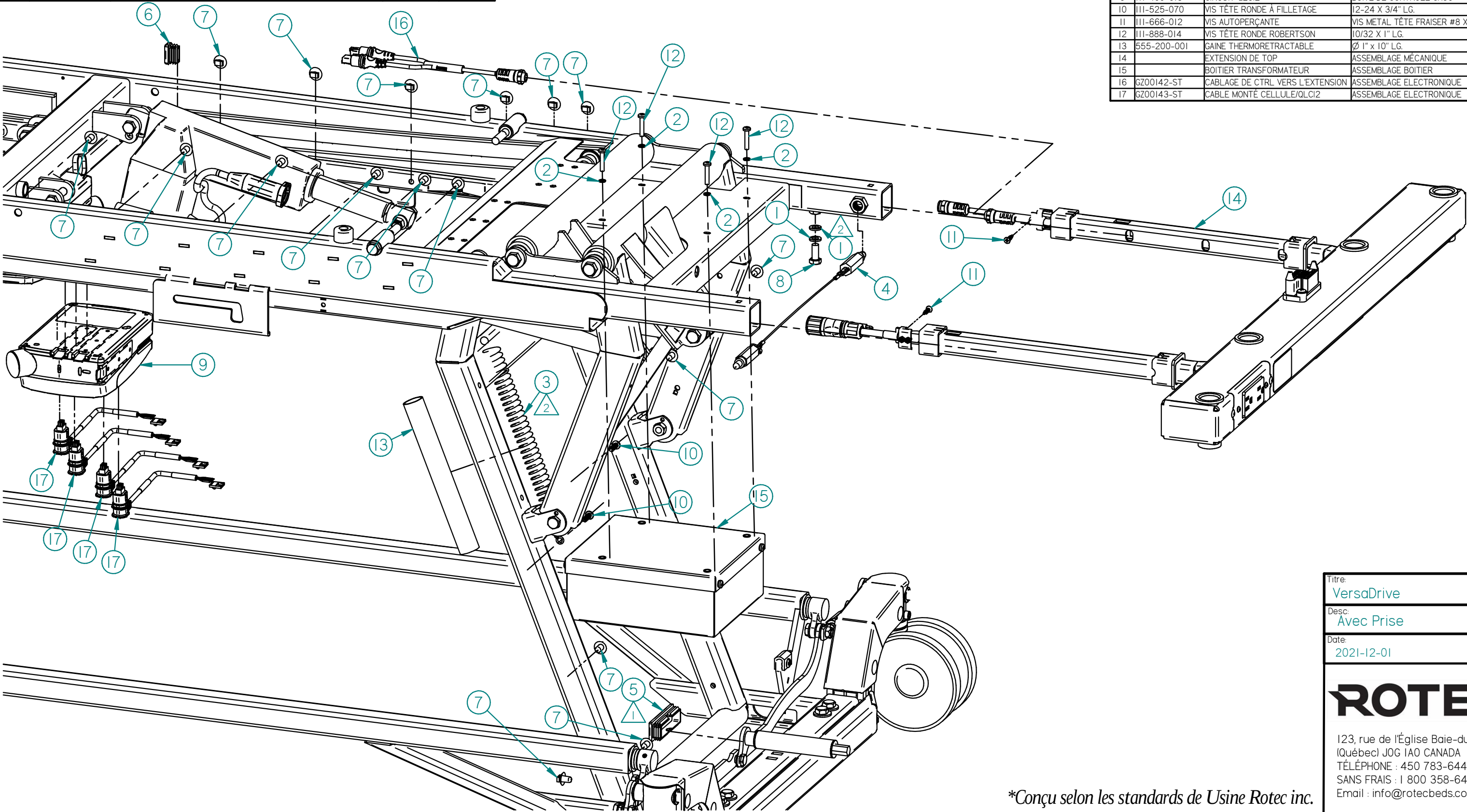

Titre:
VersaDrive

Desc:
Avec Prise


Date:
2021-12-01

ROTEC

123, rue de l'Église Baie-du-Febvre,
(Québec) J0G 1A0 CANADA
TÉLÉPHONE : 450 783-6444
SANS FRAIS : 1 800 358-6440
Email : info@rotecbeds.com

*Conçu selon les standards de Usine Rotec inc.

N°	# Item	Titre	Description	Qté
1	111-100-012	RONDELLE	RONDELLE no.8 3/16 X 7/16"	2
2	111-533-004	BOUCHON	BOUCHON OPENBUS	2
3	111-655-030-ASS	INDICATEUR GAUCHE ASSEMBLÉ	ASSEMBLAGE MÉCANIQUE	1
4	111-655-031-ASS	INDICATEUR DROIT ASSEMBLÉ	ASSEMBLAGE MÉCANIQUE	1
5	111-666-011	VIS TEK RUSPRO PAN CARRÉ	# 10-16 X 3/4" LG.	4
6	555-644-011	CÂBLE MJB	800mm	1
7	GU004-ASS	PLATEFORME DOSSIER PRÉ-ASSEMBLÉ	ASSEMBLAGE MÉCANIQUE	1
8	GZ00141-ST	CÂBLE	OPEN BUS 350mm LG.	2

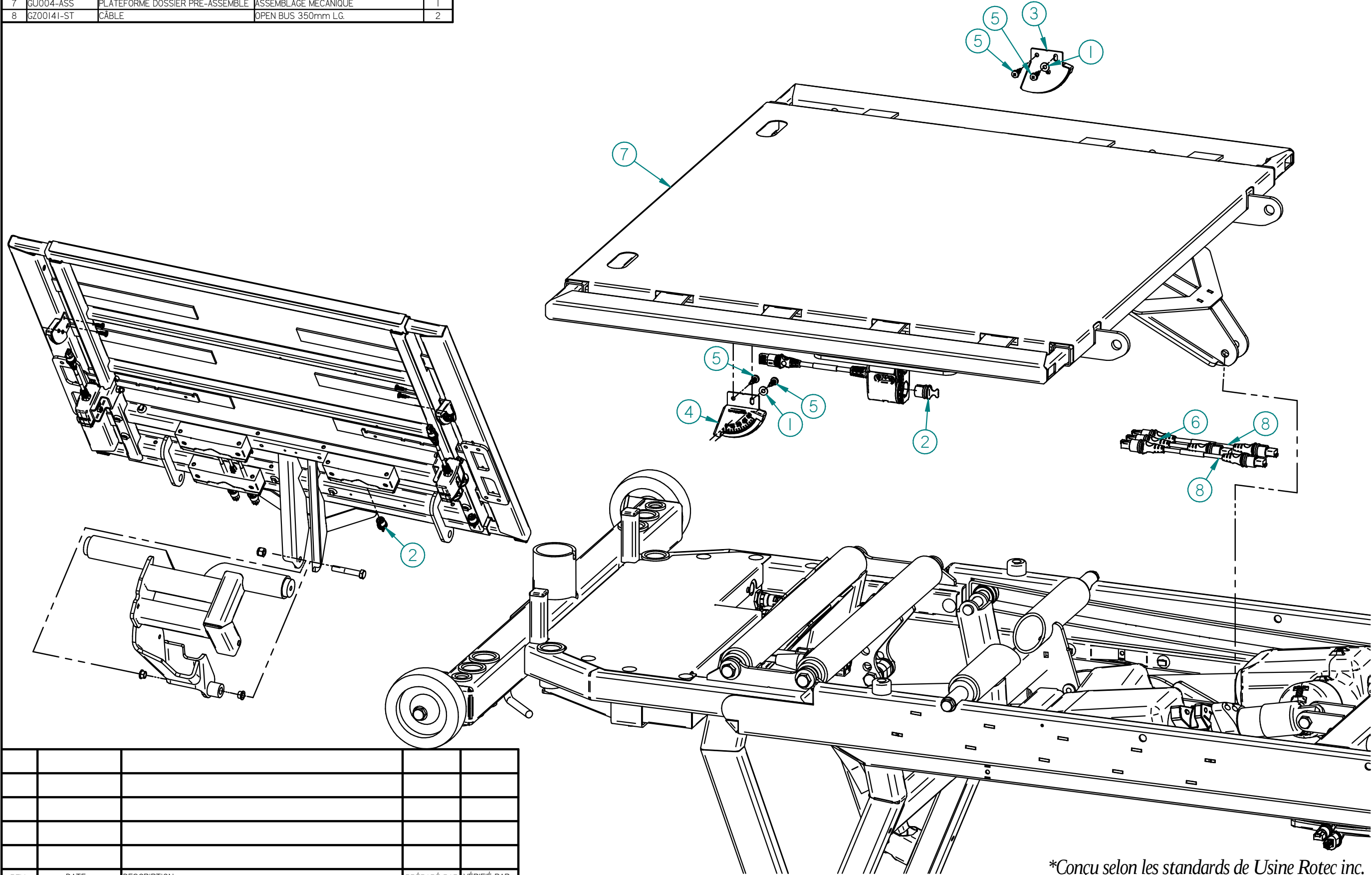

REV:	DATE :	DESCRIPTION :	PRÉPARÉ PAR	VÉRIFIÉ PAR

*Conçu selon les standards de Usine Rotec inc.

Titre:

VersaDrive

Desc:

PLATEFORME DOSSIER



Date:

2021-12-01

ROTEC

123, rue de l'Église Baie-du-Febvre,
(Québec) J0G 1A0 CANADA
TÉLÉPHONE : 450 783-6444
SANS FRAIS : 1 800 358-6440
Email : info@rotecbeds.com

N°	# Item	Titre	Description	Qté
1	III-133-043	RONDELLE	RONDELLE Ø1.250 OD X Ø0.390 ID X 0.082 TK	2
2	III-133-050	RONDELLE ESPACEUR	DE .625" X DI. .380" X .250" LG.	4
3	III-400-002	BOULON HEXAGONALE	3/8"-16 X 1" LG.	2
4	III-400-004	BOULON HEXAGONALE	3/8"-16 X 2 1/4" LG.	4
5	III-777-021	ÉCROU CHAPEAU	3/8"-16 UNC	2
6	III-888-003	ÉCROU HEX. NYLON IND.	3/8"-16 UNC	4
7	III-900-002	BAGUE À ÉPAULEMENT	3/8"DI x .505"DE x .250"Lg	2
8	GV004-ASS	PLATEFORME SIÈGE	ASSEMBLAGE MÉCANIQUE	1

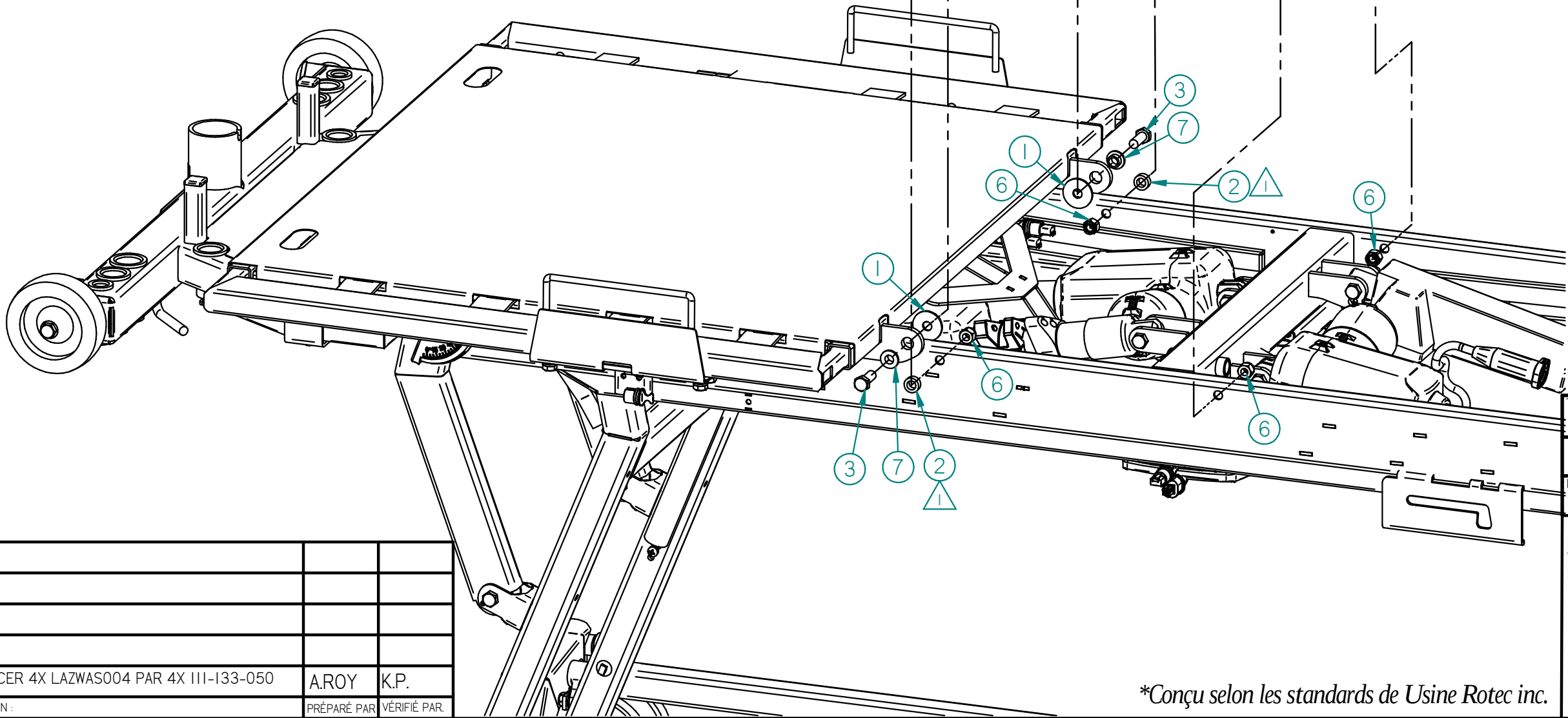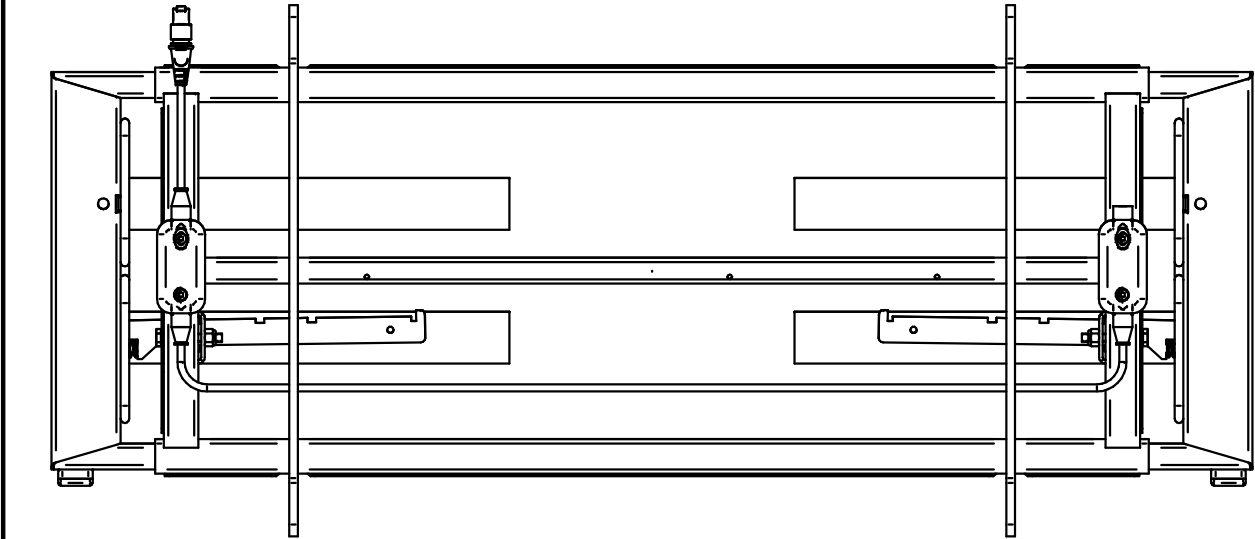

△1	2025-02-12	REPLACER 4X LAZWAS004 PAR 4X III-133-050	A.ROY	K.P.
REV:	DATE :	DESCRIPTION :	PRÉPARÉ PAR	VÉRIFIÉ PAR.

Titre:	VersaDrive
Desc:	PLATEFORME DE SIÈGE
Date:	2021-12-01


ROTEC

123, rue de l'Église Baie-du-Febvre,
(Québec) J0G 1A0 CANADA
TÉLÉPHONE : 450 783-6444
SANS FRAIS : 1 800 358-6440
Email : info@rotecbeds.com

*Conçu selon les standards de Usine Rotec inc.

Toute information contenue dans les dessins d'atelier et autres sources techniques est confidentielle et demeure la propriété exclusive de Usine Rotec inc. L'usage de l'information est limitée aux professionnels spécifiant les produits d'Usine Rotec inc et à leurs clients directs. Toute reproduction partielle ou totale de l'information présentée est strictement interdite sans le consentement écrit de Usine Rotec. Tous Droits Réservés - Usine Rotec inc.

N°	# Item	Titre	Description	Qté
1	III-133-043	RONDELLE	RONDELLE Ø1.250 OD X Ø0.390 ID X 0.082 TK	2
2	III-400-001	BOULON HEXAGONALE	3/8"-16 X 3/4" L.G.	2
3	III-777-021	ÉCROU CHAPEAU	3/8"-16 UNC	2
4	III-900-001	BAGUE À ÉPAULEMENT	375°DI x .500°DE x .125°Lg / Br .750°DE x.062°Ep	2
5	GW004-ASS	PLATEFORME DE CUISSE	PRÉ-ASSEMBLAGE MÉCANIQUE	1

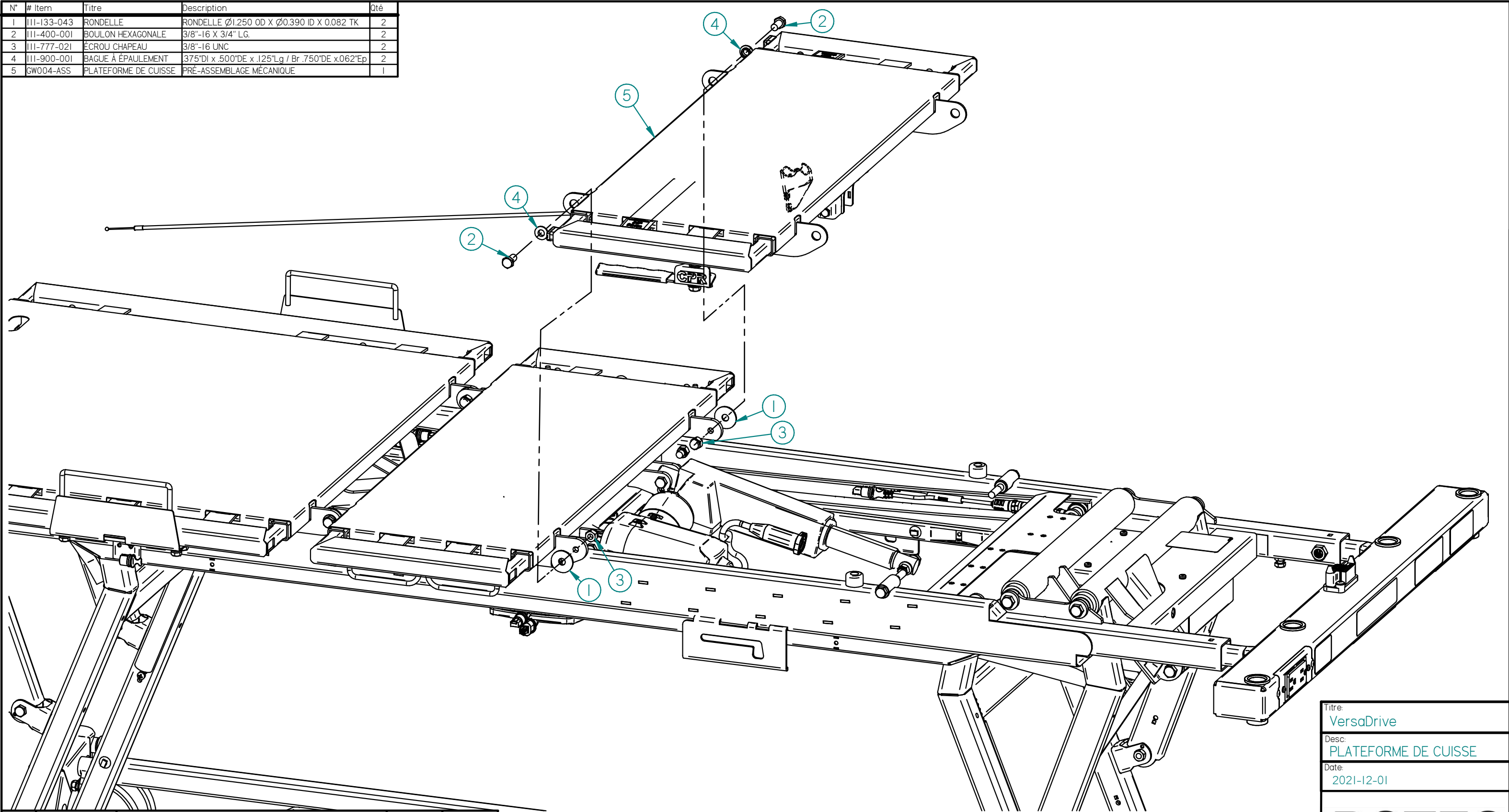

REV:	DATE :	DESCRIPTION :	PRÉPARÉ PAR	VÉRIFIÉ PAR

Titre:

VersaDrive

Desc:

PLATEFORME DE CUISSE

Date:


2021-12-01

ROTEC

123, rue de l'Église Baie-du-Febvre,
(Québec) J0G 1A0 CANADA
TÉLÉPHONE : 450 783-6444
SANS FRAIS : 1 800 358-6440
Email : info@rotecbeds.com

*Conçu selon les standards de Usine Rotec inc.

N°	# Item	Titre	Description	Qté
1	III-100-002	RONDELLE	5/16" I3/8 INT 7/8 EXT	2
2	III-100-012	RONDELLE	RONDELLE no.8 3/16 X 7/16"	1
3	III-III-002	BOULON HEXAGONAL	BOULON HEX 2 STEP 5/16-18 x .250	2
4	III-III-005	BOULON HEXAGONAL	BOULON HEX 2 STEP 5/16-18 x .344	2
5	III-133-002	RONDELLE PLATE	.750"DE x .390"DI x .062"Ep	2
6	III-133-043	RONDELLE	RONDELLE Ø1.250 OD X Ø0.390 ID X 0.082 TK	3
7	III-400-001	BOULON HEXAGONALE	3/8"-16 X 3/4" LG.	1
8	III-400-002	BOULON HEXAGONALE	3/8"-16 X 1" LG.	1
9	III-600-016	BOULON CARROSSERIE	1/4"-20 x 3/4" LG.	4
10	III-666-008	VIS TÊTE RONDE RUSPRO	VIS TEK RUSPRO PAN CARRÉ #8-18 x 3/4	1
11	III-777-021	ÉCROU CHAPEAU	3/8"-16 UNC	2
12	III-888-001	ÉCROU HEX NYLON IND.	1/4"-20 NYLON	4
13	III-900-001	BAGUE À ÉPAULEMENT	3/75"DI x .500"DE x .125"Lg / Br .750"DE x.062"Ep	4
14	III-900-002	BAGUE À ÉPAULEMENT	3/78"DI x .505"DE x .250"Lg	2
15	III-901-089DRT	RECOUVREMENT DE PLATEFORME DROIT	PLAQUE 5mm	1
16	III-901-089GCH	RECOUVREMENT PLATEFORME DE GAUCHE	PLAQUE 5mm	1
17	BC005-ASS	BAGUETTE DE PIED ASSEMBLÉ	ASSEMBLAGE MÉCANIQUE	1
18	GX004-ASS	PLATEFORME DE PIED	PRÉ-ASSEMBLAGE MÉCANIQUE	1

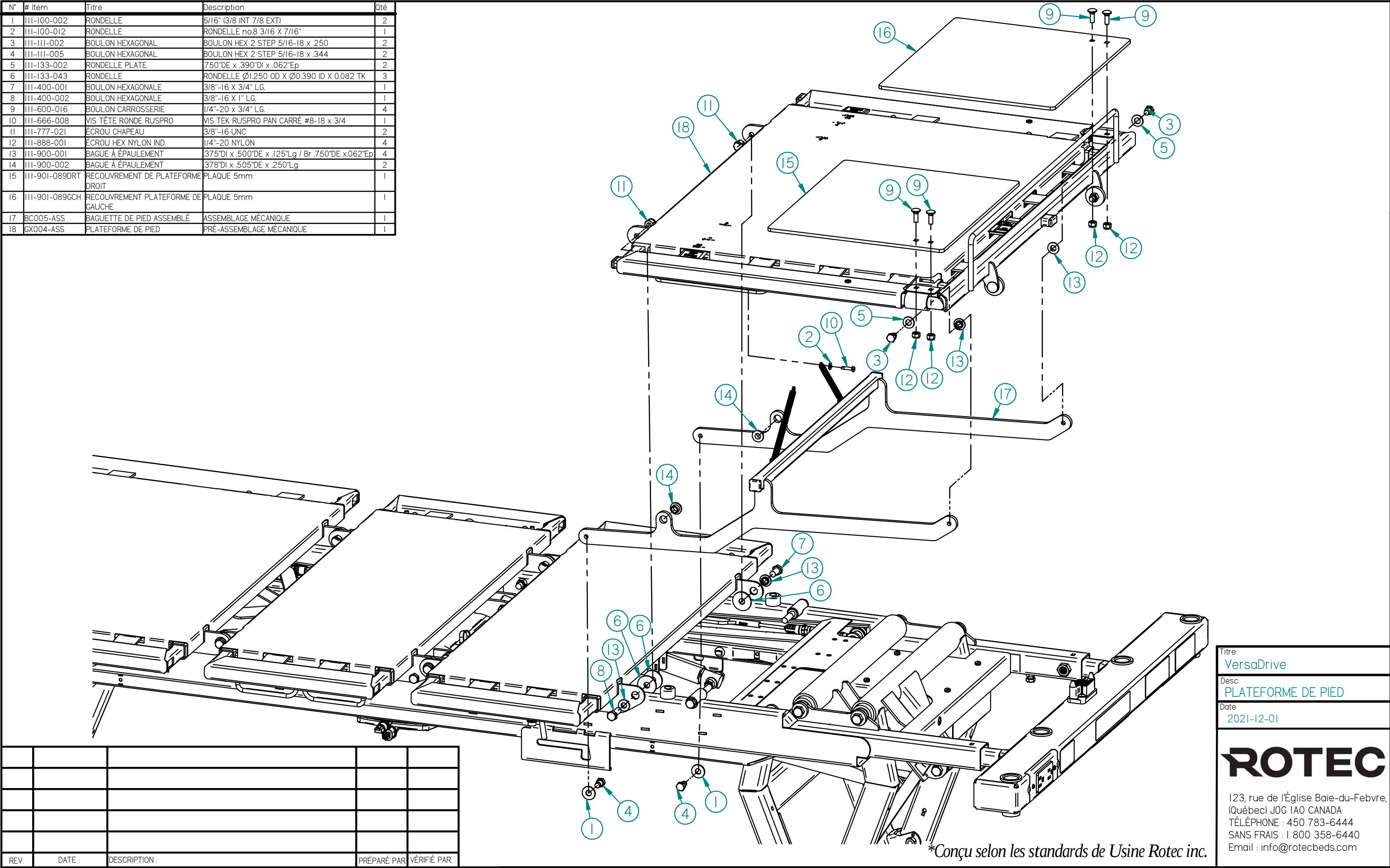

REV:	DATE :	DESCRIPTION :	PRÉPARÉ PAR	VÉRIFIÉ PAR

Titre:

VersaDrive

Desc:

PLATEFORME DE PIED

Date:


2021-12-01

ROTEC

123, rue de l'Église Baie-du-Febvre,
(Québec) J0G 1A0 CANADA
TÉLÉPHONE : 450 783-6444
SANS FRAIS : 1 800 358-6440
Email : info@rotecbeds.com

*Conçu selon les standards de Usine Rotec inc.

N°	#	Item	Titre	Description	Qté	N°	#	Item	Titre	Description	Qté
11			CÔTÉ PIVOTANT GAUCHE	ASSEMBLAGE	1	1	111-000-002	RONDELLE FREIN	RONDELLE FREIN 5/16"		20
12			CÔTÉ PIVOTANT	ASSEMBLAGE MÉCANIQUE	1	2	111-300-001	BOULON	Boulon hex 5/16-18 x 3/4" LG.		16
13			CÔTÉ PIVOTANT	ASSEMBLAGE MÉCANIQUE	1	3	401-500-018	MANETTE	MANETTE AUTO-CONTOUR		1
14	FH001		RAMBARDE DE MATELAS	ASSEMBLAGE SOUDÉ	4	4	500-000-035	AUTOCOLLANT	IDENTIFICATION DU LIT		1
15	NUMERO SERIE		ÉTIQUETTE	NUMERO DE SERIE	1	5	500-100-001	ÉTIQUETTE	AUTOCOLLANT POUR TRAPÈZE		1
16		2	PANNEAU DE LIT DE PIED VERSATECH 1100	ASSEMBLAGE MÉCANIQUE	1	6	500-100-016	AUTOCOLLANT	DIMENSION MATELAS		1
			JLB			7	500-100-017	AUTOCOLLANT	POIDS LIMITE		1
17			PANNEAU DE LIT	ASSEMBLAGE MÉCANIQUE	1	8	500-100-018	AUTOCOLLANT	AUTOCOLLANT SPECIFICATION PATIENT (ft/lb)		1
						9	500-100-042	AUTOCOLLANT	BALANCE CE		1
						10			CÔTÉ PIVOTANT DROIT	ASSEMBLAGE	1

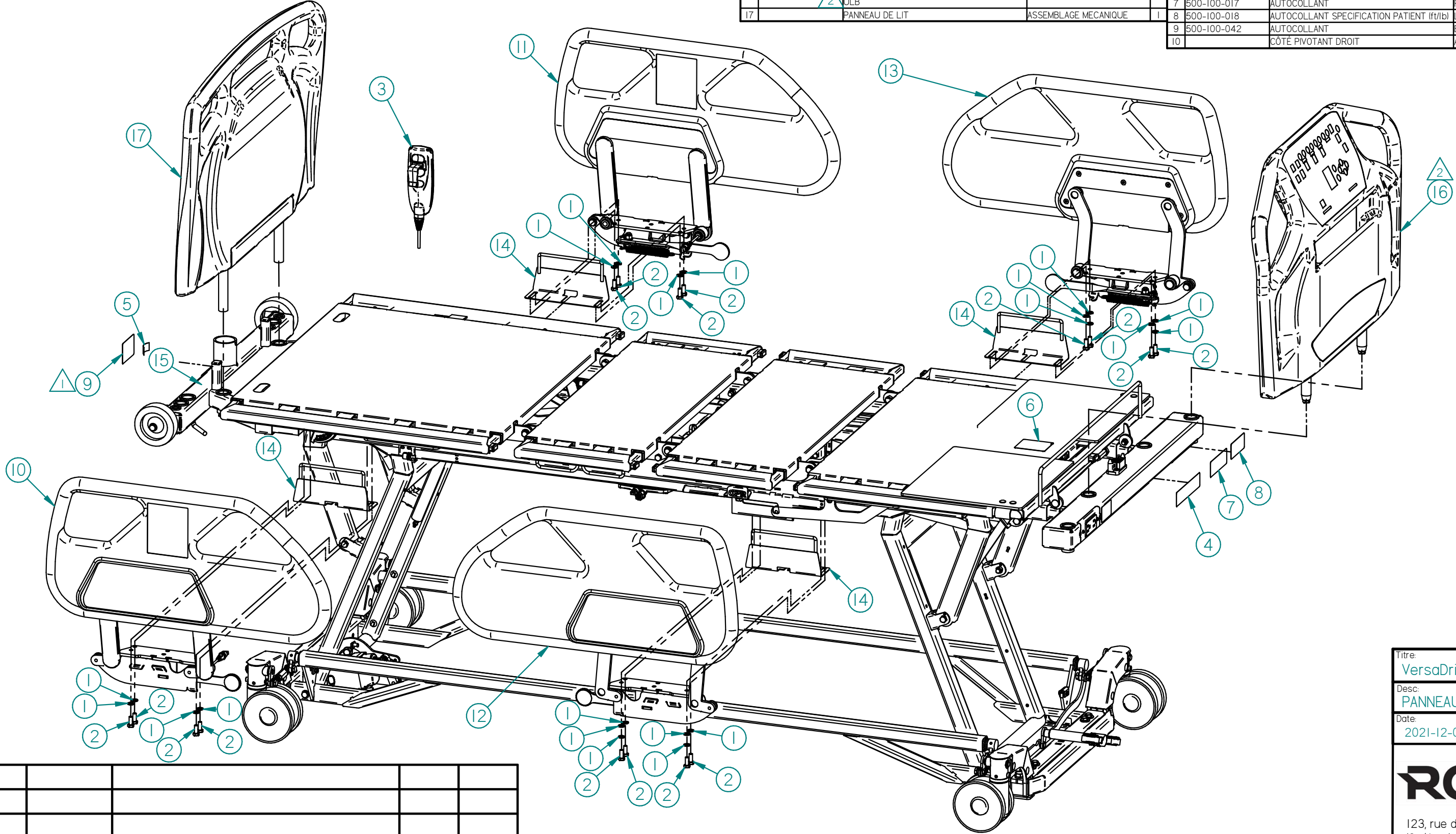

2	2024-10-23	ENLEVER VE-PE12-C002 REMPLACER PAR VE-PE13-C002	A.ROY	K.P.
1	2023-12-11	AJOUTER 500-100-042	A.ROY	K.P.
REV:	DATE :	DESCRIPTION :	PRÉPARÉ PAR	VÉRIFIÉ PAR.

Titre:
VersaDrive

Desc:
PANNEAUX ET RIDELLES

Date:
2021-12-01

ROTEC

123, rue de l'Église Baie-du-Febvre,
(Québec) J0G 1A0 CANADA
TÉLÉPHONE : 450 783-6444
SANS FRAIS : 1 800 358-6440
Email : info@rotecbeds.com

*Conçu selon les standards de Usine Rotec inc.

ROTEC


123 rue de l'Église Baie-du-Febvre,
(Québec) J0G 1A0 CANADA
TÉLÉPHONE : 450-783-6444
SANS FRAIS : 1-800-358-6440
Email : info@rotecbeds.com


Titre :
SCHEMA DE BRANCHEMENT

Desc :
CONTROLLEUR ET TRANSFORMATEUR

Date :
2022-03-31

1	111-488-003	ATTACHE NYLON	ATTACHE 6" LG.	60
2	111-488-005	SERRE CABLE	SERRE CABLE Ø 3/16	28
3	111-488-006	SERRE CABLE	SERRE CABLE Ø 1/4	3
4	111-488-007	ATTACHE NYLON	ATTACHE 12" LG.	15
5	111-488-011	ATTACHE NYLON	ATTACHE 14" LG.	8
6	111-666-008	VIS RUSPRO	VIS #8-18 x 3/4	7
7	111-666-011	VIS TEK	VIS #10-16 x 3/4" LG	10

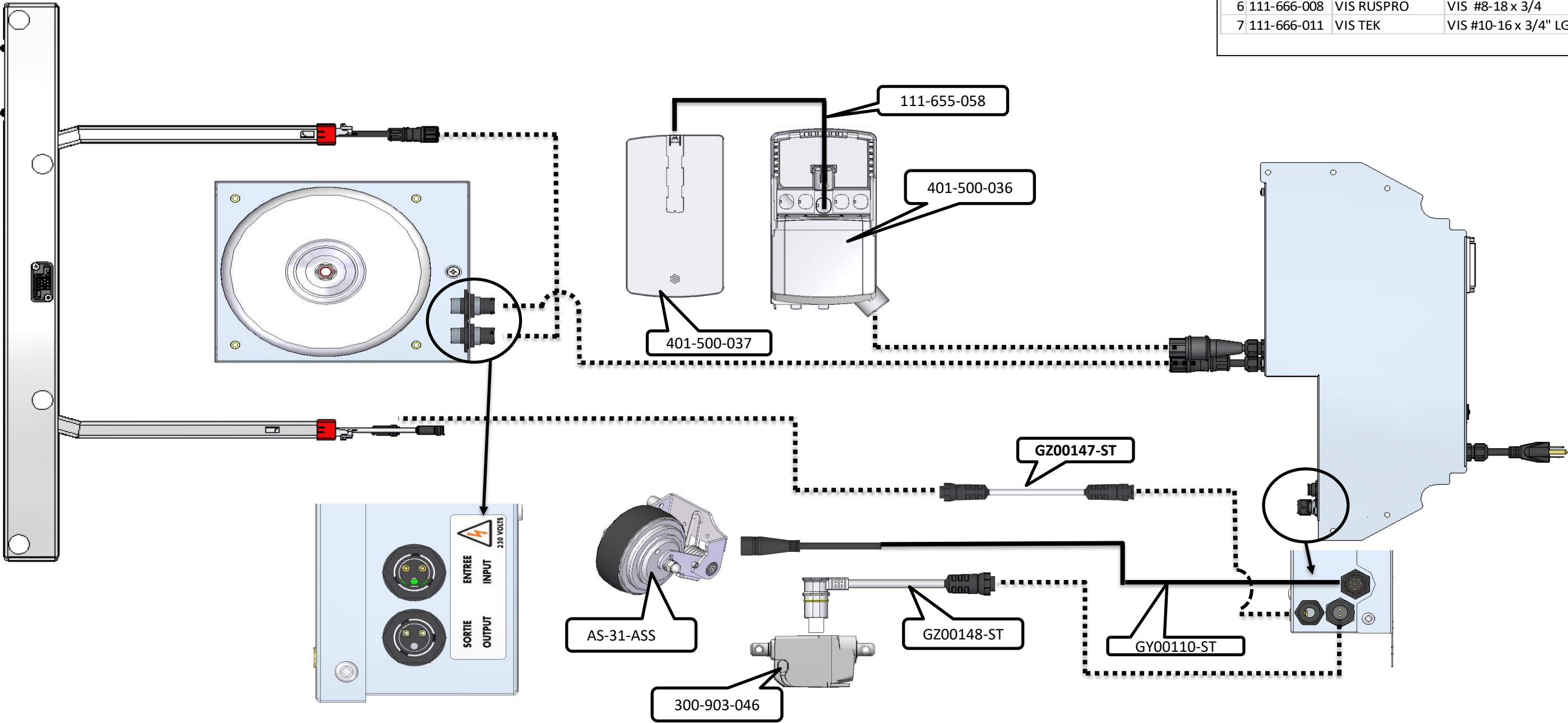

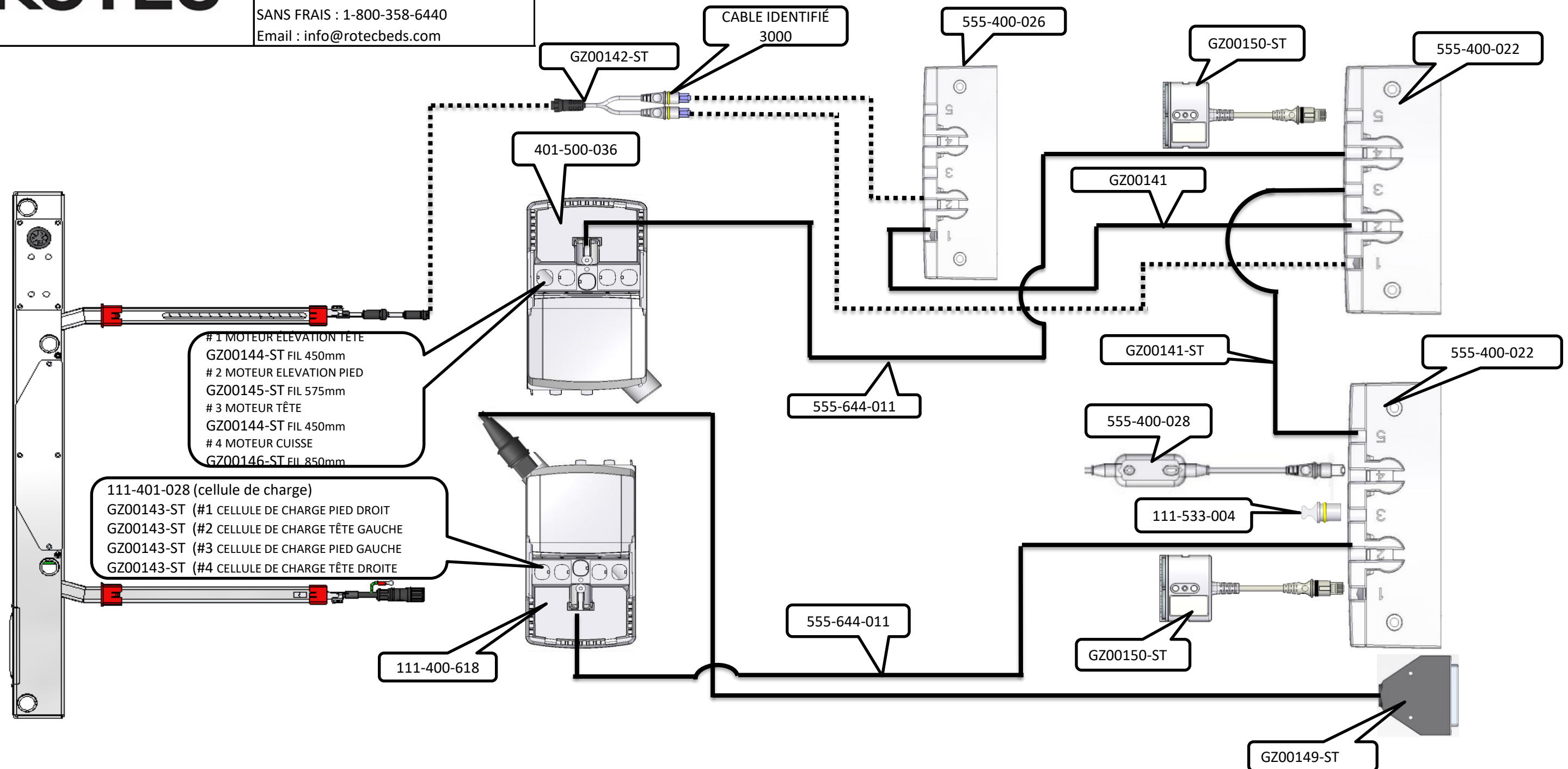



123 rue de l'Église Baie-du-Febvre,
(Québec) J0G 1A0 CANADA
TÉLÉPHONE : 450-783-6444
SANS FRAIS : 1-800-358-6440
Email : info@rotecbeds.com

Titre :
SCHEMA DE BRANCHEMENT

Desc :
MOTEUR ET CELLULE DE CHARGE

Date :
2022-03-31

