


ROTEC

VersaTech Med-Surg XL

Lit au profil ultra-bas avec option de système d'assistance motorisé VersaDrive conçu pour accommoder un matelas de 99 cm (39 pouces) pour offrir plus de confort à une plus large gamme de patients.

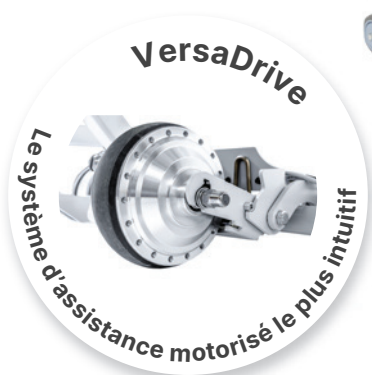

Modèle V700 ULB



Capacité de charge de 320 kg (700 lb)



Balance intégrée avec système de détection de sortie de lit 3 zones



Robuste, fiable et facile à utiliser



Pied de lit ergonomique avec barrières latérales au design unique 1/3-2/3



Lit à profil Ultra-Bas 21 cm (8") pour prévenir les blessures liées aux chutes



Structure recouverte d'une peinture cuite antimicrobienne facilement nettoyable



Le lit Med-Surg le plus bas au monde



Panneau de contrôle facile à utiliser



Barrières latérales au design unique 1/3 - 2/3

- › **Balance intégrée** avec système de détection de sortie de lit 3 zones, signal d'avertissement intégré au port DB-37 et indicateur visuel et sonore
- › **Pied de lit** ergonomique intégrant porte-pompe et porte-accessoires
- › Largeur de 99 cm (39") pour **plus de confort**
- › Facilement **extensible en longueur**, sans outils, de 203 cm à 213 cm à 223 cm (80" à 84" à 88")
- › **Capacité de charge** de 320 kg (700 lb)
- › Lit ultra-bas de 21 cm (8") : **prévient les blessures liées aux chutes**
- › Moteurs CC ultra-silencieux
- › Batterie de secours pour une autonomie temporaire
- › Facile à entretenir avec des composants à connexion rapide
- › **Frein central** : une pédale au pied du lit
- › Tête et pied de lit en composite léger pour faciliter l'utilisation
- › Structure d'acier recouverte d'une peinture cuite **antimicrobienne**, facilement nettoyable
- › **Roues** doubles antistatiques de 125 mm (5")
- › **2 paires de barrières latérales au design unique 1/3 - 2/3**
- › Manette patient avec **auto-contour**
- › Contrôle patient intégré dans les côtés de lit avec auto-contour, éclairage sous le lit et **appel infirmier**
- › Appel infirmier dans les côtés de lit avec sortie DB-37
- › Contrôle infirmier intégré dans le pied de lit, simple d'utilisation
- › Verrouillage des fonctions du lit à partir du contrôle infirmier au pied du lit
- › Butée d'arrêt de matelas au pied et côtés de lit
- › Indicateur d'angle du dossier et du Trendelenburg
- › Ajustement en Trendelenburg accessible d'une seule touche
- › Veilleuse double sous le lit
- › Multiples ouvertures pour les sangles de contentions
- › Parechocs à la tête du lit
- › Supports pour tige à soluté et pour bonbonne d'oxygène
- › Support pour trapèze
- › **CPR électrique**
- › **CPR mécanique** - 2 poignées
- › Fabriqué au Canada
- › Certifié CSA selon les normes canadiennes, américaines et internationales



Options

- › Prise auxiliaire située à l'extrémité du pied du lit
- › Système d'assistance motorisé VersaDrive : le plus facile et le plus intuitif sur le marché. Cette option n'affecte pas la caractéristique ultra-basse du lit.

Électronique

Voltage	220/230/240 Vac	120 Vac
Ampérage	7.15 A max	9.65 A max
Fréquence	50Hz	60Hz
Courant de fuite	<300 microamps	<300 microamps
Batterie	2.85aH Lithium (Lit) 9aH NiMH (Option Drive)	2.85aH Lithium (Lit) 9aH NiMH (Option Drive)
Précision balance	±1 kg en service	±2.2 lb en service

Accessoires

- › Barre avec trapèze
- › Tige à soluté
- › Tige à soluté rétractable à gauche et/ou à droite
- › Support pour bonbonne d'oxygène
- › Câble adaptateur DB-37
- › Manette supplémentaire
- › Chariot de transport
- › Protège ridelles
- › Matelas de 99 cm (39")

Spécifications techniques

Largeur de la plateforme : 97,8 cm (38 1/2")

Largeur hors tout : 114 cm (43 7/8")

Longueur de la plateforme : Ajustable de 203 cm à 213 cm à 223 cm (80" à 84" à 88")

Longueur hors tout à 203 cm (80") : 237 cm (93 3/8")

Longueur hors tout à 223 cm (88") : 257 cm (101 1/8")

Hauteur minimale : 21 cm (8")

Hauteur maximale : 81 cm (32")

Capacité de charge : 320 kg (700 lb)

Angle du dossier : 70°

Angle des jambes : 32°

Position Trendelenburg : -15° à +15°

Dégagement sous le lit : 14,9 cm (5 7/8")

Poids du lit : 248 kg (545 lb)

Prise de courant auxiliaire : 120V 5A ou 220V 2,5A

Autonomie du système d'assistance motorisé : ~ 8 km (5 miles)